


Ficha técnica y de seguridad: Sonda de Succión Cerrada.

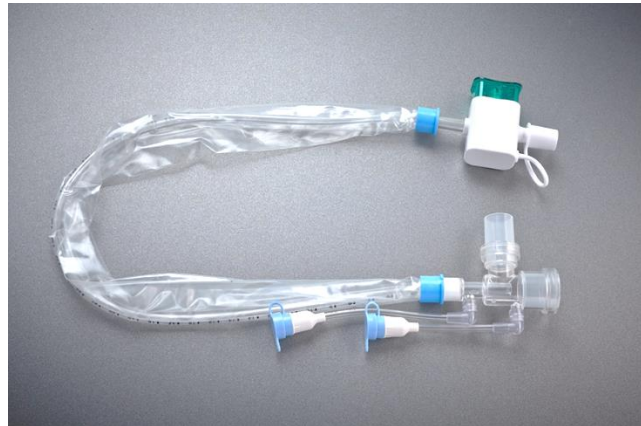

Registro sanitario INVIMA: 2021DM-0024643 válido hasta 24/11/2031.

Clasificación INVIMA: IIA, invasivo de uso transitorio.

Importado y comercializado por Industrias Cardiomed SAS.

Descripción:

Uso exclusivo para proveer continuamente oxígeno y succión en intubación y ventilación traqueal de pacientes.

Partes:

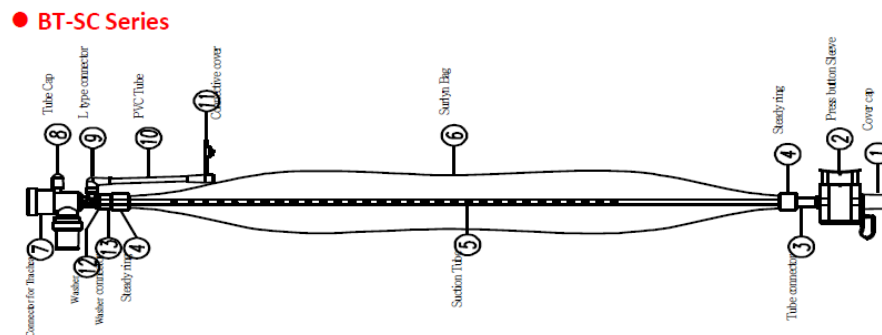


Fig.1: BT-SC1-1454 diagram.

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Cover cap. | 2. Press button sleeve. |
| 3. Tube connector. | 4. Steady ring. |
| 5. Suction tube. | 6. Surlyn bag. |
| 7. Connector for Trachea. | 8. Tube cap. |

9. L type connector.
11. Connective cover.
13. Washer connector.

10. PVC tube.
12. Washer.

Características:

Catéter incluido: lumen con cuerpo y punta radiopaca.

Libre de látex para evitar complicaciones en pacientes sensibles al látex.

Especificación	Parámetro
Material	PVC.
Método de esterilización	Óxido de etileno.
Vida útil	5 años desde fecha de esterilización.
Almacenamiento	Almacenar lejos de luz solar, con temperatura recomendada entre 0°C y 50°C, y humedad relativa entre 20% y 80%.
País de origen	R.P.C.
Marca	Plus Vital ®.

Tamaños y presentaciones:

Referencia	Tamaño	Empaque
TR00102	5 FR x 32 cm – 24 h	Bolsa por unidad.
TR00026	6 FR x 32 cm – 24 h	Bolsa por unidad.
TR00027	8 FR x 36 cm – 24 h	Bolsa por unidad.
TR00025	10 FR x 41 cm – 24 h	Bolsa por unidad.
TR00022	12 FR x 54 cm – 24 h	Bolsa por unidad.
TR00085	14 FR x 36 cm – 24 h	Bolsa por unidad.
TR00023	14 FR x 54 cm – 24 h	Bolsa por unidad.
TR00024	16 FR x 54 cm – 24 h	Bolsa por unidad.

Precauciones:

Hemorragia.

Oclusión en vía aérea.

Estimulación vagal.

Arritmias cardíacas.

Hipoxia.

Traqueítis.


Advertencias:

Producto de un solo uso, no re-esterilizar.

Siempre usar sticker de identificación con fecha actual.

Si hay alguna rotura en la protección del catéter debe ser inmediatamente sustituido por uno nuevo, no usar si el paquete está dañado o abierto.

Siempre usar con técnica adecuada de asepsia.

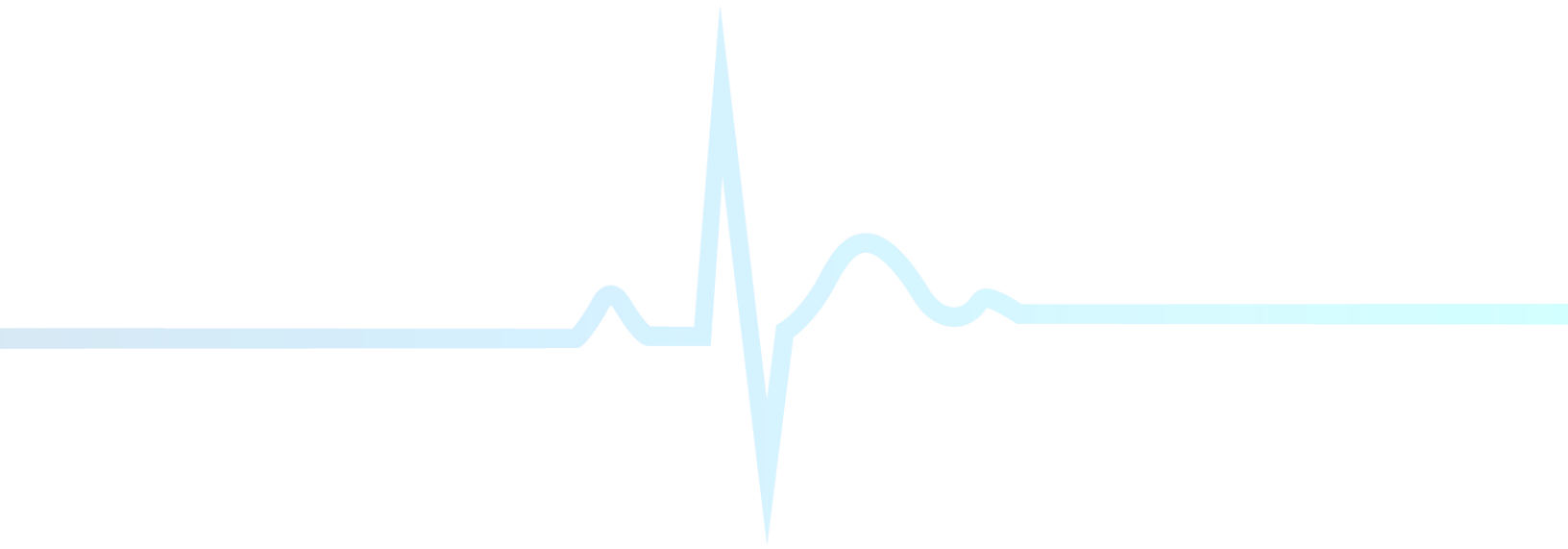

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
	<i>Emmanuel Mendez E</i>	