





- **Composición y conexiones de la consola
IMAGE 1 SPIES**

- ① Interruptor de red
- ② Balance de blancos
- ③ Puerto USB
- ④ Conexión equipotencial
- ⑤ Entradas LINK
- ⑥ Conectores de entrada/salida SCB (STORZ Communication Bus)
- ⑦ Interfaz LAN
- ⑧ Interfaz USB
- ⑨ Conectores de salida de vídeo HD DVI-D
- ⑩ Conexión equipotencial
- ⑪ Salida de vídeo SDI 3G
- ⑫ Conector de red
- ⑬ Salidas LINK
- ⑭ Conexión para cámara H3-LINK
- ⑮ Conexión para cámara X-LINK

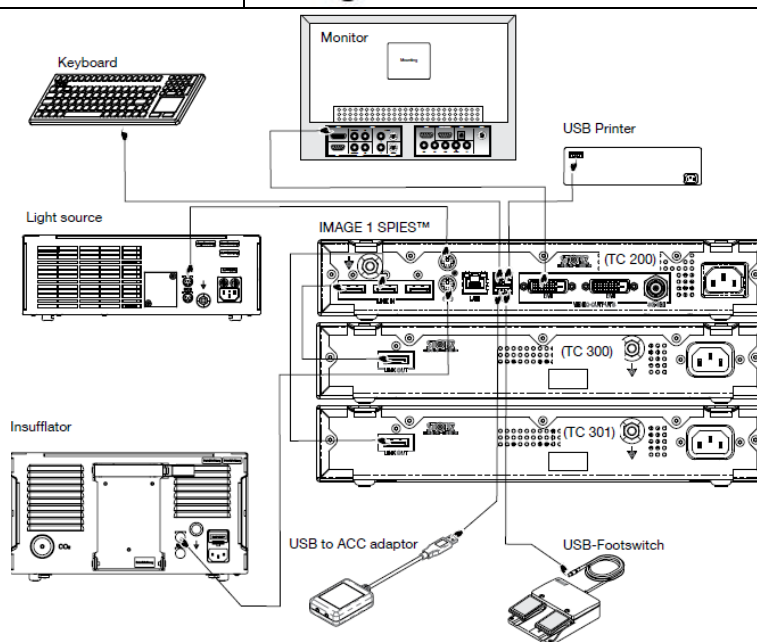

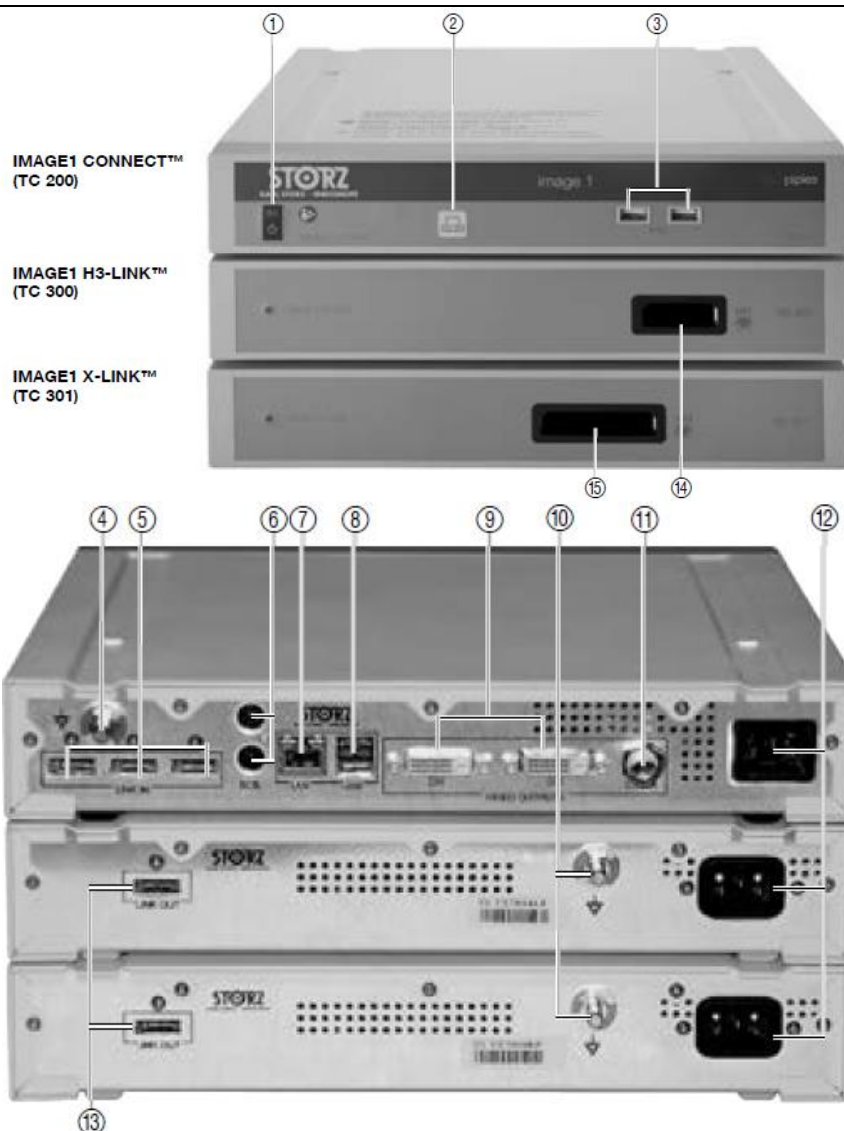

• Conexión de módulos y equipos

- Conecte el módulo LINK a la IMAGE1 CONNECT™ a través del cable LINK incluido en el suministro.
- Conecte el cable de SCB para controlar cualquier equipo Karl Storz.
- Conecte el monitor a la IMAGE1 CONNECT™ con el cable DVI.
- Las interfaces USB de la IMAGE1 CONNECT™ son apropiadas para la conexión de Teclado, mouse, impresora, interruptor de pedal.
- Conecte el cable AC en cada una de las consolas.



• Puesta en Marcha de la CCU Spies

- Encienda la IMAGE1 CONNECT™ oprimiendo el botón de encendido.
- Conecte el dispositivo de almacenamiento USB a la IMAGE1 CONNECT™ TC 200, para guardar imágenes fijas y/o videos.
- Inserte el enchufe del cabezal de la cámara en el conector del respectivo módulo LINK.



• Instrucciones operativas

El manejo de la IMAGE 1 SPIES™ está dividido en tres niveles de menú:

- Panel de control
- Menú Live
- Menú Setup

• Manejo con el teclado/mouse

Con el teclado y el ratón puede navegar por los menús. Para introducir los datos del paciente es necesario contar con un teclado.

• Botones del cabezal de cámara

(15) Rodar hacia arriba: para desplazarse hacia arriba por las opciones de un menú.

(17) Menú/Selección: visualización del menú Live. Una vez que aparezca este menú, este botón activa la opción resaltada (como pulsar INTRO en el teclado del ordenador).

(16) Rodar hacia abajo: para desplazarse hacia abajo por las opciones de un menú.



• MENÚ - Panel de control

El panel de control muestra los aparatos, los soportes de datos y los módulos LINK conectados a la IMAGE1 CONNECT™. Los aparatos, soportes de datos y módulos LINK no conectados aparecen en color gris.


NOTA: El panel de control se muestra cuando no hay ningún cabezal de cámara/videoendoscopio conectado.



• MENÚ - LIVE

El menú Live permite seleccionar diferentes funciones de la cámara y modificar los ajustes de los aparatos conectados. Los aparatos **no conectados aparecen en color gris**.

NOTA: Acceda al menú Live pulsando la tecla Intro en el teclado o pulsando el botón Menú o en el cabezal de la cámara/ videoendoscopio

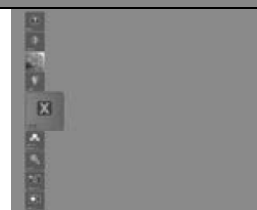

• MENÚ - SETUP

En el menú Setup puede modificar tanto los ajustes generales de la IMAGE1 CONNECT™ como los ajustes específicos de Link, y opcionalmente guardarlos como preajustes.

Acceda al menú Setup pulsando la tecla Ajustes en el panel de control o pulsando el botón central del cabezal de la cámara durante 7 segundos estando en el menú Live. Como alternativa, también puede acceder al menú Setup pulsando MAYUSC+INTRO en el teclado.

○ Este documento no reemplaza el manual de usuario, cualquier duda debe referirse a dicho manual.