


• Composición y conexiones del ENDOFLATOR


1. Interruptor de red ("0" = des conectado)
2. Pantalla Táctil
3. Conexión de insuflación al paciente
4. Conexión para el calefactor del tubo flexible para el paciente
5. Sensor de temperatura ambiente
6. Conexión de gas (tipo americano)
7. Conexiones SCB
8. Interfaz para servicio técnico (oculta)
9. Interfaz para Ethernet (oculta)
10. Conexión equipotencial
11. Conector de red
12. Portafusibles
13. Soporte para botella de CO2 (opcional)

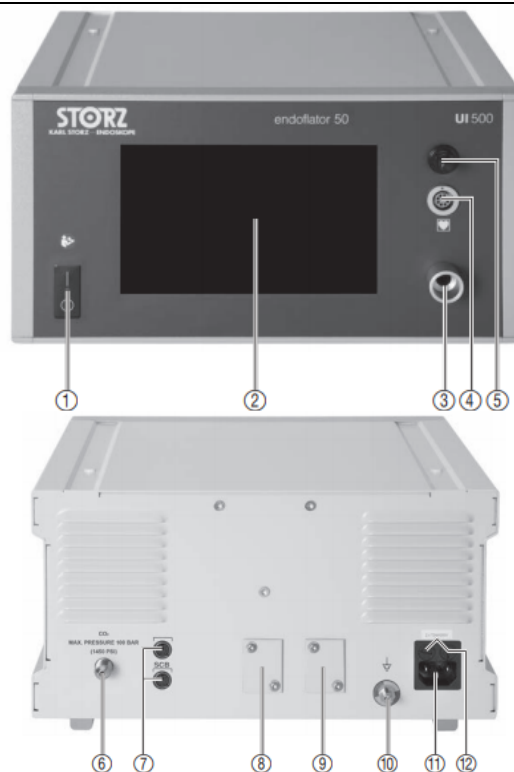

• Seleccionar fuente de alimentación

Seleccione la fuente de alimentación en el submenú (fuente de gas)

Confirme la opción seleccionada pulsando (15), o bien cancele los cambios pulsando (14)


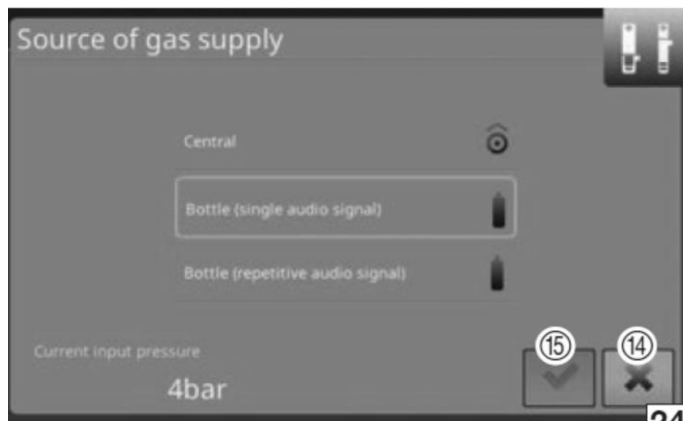


• Instrucciones de inicio

- Conecte el cable AC
- Conecte la salida de gas de la botella (alta presión) o de la central de gas (baja presión) mediante el tubo flexible con la conexión para gas del equipo.
- Oprima el interruptor principal.
- Seleccione tipo de paciente.
- Abra la válvula de la botella de CO2




- Confirme los valores nominales de presión y flujo con las teclas de la pantalla táctil +/-
- La activación de la tecla CONEXIÓN/DESCONEXION inicia la insuflación
- Coloque el filtro de gas CO2 esterilizado en el conector de insuflación. Aplique el tubo flexible de insuflación al filtro de gas CO2

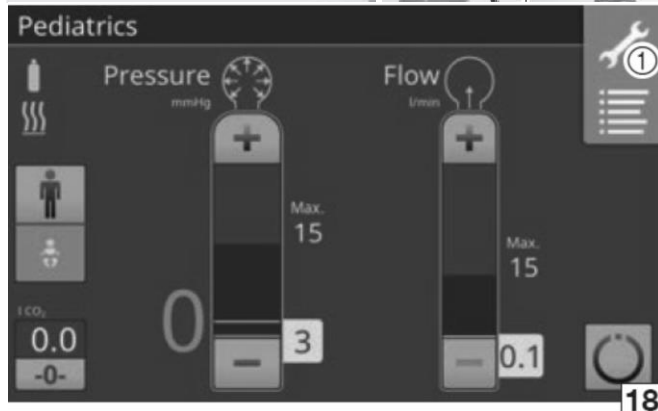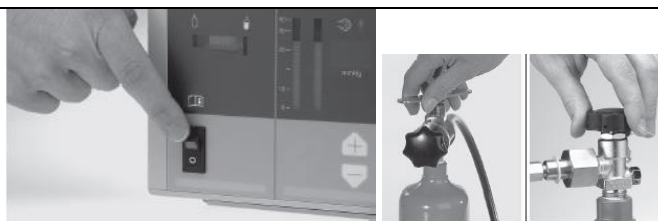

• Preparación para la insuflación

- Introduzca la presión de paciente deseada con las teclas +/-.
- Introduzca el flujo de gas previsto con las teclas +/-.
- Comience con el proceso de insuflación presionando la tecla de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN
- La presión de insuflación, el flujo y el volumen del gas utilizado pueden leerse continuamente en los indicadores
- Si la presión del paciente sobrepasa durante más de 3 segundos por más de 5mmHg el valor preseleccionado, suena una señal de alarma.

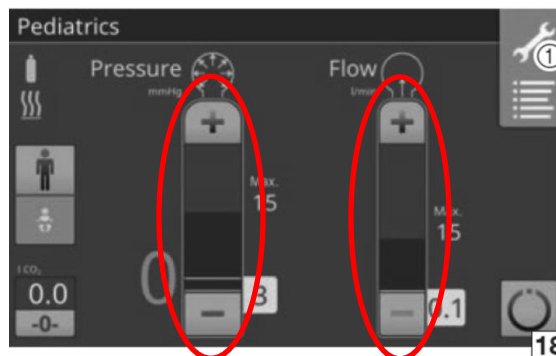

○ Este documento no reemplaza el manual de usuario, cualquier duda debe referirse a dicho manual.

BOGOTÁ, D.C.
Calle 123 # 7-50
PBX: 6583100 info.bogota@biotronitech.com.co

SUROCCIDENTE
Av. 8 Norte # 25-181 Santa Mónica Residencial-Cali
PBX: 6504432/33
info.suroccidente@biotronitech.com.co

ANTIOQUIA
Cra. 48# 25 AA sur -70 Complex Las Vegas Of. 508, Envigado
PBX: 4445079
info.antioquia@biotronitech.com.co

NORTE
Calle 106 # 50-87 OF. 3030 C.C. Grand Boulevard, Barranquilla
PBX: 3860061
info.caribe@biotronitech.com.co

CARTAGENA
Centro De Experiencia - Vía al Mar KM 8
Móvil: 3175742706
info.caribe@biotronitech.com.co

SANTANDERES
Móvil: 3167402751
info.bogota@biotronitech.com.co

EJE CAFETERO
Móvil: 317 4372408
info.suroccidente@biotronitech.com.co