


EQUIPO: FIBRA DE LUZ

MARCA: KARL STORZ

MODELO:

DESCRIPCIÓN DE BOTONES (Selectores, perillas, puertos, etc)			
1	Conector de fibra a la consola	11	
2	Cuerpo	12	
3	Conector al sistema óptico	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

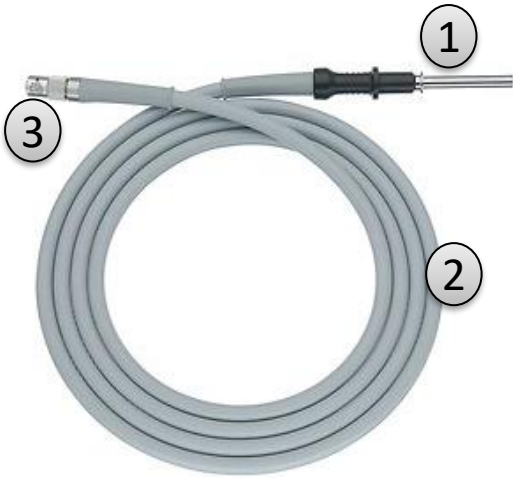

EQUIPO: FIBRA DE LUZ

MARCA: KARL STORZ

MODELO:

ANTES DE ENCENDIDO

1	Verifique que el dispositivo no presente daño en cuerpo
2	Verifique el estado de los canales
3	Verifique que la llave no presente daño

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

5	Realice conexión de las mangueras en los acoples
6	Estas no deben quedar sueltas
8	Evite el uso de dispositivos en mal estado (Cable, Placa, Electrodo)

LIMPIEZA

2	Genere inspección visual del dispositivo que no presente daños en su insulado de protección
3	Con cepillo de celdas finas retire todo tipo de residuo ubicado en la punta distal del dispositivo.
4	Sople con aire comprimido hasta secar
5	Sumerja completamente el instrumento en una solución desinfectante asegúrese que todas las superficies queden completamente humedecidas
6	Secar con aire comprimido todos los articulación y orificios

DAÑOS FRECUENTES

1	Perdida de piezas de la llave
2	Ruptura del cuerpo del dispositivo por acción mecánica

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?

Si detecta alguna falla no utilice el equipo. Comuníquese con su departamento de Tecnología o con nosotros a nuestra línea nacional

PBX: (571) 658 3100 o a nuestro correo info@biotronitech.com.co.