



ELECTROCARDIOGRAFO IMPRESIÓN TERMICA DE 3 CANALES CON 12 DERIVACIONES INTERPRETATIVO CONTEC ECG 300G

Guía rápida

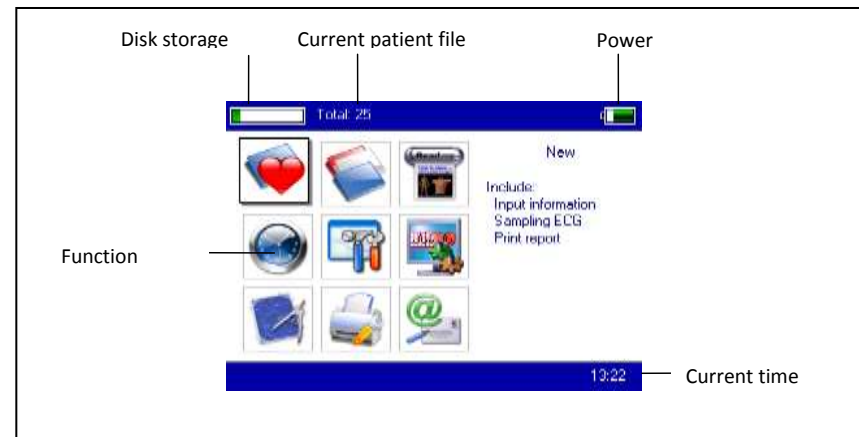

Introduzca interfaz de muestreo. Cuando el instrumento está encendido, éste se iniciará automáticamente esta operación.

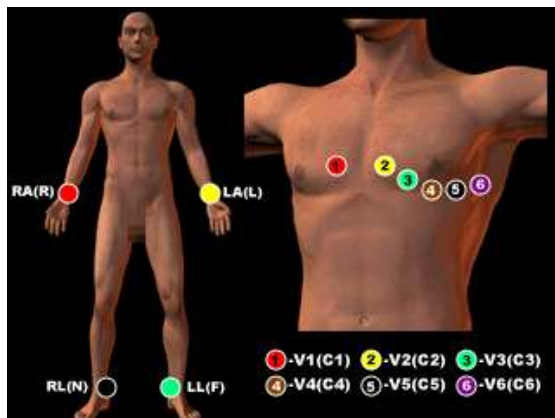

Introduzca Archivo interfaz de gestión, consulta, modificar o eliminar la información de archivo



Ver mapa esquemático para la colocación de electrodos



Fecha y hora



Configuración del sistema



Configuración de muestreo



Análisis de los parámetros de configuración. Ajustes para cada parámetro utilizando para el análisis automático



Ajustes de impresión, el modo de impresión establecido, el estilo y el contenido.



Sobre nosotros, muestran información acerca de nuestra empresa y la versión de software

www.germarmedical.com



Paper Cabinet Cover

Control Panel



Función tecla: on/off encendido apagado



Función tecla: además de ajustar



Función tecla: ajuste velocidad de papel



Función tecla: filtros



Función tecla: menú



Función tecla: cambiar el modo de impresión



Función tecla: 1mV marca



Función tecla: imprimir



Función tecla: entrada ok o aceptado



El indicador se vuelve verde cuando hay alimentación de CA, y cuando el indicador se ve verde y rojo que se está recargando.



Indicador de instrumentos cuando el poder.