

Correas de sujeción



Correas de sujeción: mueva la hebilla hasta lograr el ajuste deseado y abraque para asegurar.

Limpieza colchoneta



La tinta de bolígrafos, marcadores y plumas, puede ser absorbida, causando manchas.



Limpieza periódica. Utilice una solución jabonosa suave y retírela completamente, utilizando una tela blanca húmeda.



No limpie con solventes (thinner, varsol, acetona, alcohol, ceras, siliconas o detergentes); causan daños permanentes.



Evite sentarse con elementos cortopunzantes que puedan rayar, rasgar y/o cortar el tapizado de la silla



Consulte el manual de usuario y operación.



G U Í A R Á P I D A



Camillas Hospitalarias
Recuperación y traslado Línea Hydrux
Ref.4421/442103 MP.12209

Calle 2 No. 50 – 185. Medellín, Colombia
 Tel: (574) 285 2838 / Fax: (574) 255 9581
 Línea Nacional Gratuita 01 8000 42 42 44
www.mubimedical.com

ELABORÓ: Diseño Gráfico	REVISÓ: Jefe I+D Mecánico	REVISÓ: Diseño Producto	APROBÓ: Calidad SSI	APROBÓ: Director Técnico	FECHA ACTUALIZACIÓN:
E. Salazar Ariza					21/02/2023

Para mayor información sobre el producto, consulte manuales de funcionamiento.

Transformamos espacios, mejoramos vidas.



SC-CER568370 DM-CER568372

REGISTRO INVIMA ECRI FDA REGISTRO
RS. 2014 DM-0011312 3011537487




Porta suero: accione el seguro hacia arriba y ajuste la altura. Accione el seguro hacia abajo para fijar la posición.

Barandas de seguridad: tome el accionador y deslice la baranda hacia adelante hasta plegarla por completo, tome la baranda y deslícela hacia arriba hasta que quede firme y bloqueada.



Cuidado: no instale bombas de infusión en la parte inferior del porta suero.

Flexión espalda: accione y lleve el espaldar hacia arriba o hacia abajo.

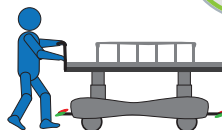

Manillares: tome con ambas manos y lleve la camilla hacia el destino requerido.



Cuidado: cuando traslade la camilla con paciente las barandas de seguridad deben estar en servicio.



Soporte porta suero: inserte el porta suero en el soporte hacia abajo.



Advertencia: subir o bajar paciente de la camilla, lleve la camilla a mínima altura. NUNCA por el cabecero o piecero.



Soporte bolsa de drenaje

Soporte tanque de oxígeno.



Ascenso

Trendelenburg.

Descenso Trendelenburg

inverso.

Pedales: presione el pedal hacia abajo tantas veces como sea necesario.



Cuidado: al realizar trendelenburg o trendelenburg inverso debe sujetar al paciente, para mayor seguridad use correas de sujeción y piecero.




Cuidado: evite recostarse o sentarse sobre las barandas.

Barandilla desmontable.

Ruedas parachoque.

Manija de empuje piecero.

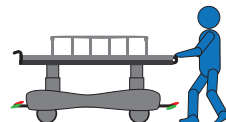

Ruedas: permiten trasladar la camilla en todas las direcciones.




Advertencia: retire suciedad de las cubiertas con un paño, agua y jabón periódicamente.

Bloquear: accione el pedal rojo hacia abajo. **Desbloquear:** lleve los pedales al centro. **Rueda direccional:** accione el pedal verde hacia abajo.



RUEDA DIRECCIONAL

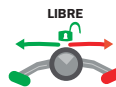

LIBRE



BLOQUEAR



Cuidado: evite mover o trasladar la cam con los frenos activados, puede ocasionar daños graves en el sistema o desajustes en la estructura.