


Ficha técnica

Apósito de barrera antimicrobiana con plata nanocrystalina

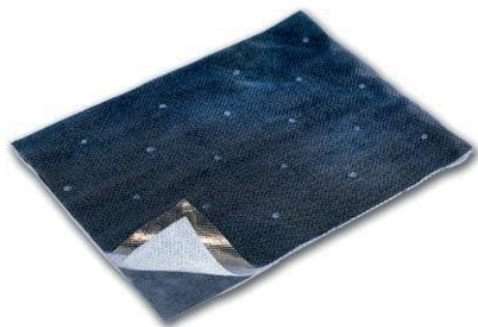

No contiene látex

Modo de acción

La plata nanocrystalina de Acticoat® actúa como barrera antimicrobiana, eliminando en tan sólo 30 minutos un amplio espectro de bacterias. Acticoat® es una eficaz barrera contra más de 360 patógenos, incluidos Gram Negativos, Gram Positivos y hongos. Es también una eficaz barrera contra bacterias resistentes a antibióticos como Pseudomonas, SARM (Staphylococcus Aureus Resistente a la Metilina) o (VRE) Enterococcus Resistentes a la Vancomicina. La capa interior absorbe el exudado y retiene la humedad, manteniendo el ambiente húmedo óptimo para una rápida cicatrización.

Contradicciones

- No se use en pacientes con sensibilidad a la plata ni a cualquiera de sus componentes.
- Es incompatible con productos de bases oleosas.
- Se debe evitar el contacto con electrodos o geles conductores durante las mediciones electrónicas como electroencefalogramas y electrocardiogramas.
- No debe utilizarse en pacientes durante exploraciones de IMR (Imagen de Resonancia Magnética).
- No use el producto si el color del apósito no es uniforme
- No se recomienda el uso de preparados medicinales tópicos en combinación con Acticoat®.

Consideraciones

Acticoat®:

- Facilita la curación de la herida, no del problema subyacente.
- Puede utilizarse durante un periodo máximo de 4 semanas, si transcurrido este periodo no se observa ninguna mejoría, debe valorarse el diagnóstico inicial.
- Es un apósito estéril de un sólo uso y no debe utilizarse si el empaque está dañado.
- Se recomienda no utilizar el producto durante el embarazo o la lactancia al desconocerse sus efectos, por lo que su aplicación recae en el criterio del médico tratante.

Características

Apósito de barrera antimicrobiana para el tratamiento de heridas crónicas o agudas, compuesto por plata nanocrystalina con cristales de 15 nanómetros (nm) de tamaño, concentración de 70 a 100 partes por millón (ppm), efectividad antimicrobiana contra más de 360 patógenos y liberación sostenida de plata hasta por 3 días.

- Compuesto por 3 capas unidas por puntos de soldadura ultrasónica: o 1 capa interior absorbente de rayón poliéster. o 2 capas externas de polietileno de alta densidad cubiertas con plata nanocrystalina con concentración de 70 a 100 ppm.
- Liberación sostenida de plata hasta por 3 días.
- Barrera antimicrobiana de amplio espectro.

Indicaciones

Acticoat® está indicado en uso externo como barrera antimicrobiana en cualquier herida crónica o aguda para el control de la infección como:

- Úlceras por Presión
- Úlceras Venosas
- Pie Diabético
- Quemaduras
- Zonas donantes o receptoras de injertos
- Heridas Post-Operatorias
- Lesiones causadas por hongos
- Heridas accidentales
- Es compatible con Terapia de Presión Negativa

Beneficios

- La capa interior absorbente mantiene un óptimo ambiente en el lecho de la herida para su cicatrización, permitiendo intercambio gaseoso.
- La plata nanocrystalina protege la herida de contaminación bacteriana 30 minutos después de haber sido aplicado.
- Fácil de aplicar y de remover, disminuyendo el dolor en el paciente.
- Reduce el riesgo de maceración del tejido alrededor de la herida.
- Permite que el apósito sea recortado..
- El apósito libera plata de manera continua hasta por 3 días con una concentración de 70 a 100 ppm.
- Eficacia comprobada para la eliminación de más de 360 patógenos, incluidas bacterias Gram Positivo, Gram Negativo y 188 cepas de SARM (Staphylococcus Aureus Resistente a la Metilina), VRE (Enterococcus Resistente a la Vancomicina, Pseudomonas, etc.
- Reduce el riesgo de colonización, previniendo la infección y disminuyendo el tiempo al cierre de la herida.

Apósito de barrera antimicrobiana con plata nanocrystalina

Instrucciones

Acticoat® debe aplicarse bajo supervisión médica. Utilice siempre técnicas asépticas.

• Preparación

- Utilice los protocolos clínicos existentes para limpiar/desbridar la herida antes de la aplicación del apósito.
- Compruebe que la piel alrededor de la herida esté limpia, seca y libre de grasas, jabones o detergentes.
- Seleccione el apósito del tamaño y forma adecuados. Acticoat® se debe cortar al tamaño y forma de la herida.

• Aplicación del apósito

- Humedezca Acticoat® con agua inyectable y aplique el apósito de manera central sobre el lecho de la herida.
- Aplique un apósito secundario apropiado para la fijación y control del exudado, como el apósito hidrocélular Allevyn® o bien, siga los lineamientos locales para fijación secundaria.

• Frecuencia del cambio del apósito

- La frecuencia de cambio depende del tipo y condición de la herida de acuerdo al nivel de exudado. Es posible el recambio diario de Acticoat® para heridas altamente exudativas.
- Cuando los niveles de exudado son bajos o medios, Acticoat® puede cambiarse hasta dentro de tres días.
- Las heridas deben examinarse y tratarse en la forma apropiada, según las indicaciones del médico responsable.

• Retirada del apósito

- Retire el apósito secundario según los protocolos clínicos existentes.
- Levante con suavidad el apósito Acticoat®, utilizando pinzas o con las manos enguantadas. Por lo general, el apósito se desprende en una sola pieza.
- Si se ha dejado secar demasiado, se puede limpiar la lesión con solución estéril para que el apósito se desprenda con mayor facilidad.
- Utilice los protocolos clínicos existentes para limpiar la herida y retirar el exudado remanente antes de valorar la herida o aplicar otros apósitos.

Composición

Capas exteriores	Malla de polietileno de alta densidad recubiertas de una aleación binaria de plata y oxígeno.
Capa interior	Lámina absorbente no tejida de poliéster / rayón

Presentación

Código Producto	Medida	Unidades por Caja	Clave de Cuadro Básico	Descripción CCB
20601	5 x 5 cm	12	060.088.0827	Con barrera antimicrobiana. Estéril y desechable. Pieza
20101	10 x 10 cm	12	060.088.0827	
20301	20 x 40 cm	6	060.088.0835	

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación			Fabricante
ON No. 0086 CE No. CE 00356 	Libre de Látex <div></div>	Radiación Gamma <div></div>	 27 meses  Manténgase en un lugar seco	 No se exponga a luz solar  Temperatura almacenamiento 25°C  No reutilizar	 Smith & Nephew Wound Management- UK Distribuidor Smith & Nephew S,A, de C.V.	

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá

Tel: 57 (1) 605 7373

www.smith-nephew.com

° Marca registrada de Smith & Nephew