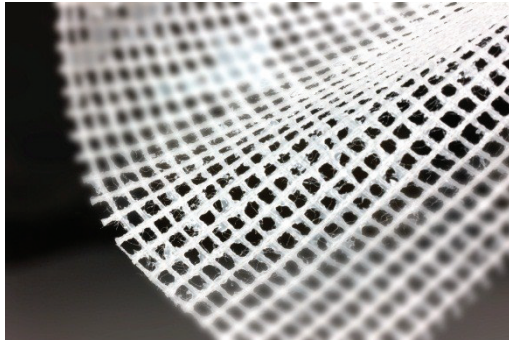


Ficha técnica

Apósito de gasa parafinada impregnada con Clorhexidina al 0.5%

**Características**

Es una gasa parafinada con tejido abierto tipo Leno impregnada con Clorhexidina al 0.5%.

- Malla de acetato con tejido tipo Leno.
- Cubierta impregnada de parafina
- Clorhexidina al 0.5%

Modo de acción

Bactigras® proporciona una capa protectora para la herida, en donde se deposita parafina a través de una malla de acetato, que gracias a su tejido tipo Leno, permite el libre paso de exudado hacia un apósito absorbente. Además, contiene Clorhexidina al 0.5% que actúa como agente antimicrobiano efectivo contra bacterias gram negativo, gram positivo, SARM, etc.

Indicaciones

Bactigras® está indicado para heridas que no tengan más del 10% del área del cuerpo en donde haya un riesgo de infección o en heridas ya infectadas en conjunto con terapia sistémica de antibióticos. Debe ser utilizado para abrasiones y escaldaduras menores, sitios donadores y de injertos, heridas con pérdida de piel así como para heridas crónicas de úlceras de pie y úlceras por presión.

Contraindicaciones

- Bactigras® no debe utilizarse en más del 10% del área del cuerpo.
- Raramente ocurre dermatitis, sensibilidad por contacto o fotosensibilidad.
- Se ha reportado anafilaxia en casos raros.
- Evite el contacto con los ojos, el oído medio, meninges y cerebro.
- Bactigras® es incompatible con jabones, materiales aniónicos y yoduro de potasio.
- Debe ser evitado el uso de Bactigras® con agentes limpiadores oxidantes.

Beneficios

- Permite que la herida se drene hacia un apósito absorbente.
- Minimiza el deshilado cuando el apósito se recorta al tamaño y forma de la herida.
- Reduce el dolor en los recambios al ser suave y de baja adherencia.
- Al retirar el apósito, se realiza de manera atraumática.
- Protege la herida al utilizarse como interface.
- Compatible con cualquier tipo de medicamento tópico.
- Reduce el riesgo de infección.
- El antimicrobiano no es afectado por la sangre o el exudado.
- Efectivo contra bacterias gram negativo y gram positivo, SARM, entre otros.

Composición

Malla	Acetato
Cubierta	Impregnado de parafina
Antimicrobiano	Clorhexidina al 0.5%

Apósito de gasa parafinada impregnada con Clorhexidina al 0.5%

Instrucciones

Bactigras® debe aplicarse bajo supervisión médica. Utilice siempre técnicas asépticas

- Preparación
 - Utilice los protocolos clínicos existentes para limpiar la herida.
 - Seleccione el apósito del tamaño y forma adecuados.
 - Compruebe que la piel alrededor de la herida esté limpia, seca y libre de grasas, jabones o detergentes, quitando el exceso de humedad.
- Aplicación del apósito
 - Recorte el apósito a la forma y tamaño de la herida.
 - Retire el papel protector que contiene al apósito.
 - Sujete el apósito y aplíquelo directamente en la herida.
- Frecuencia de cambio del apósito
 - Como apósito primario para abrasiones, escaldaduras menores, sitios donares e injertos, el cambio debe realizarse cada 24 horas.
 - Como apósito de interface, debe realizarse de acuerdo al apósito secundario, por razones necesarias.

Presentación

Código Producto	Medida	Unidades por Caja	Codigo EAN
7456	5 x 5 cm	50	05000223074562
7457	10 x 10 cm	10	05000223074579
7461	15 x 20 cm	10	05000223074616
66003661	10 x 40 cm	10	05000223439088
66007505	15 x 100 cm	Rollo	05000223075057

Re. San.: INVIMA 2014DM-000732-R3

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
CE No. 0086 	Libre de Látex 	Radiación Gamma 	 36 meses  Manténgase en un lugar seco  No se exponga a luz solar  Temperatura almacenamiento 25°C  No reutilizar	 Smith & Nephew Medical(Suzhou) Ltd- China Smith & Nephew S,A, de C.V.