

Health o meter[®]

P r o f e s s i o n a l

Número de modelo: ADULTO

Varilla de medición de altura

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO



Gracias por comprar este producto Health o meter[®] Professional. Por favor lea este manual

Para evitar daños al desembalar, no utilice un cúter, cuchillo, tijeras ni ningún objeto punzante al abrir el embalaje interior protector. La siguiente información detalla lo que encontrará dentro de la caja al desembalar las piezas para el montaje. Deje la caja a un lado para guardarla.

Lista de partes

- | | |
|------------------------------------|--|
| (1) Varilla de medición | (2) Pernos con tuercas adjuntas |
| (1) Instrucciones para el usuario | (6) Tornillos de cabeza mecánica M4-0,7x6 mm |
| (1) Brida de montaje de base verde | (2) Arandelas |

Herramientas necesarias (no incluidas)

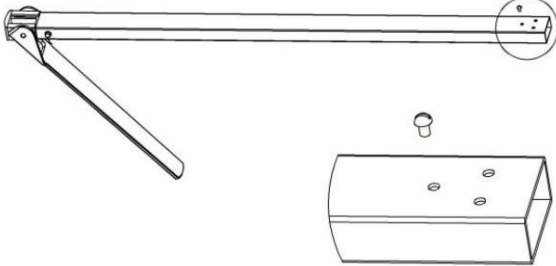
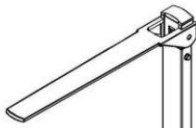
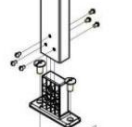
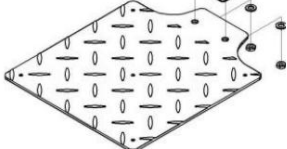
Destornillador Phillips

Precauciones y advertencias

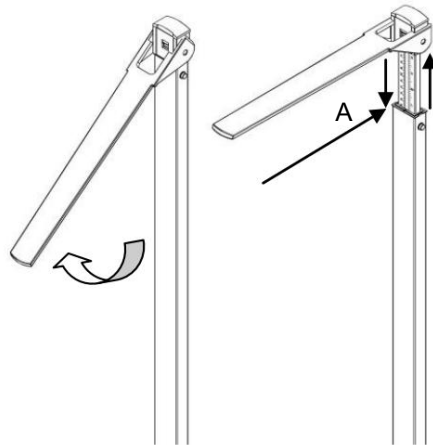
Antes de utilizar la nueva varilla de medición, tómese el tiempo para leer las siguientes instrucciones de seguridad:

- Siga las instrucciones de funcionamiento.
- Utilice el material de montaje suministrado.
- Al ensamblar, asegúrese de que los tornillos estén apretados y que la varilla haya sido ensamblado correctamente.
- Doble hacia abajo el cabezal de medición después de medir la altura para evitar riesgo de lesiones.

Instrucciones de montaje

Paso 1	Instrucción	Ilustración
	<p>Retire el tornillo y el perno en la parte inferior trasera del tallímetro.</p> <p>(Este tornillo era sólo para evitar que la varilla intermedia cayera durante el transporte).</p>	
2	<p>Coloque la brida de montaje de la base verde sobre los orificios correspondientes en la plataforma para pies.</p>	
3	<p>Inserte los pernos a través de la parte superior de la brida en la plataforma del pie. Coloque la arandela y la tuerca en el perno en la parte inferior del reposapiés.</p> <p>Con un destornillador Phillips, apriete el perno firmemente al reposapiés.</p>	
4	<p>Deslice la base del tallímetro sobre la brida de montaje de la base verde.</p> <p>Inserte los 3 tornillos a cada lado de la varilla de altura en la varilla y apriételes firmemente con un destornillador Phillips.</p>	

Cómo utilizar el tallímetro



1. Levante el casco a una posición horizontal por encima de la cabeza del paciente tirando hacia afuera la varilla interior (la varilla del medio no se puede sacar).
2. Coloque al paciente contra el tallímetro, asegurándose de que la postura del paciente sea erguida y la cabeza del paciente está recta y nivelada.
3. Empuje el casco hacia abajo hasta que descansa sobre la cabeza del paciente.
4. El resultado medido se puede leer en (A).

Especificaciones

Modelo	ADULTO
Rango de medida	85 – 210 cm (33 1/2 – 82 5/8 pulgadas)
División de medidas	1 mm / 1/16 pulgadas
Rango de temperatura	10 – 40°C

GARANTÍA LIMITADA

¿Qué cubre la garantía?

Las básculas profesionales Health o meter® están garantizadas desde la fecha de compra contra defectos de materiales o mano de obra por un período de un (1) año. Si el producto no funciona correctamente y el fabricante determina que existe un defecto de material o de mano de obra, el único recurso del cliente será el reemplazo de la báscula sin cargo.

El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no estuviera disponible, se podrá realizar su sustitución por un producto similar de igual o mayor valor. Todas las piezas, incluidas las reparadas y reemplazadas, están cubiertas únicamente durante el período de garantía original.

¿Quién está cubierto?

El comprador original del producto debe tener un comprobante de compra para recibir el servicio de garantía. Guarde su factura o recibo. Los distribuidores Pelstar o las tiendas minoristas que venden productos Pelstar no tienen derecho a alterar, modificar o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

¿Qué está excluido?

Su garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños resultantes de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso con voltaje o corriente inadecuados, uso contrario a las instrucciones de funcionamiento, abuso que incluye manipulación, daños durante el transporte o uso no autorizado. reparación o alteraciones. Además, la garantía no cubre desastres naturales como incendios, inundaciones, , huracanes y tornados. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían de un país a otro, de un estado a otro, de una provincia a otra o de una jurisdicción a otra.

Para obtener el Servicio de Garantía, asegúrese de conservar su recibo de compra o documento que muestre el comprobante de compra. Llame al (+1) 800-638-3722 o (+1) 708-377-0600



PELSTAR, LLC

9500 West 55th Street • McCook, IL 60525 • EE. UU.

1-800-638-3722 o 1-708-377-0600



Modelo: ADULTO
tallímetro

INSTRUCCIONES DEL USUARIO



Gracias por su compra de este producto Health o meter® Profesional. Por favor lee este manual

Para evitar daños en el producto cuando lo desempaque, no use una navaja para cortar cartón, cuchillos tijeras o cualquier objeto afilado cuando abra el empaque protector interno. La información siguiente detallada lo que usted encontrará dentro de la caja de cartón al desempacar los componentes para su ensamblaje. Ponga la caja a un lado para su almacenaje.

Lista de Componentes (1)

Tallímetro (2) Tornillos con tuercas (1) Instrucciones del usuario (6) Tornillos metálicos M4-0.7x6mm (1) Base verde - brida de montaje (2) Arandelas

Herramientas Requeridas (No incluidas)

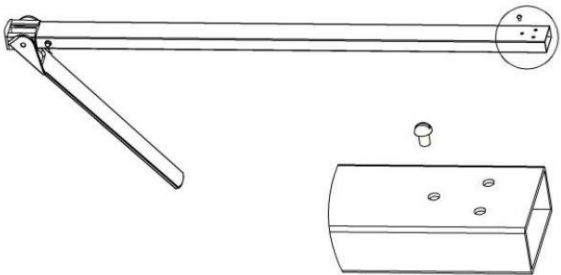
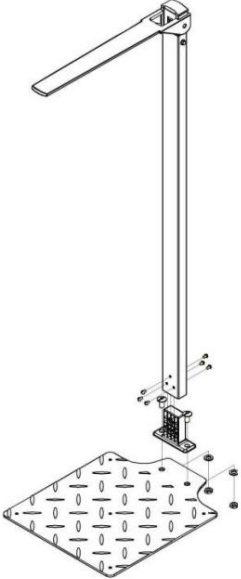
Desarmador de cruz

Precauciones y Advertencias Antes de

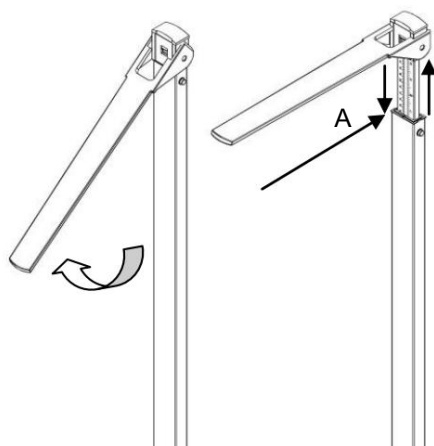
usar el tallímetro nuevo, por favor tómese el tiempo para leer las siguientes instrucciones de seguridad: • Siga las instrucciones de funcionamiento.

- Utilice el material de fabricación proporcionado. • Al ensamblar, asegúrese de que los tornillos queden apretados y que la varilla
 Mar ensamblada correctamente.
- Doble el tope luego de que se haya medido la estatura para evitar el riesgo de lesiones.

Instrucciones de ensamblaje

paso	instrucción	Ilustración
1	Bastante el tornillo y fíjelo en la parte trasera inferior del tallímetro. (Este tornillo estaba allí solamente para evitar que la parte media del tallímetro se desprendiese durante el transporte.)	
2	Coloque la verde brida de montaje para la base sobre los orificios correspondientes del reposapiés.	
3	Inserte los tornillos a través de la parte superior de la novia en el reposapiés. Coloque la arandela y la tuerca sobre el tornillo por la parte inferior del reposapiés. Con un desarmador de cruz, apriete el tornillo firmemente al reposapiés.	
4	Inserte la base de la varilla sobre la novia verde de montaje para la base. Inserte los 3 tornillos en cada lado del tallímetro y apriete firmemente usando un desarmador de cruz.	

Cómo utilizar el tallímetro



5. Eleve el tope a una posición horizontal sobre la cabeza del paciente deslizando la varilla interna (la parte del medio no puede deslizarse).
6. Coloque al paciente contra el tallímetro, asegurándose que su posición sea recta y que la cabeza del paciente este derecha y nivelada.
7. Empuje la parte superior hacia abajo hasta que descansa sobre la cabeza del paciente.
8. La medición puede ser leída en (A).

Especificaciones

modelo	ADULTO
Rango de medición	85 - 210 centímetros (33 1/2 - 82 1/2 de pulgada)
Divisiones en la medición	1mm/1/16 de pulgada
Rango de temperatura	10 - 40 °C

GARANTÍA LIMITADA ¿Qué

Cubre la Garantía?

Los instrumentos de medición Health o meter® Profesionales están garantizados desde la fecha de compra contra defectos de materiales o de fabricación por un período de un (1) año. Si el producto no puede funcionar correctamente, y el fabricante determina que existe un defecto en los materiales o de fabricación, el único recurso del cliente será el reemplazo de instrumento de medición sin costo alguno. El reemplazo se hará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no está disponible, el reemplazo puede realizarse con un producto similar de valor igual o mayor. Todas las partes incluyendo piezas reparadas y reemplazadas se cubren sólo por el período de la garantía.

¿Quién tiene cobertura?

El comprador original del producto debe tener un comprobante de compra para recibir el servicio de garantía. Por favor guarde su factura o recibo. Los distribuidores de Pelstar o las tiendas al menudeo que venden los productos de Pelstar no tienen el derecho de alterar o modificar o en forma alguna cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

¿Quién es Excluido?

Su garantía no cubre el desgaste normal de partes como resultado de cualquiera de las siguientes condiciones: uso negligente o uso incorrecto del producto, uso de voltaje o corriente incorrectos, uso contrario a las instrucciones de operación, abuso incluyendo manipulación, daño en el transporte, o la reparación o modificaciones no autorizadas. Además, la garantía no cubre desastres naturales, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían de país a país, de estado a estado, de provincia a provincia o de jurisdicción a jurisdicción.

Para obtener Servicio de Garantía, asegúrese de guardar su recibo de compra o documento que pruebe la compra. Llama al (+1) 800-638-3722 o (+1) 708-377-0600



PELSTAR, LLC

9500 West 55th Street • McCook, IL 60525 • EE.UU.

1-800-638-3722 o 1-708-377-0600