

SURFANIOS *Premium*

Detergente
Desinfectante



- Productos que combinan las acciones detergente y desinfectante en una operación simultánea
- Eficacia demostrada en bacterias y humedades aisladas del entorno hospitalario
- Producto formulado sin aldehído
- Optimización de la informaciones ecotoxicológicas

INDICACIONES

Limpieza y desinfección del material médico y de los productos sanitarios no invasivos. (estetoscopios, medidores de glucosa, martillos de reflejos, etc.).


CARACTERÍSTICAS

- Solución de color verde
- pH producto puro: mín. 10.69 - máx. 11
- pH en dilución (0.25 %) : 8.6 aproximadamente
- Densidad : 1.009
- Índice de refracción : 1.3589

PRODUCTO
A DILUIR
20 ml > 8 L



0,25%

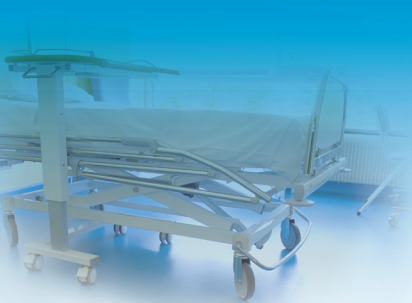


SURFANIOS Premium


Detergente desinfectante

MODO DE EMPLEO

Para la frecuencia de uso y la limpieza del material de aplicación, consulte el plan de higiene in situ.

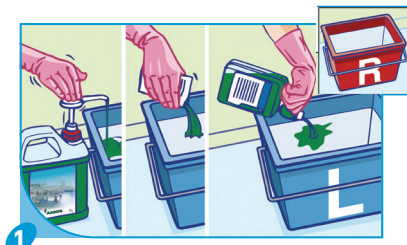

1 Llenar un recipiente de lavado con 8 litros de agua. Se utiliza diluido al 0.25% (2.5 ml/l), es decir 20 ml por cada 8 litros de agua fría o caliente (máx. +60°C).

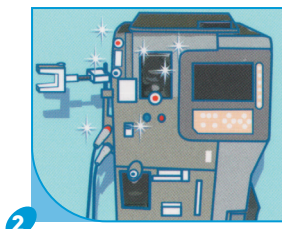

2 Aplicar en cantidad suficiente (+/- 30 ml/m²). Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada.*



3 Después de limpiar cada material médico o producto sanitarios, cambie la gasa y renueve la solución de lavado. El producto no presenta incompatibilidad con los materiales habitualmente utilizados.

*El enjuague es inútil excepto si las zonas a tratar están destinadas a entrar en contacto con la piel o con las mucosas.

COMPOSICIÓN

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina, Cloruro de dideciltrimetilamonio, excipientes.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Peligroso – respete las precauciones de uso (Establecidas según las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos). Almacenar entre +5°C y +35°C. Producto sanitario de clase IIa. Uso reservado a los profesionales.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Bactericida durante 30 min, al 0.25%, a 20°C: EN 1040, EN 1276/EN 13727 (al 0.25%, 5 min), EN 13697 (al 0.25%, 30 min).

Activo frente a BMR durante 15 min, al 0.25%, a 20°C: EN 1276 (al 0.25%, 5 min), EN 13697 (al 0.25%, 15 min). Tuberculicida en 60 min, 0.25%, 20°C o en 30 min, 0.50%, 20°C: EN 14348, EN 14563.

Levuricida durante 30 min, 0.25% a 20°C: EN 1275, EN 1650 (al 0.25%, 15 min), EN 13697 (al 0.25%, 30 min).

Fungicida durante 120 min, al 0.25%, a 20°C: EN 1275, EN 1650 (al 0.25%, 120 min), EN 13697 (al 0.25%, 30 min).

Activo según EN 14476 en 5 min, 0.25%, 20°C, frente a PRV (virus modelo HBV), BVDV (virus modelo HCV), HIV-1, Herpesvirus.

Activo según EN 14476 en 60 min, 0.25%, 20°C o en 15 min, 0.50%, 20°C en Vaccinia virus. Activo según EN 14476 en 15 min, 0.25%, 20°C, frente a Coronavirus.

La actividad antimicrobiana del producto se recoge en el dossier científico, disponible bajo petición.

ACONDICIONAMIENTOS

1 12 frascos de 1 litro con dosificador.....Ref. 1917.092

2 4 bidones de 5 litros con
1 bomba dosificadora de 20 ml.....Ref. 1917.036



CE
0459

LABORATOIRES
ANIOS
An Ecolab Company

1, rue de l'Espoir
59260 Lezennes - FRANCE
Tél : +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

ENR C01917-200210 - Fotos no contractuales