

APLICACIÓN

VAPROX HC Sterilant es el antimicrobiano patentado diseñado para su uso en los sistemas de esterilización de baja temperatura V-PRO[®].

DESCRIPTION

VAPROX HC Sterilant es el agente antimicrobiano diseñado para su uso en los sistemas de esterilización de baja temperatura V-PRO[®]. Las características del VAPROX HC Sterilant son las siguientes:

- Eficacia de amplio espectro contra virus, bacterias, levaduras y esporas bacterianas.
- La actividad microbicida aumenta en la fase gaseosa, donde el peróxido de hidrógeno actúa como en los lípidos de la membrana que atacan el oxidante, el ADN y otros componentes celulares esenciales.
- Solución especialmente formulada, estabilizada, de alta pureza, con 59% de peróxido de hidrógeno.

Los sistemas de esterilización V-PRO utilizan recipientes desechables patentados especialmente diseñados que contienen VAPROX HC Sterilant. Otras características de la copa:

- Diseñado para un fácil manejo y evitar derrames accidentales.
- Diseñado para garantizar una fácil instalación en un esterilizador y no se puede quitar a menos que la copa esté vacía
- Equipado con una etiqueta RFID para garantizar que se use la copa adecuada y que no se haya vencido el esterilizante
- Incluye instrucciones de uso, información de seguridad, fecha de vencimiento y número de pedido
- Las copas se rigen por dos fechas de caducidad: Vida útil y en uso (período utilizable una vez que se coloca la copa en el esterilizador).
- Paquete incluido con cada estuche.



(Typical - details may vary.)

- SDS (Hoja de datos de seguridad) disponible en www.steris.com
- Versión estándar (PB011) con una capacidad mínima de 15 ciclos estándar (30 ciclos rápidos sin lumen)
- Versión de envío aéreo (PB012) con una capacidad mínima de cuatro ciclos estándar (ocho ciclos sin Lumen)

VENTAJAS

Beneficios del VAPROX HC Sterilant:

- Compatible con una amplia gama de materiales (incluidos metales, plásticos y óptica) utilizados en dispositivos médicos
- Asegurar la esterilización de dispositivos médicos sin residuos tóxicos.
- El esterilizante es esporicida según lo probado por el método de portador de la Asociación de Químicos Analíticos Oficiales (AOAC)
- Degrada a través de vapor de agua y oxígeno inocuos para el medio ambiente.

REGISTRO

USA: K062297, K083097, K102330, K140498, K172754

Canada: DIN 02303604

EU: CE0086

Información de pedido

Información de la Copa

☐ PB011 - estándar (113 ml, 3.8 fl oz);

3 copas /caja

☐ PB012 – via Aérea (29.6 mL, 1.0 fl

oz); 4 copas / caja

Item _____

Location(s) _____

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de instalar una copa VAPROX HC Sterilant, verifique la fecha impresa en la caja y en la copa. No use la copa si está más allá de su fecha de vencimiento. Para obtener instrucciones sobre la instalación de la copa, siga las instrucciones de uso con el manual del operador del esterilizador.

Consulte la SDS para obtener información adicional sobre el uso y manejo apropiados del peróxido de hidrógeno.

DATOS DE INGENIERIA

Propiedades físicas típicas:

Color:	Incoloro
PH típico	0.0 - 3.5
Estado físico:	Líquido
Ingrediente activo	* 59% H ₂ O ₂
Ingrediente inerte	41% de agua

Vida útil:

Copas sin abrir (PB011)	12 meses
Copas sin abrir (PB012)	6 meses
En uso en la unidad	14 días.

Almacenamiento:

Vertical

Área seca fría (59-86 ° F [15-30 ° C], 0-65% de humedad relativa)

Lejos de los combustibles

Lejos de los indicadores biológicos y / o químicos

* Por Food Chemical Codex, 8ª ed .; Farmacopea Europea 9ª ed., 2017;
Farmacopea japonesa 17ª ed. (2016)

For Further Information, contact:



STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 • USA
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com

Este documento está destinado al uso exclusivo de los clientes de STERIS, incluidos los arquitectos o diseñadores. Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier parte que no sea un Cliente.

APLICACIÓN

El indicador biológico Celerity™ 20 HP (IB) se usa para el monitoreo de rutina y la calificación de ciclos sin lumen, flexibles y con lumen (ver **Tabla 1**) de las esterilizadoras de baja temperatura V-PRO® 1, V-PRO® 1 Plus, V-PRO® maX y V-PRO 60 en servicios de salud.

Cuando se utiliza junto con el indicador Celerity HP, la incubadora HP proporciona un resultado fluorescente en 20 minutos.

DESCRIPCIÓN

El indicador biológico Celerity™ 20 HP es un IB utilizado para controlar los procesos de esterilización con peróxido de hidrógeno. El IB proporciona una lectura final dentro de los 20 minutos de incubación en la incubadora Celerity™ HP.

Cada IB consiste en un vial de plástico inoculado con esporas de *Geobacillus stearothermophilus*. El medio especializado está sellado dentro de la tapa.

Cada IB tiene una etiqueta de dos capas ubicada en la tapa. La etiqueta superior removible identifica el número de lote y la fecha de vencimiento y se puede adherir a la documentación de esterilización como un registro permanente. La etiqueta inferior está impresa con un indicador de proceso reactivo con peróxido de hidrógeno y se usa para distinguir entre IB procesado y no procesado.

El IB tiene un sistema de activación manual intrínseco; no se requiere un activador por separado para usar el producto.

El rendimiento de Celerity™ 20 HP IB cumple con las secciones aplicables del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, la Asociación para el Avance en Instrumentación Médica y la Organización Internacional de Normalización (ANSI/AAMI/ISO) 11138-1: 2006 y el indicador de proceso ubicado en la tapa cumple con los requisitos del indicador químico Tipo 1 según ANSI / AAMI / ISO 11140-1: 2014.

NORMAS

ANSI/AAMI/ISO 11138-1:2006 Esterilización de productos para el cuidado de la salud - Indicadores biológicos - Parte 1: Requisitos generales. Asociación para el Avance en Instrumentación Médica; 2006.

ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2014 Esterilización de productos para el cuidado de la salud - Indicadores químicos - Parte 1: Requisitos generales. Asociación para el Avance en Instrumentación Médica; 2014.



(Modelo típico: los detalles pueden variar.)

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de incubación de 20 minutos para resultados rápidos y liberación confiable de la carga.
- La etiqueta extraíble de dos capas en el indicador biológico permite que los números de lote y las fechas de vencimiento se transfieran fácilmente a los documentos.
- Activación de giro y movimiento, reduce el potencial de contaminación de los viales dañados y la necesidad de un activador por separado.
- El diseño de tapa y vial IB sin vidrio reduce la posibilidad de lesiones causadas por vidrios rotos.
- La tapa y la etiqueta de color anaranjado permiten una fácil identificación del proceso de esterilización.

INDICACIONES DE USO

IMPORTANTE: esta sección le permite al Cliente entender las instrucciones de uso. Nunca se debe utilizar en lugar de las instrucciones o información reales proporcionadas en el empaquetado o etiquetado del producto. Siempre consulte las instrucciones que vienen con el producto y cumpla con todas las precauciones de seguridad aplicables.

Para el monitoreo rutinario de los sistemas de esterilización a baja temperatura V-PRO, colocar la IB en una bolsa de esterilización validada para su uso en la esterilizadora. Insertar una tira de indicador químico específica para el proceso de esterilización para que el indicador sea visible a través de la bolsa. Colocar la bolsa en la cámara cargada en la ubicación más desafiante. Después del procesamiento, retire la IB, actívela y colóquela en la incubadora HP de Celerity™ durante 20 minutos.

La incubadora cuenta con un sistema completamente automatizado. Al finalizar el proceso de incubación (o tan pronto como se identifique un indicador biológico positivo), la incubadora indicará la conclusión de la prueba. Se puede imprimir un registro permanente de los resultados de la prueba con una impresora opcional.

Información de pedidos

☐ LCB044 – IB Celerity™ 20 HP

Cantidad: 25 por caja

☐ LCB046 – Incubadora Celerity™ HP

Cantidad: 1

Ítem _____

Ubicación(es) _____

NOTAS

1. Antes del uso, almacenar el IB a 60-75° F (16-24° C) con humedad relativa de 30-60% (HR) y lejos de la luz solar directa. No almacenar cerca de productos ácidos o alcalinos fuertes como agentes de limpieza / desinfección y esterilizantes.
2. Antes de descartar, realizar el tratamiento de los indicadores biológicos no expuestos y los indicadores biológicos positivos según corresponda para los desechos biológicos estándar, especies no patógenas. Todos los demás componentes e indicadores biológicos negativos pueden eliminarse como desecho regular.

INFORMACIÓN TÉCNICA / PROPIEDADES (IB)

Dimensiones (A x Diámetro): 1,8 x 0,64" (45,7 x 16,3 mm).

Especie bacteriana: *Geobacillus stearothermophilus*
NRRL B-1172.

Promedio de recuperación de la población: 1,0 x10⁶ a 4,0x10⁶ cfu/indicador biológico de *Geobacillus stearothermophilus*.

Sistema de detección: Reacción de α-glucosidasa con 4-metilumbeliferil α-D-glucopiranosido.

Sustrato fluorogénico:

4-metilumbeliferil α-D-glucopiranosido (MUD).

Medio: medio definido.

Valor D: ≥3,0 segundos.

Tiempo de incubación: 20 minutos.

Condición de incubación: IB Celerity™ 20 HP está diseñado para utilizarse únicamente junto con la incubadora Celerity™ HP.

Vida útil: la vida útil se establece en el momento de la fabricación, según lo indicado por la fecha de vencimiento en la etiqueta del lote.

SERVICIO TÉCNICO

STERIS se complace en proporcionar un laboratorio de servicio técnico completamente equipado, capaz de realizar las pruebas necesarias y proporcionar asistencia telefónica y en el sitio cuando sea necesario. Se pueden proporcionar más detalles sobre cómo este servicio puede beneficiar la situación particular de una instalación a pedido.

**EL CLIENTE ES RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
CÓDIGOS Y REGLAMENTOS LOCALES Y NACIONALES
APLICABLES.**

**ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA
DISEÑADO SOLAMENTE PARA UTILIZAR
EN LATINO AMÉRICA.**

Tabla 1. Ciclos validados

Esterilizadora	Ciclo de la esterilizadora	Aplicación
Esterilizadora de Baja Temperatura V-PRO 1	Ciclo con lumen	Esterilización por peróxido de hidrógeno vaporizado
Esterilizadora de Baja Temperatura V-PRO 1 Plus	Ciclo sin lumen	Esterilización por peróxido de hidrógeno vaporizado
	Ciclo con lumen	
Esterilizadora de Baja Temperatura V-PRO maX e V-PRO 60	Ciclo sin lumen	Esterilización por peróxido de hidrógeno vaporizado
	Ciclo flexible	
	Ciclo con lumen	
Esterilizadora STERRAD 100 NX	Ciclo estándar	Esterilización por gas plasma de peróxido de hidrógeno
	Ciclo FLEX	
	Ciclo Express	
	Ciclo DUO	
Esterilizadora STERRAD NX	Ciclo estándar	Esterilización por gas plasma de peróxido de hidrógeno
	Ciclo avanzado	
Esterilizadora STERRAD 100S	Ciclo estándar	Esterilización por gas plasma de peróxido de hidrógeno

Para más información, póngase en contacto con:



STERIS L. América

Av. Bem-Te-Vi, 77
3 andar, Moema, SP
(+55) 11 3372 9499
www.sterislatam.com

Este documento está destinado para el uso exclusivo por parte de los clientes de STERIS, incluidos arquitectos o diseñadores. Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier persona que no sea un Cliente.

PRODUCTO:	INDICADORES QUIMICOS PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN		
IMPORTADO POR:	SURGIPLAST LTDA.	DOMICILIO:	BOGOTA - COLOMBIA
FABRICADO POR:	STERIS	DOMICILIO:	ESTADOS UNIDOS
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2010 DM - 0005529	CLASE DE RIESGO	I
ESPECIFICACIÓN:	INDICADOR QUIMICO A VAPOR VERIFY CLASE 4 TIRILLA		
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	<p>Monitorea 3 parametros dentro de contenedores o bolsas para esterilización (tiempo, temperatura y penetración del agente esterilizante)</p> <p>INDICADOR MULTIPARAMETRO PARA USO EN ESTERILIZADOR A VAPOR A 121 °C , 132°C Y 134 °C</p>		

ESPECIFICACIONES	Propiedades Verificadas por el Fabricante	Tirilla de papel con sustrato quimico de tinta de color. Cambio indicador: cambio del color amarillo en la tirilla a un color igual o más oscuro del color estandar.
	Componentes	Doble tira de papel laminado con una capa de film para ayudar a eliminar la humedad después del ciclo de esterilización.
	Inspecciones Visuales	1. Verificación de referencia del producto. 2. Etiqueta con las especificaciones del producto. 3. Información de lote.
	Fecha de Vencimiento **	De acuerdo a la información suministrada por el proveedor
	Condiciones de Conservación	Humedad Relativa: Entre 35%RH y 70%RH.
		Temperatura: Menor a 32 °C.
		No almacene cerca de fuentes de calor, productos oxidantes, acidos o alcalinos, ni de productos de limpieza o desinfectantes
	Empaque Primario	Área de almacenamiento fresca, seca y protegido de la luz y humedad.
		Cajilla de cartón
	Empaque Secundario	Cajas de cartón
	Advertencias y Precauciones	Este producto es de un solo uso, no reutilizar.
		No utilizar si el empaque no está en perfecto estado.
		Evitar sobre todo humedad, salpicaduras de agua y contacto con elementos cortopunzantes durante su almacenamiento.
	Método de Desecho o Disposición Final del Producto	Este producto después de su uso o mezcla con residuos infecciosos o de riesgo biológico, así como parcialmente utilizado, vencido y/o deteriorado, incluyendo su empaque debe ser separado en recipiente o bolsa roja identificada como riesgo biológico o infeccioso para ser posteriormente desechado de acuerdo a las políticas internas de la institución que lo genera, dando cumplimiento a la reglamentación nacional actualmente vigente.
	Método de Reutilización	No aplicable, dispositivo de un solo uso, No reutilizar

Observaciones:

** Este producto cumple con el periodo de vida útil siempre y cuando se mantengan las condiciones de manipulación y almacenamiento adecuadas.

** Imagen adjunta

Surgiplast Ltda. Certifica que el producto cumple con los requisitos y especificaciones reglamentarias y las solicitadas por el cliente.

VºBº CONTROL DE CALIDAD



surgiPLAST
MEDICAL PRODUCTS - PACKAGING
Dra. CLAUDIA PATRICIA MARTÍNEZ MORENO
Directora Técnica
Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad

Dra. Patricia Martínez Moreno
Directora Técnica

Fecha de actualización: 09/07/2015

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Cinta Indicadora VERIFY **VH202** es un indicador de proceso Tipo 1 conforme definido por la American National Standards Institute/Association for the Advancement of Medical Instrumentation/International Standards Organization (ANSI/AAMI/ISO) 11140-1.¹ La Cinta Indicadora VERIFY **VH202** se destina a mantener seguros los artículos empaquetados en materiales sintéticos hasta su uso y diferenciar entre las unidades procesadas y no procesadas a través del cambio del color del color inicial (rosado) al color durazno, amarillo o más claro.

La cinta puede usarse en los siguientes ciclos de esterilización:

- Ciclos Sin Lumen, Flexible y con Lumen de los Esterilizadores a Baja Temperatura V-PRO® 1, 1 Plus, maX y 60
- Ciclo Estándar del Esterilizador* STERRAD® 100S
- Ciclos Estándar y Avanzado del Esterilizador STERRAD® NX
- Ciclos Estándar, Express, Flex Scope y Duo del Esterilizador STERRAD® 100NX

APLICACIÓN

La Cinta Indicadora VERIFY **VH202** se destina a mantener seguros los artículos empaquetados en materiales sintéticos.

CARACTERÍSTICAS

Indicador Químico Tipo 1

Una cinta puede usarse para los Esterilizadores V-PRO y Esterilizadores STERRAD® 100S, NX y 100NX

Fabricada sin plomo, metales pesados, látex de caucho natural y caucho natural seco

Puede usarse con un dispensador de cinta con un núcleo de 3"

BENEFICIOS

El cambio nítido del color proporciona identificación inmediata de las cargas procesadas y no procesadas

Reduce el stock y ayuda a estandarizar los procesos

Sin preocupaciones por la toxicidad del plomo u otro metal pesado y alergias al látex

Fácil almacenamiento y uso

PROPIEDADES TÉCNICAS

Los datos de pruebas demuestran que el Indicador Químico VERIFY **VH202** cumple con los requisitos de rendimiento establecidos para un indicador de proceso Tipo 1 **VH202** de acuerdo con ANSI/AAMI/ISO) 11140-1.1

Indicador Químico: Para uso em sistemas de esterilización a baja temperatura por peróxido de hidrógeno gaseoso.

Tabla 1: Aplicaciones de la Cinta Indicadora VERIFY **VH202**

Esterilizador	Ciclo del Esterilizador
Esterilizador V-PRO	Ciclo con Lumen
Esterilizador V-PRO	Ciclo sin Lumen y con Lumen
Esterilizador V-PRO	Ciclo Flexible, sin Lumen y con Lumen
Esterilizador V-PRO	Ciclo Flexible, sin Lumen y con Lumen
Esterilizador STERRAD 100S	Ciclo Estándar
Esterilizador STERRAD	Ciclo Estándar y Avanzado
Esterilizador STERRAD	Ciclo Estándar, Express, Flex Scope y Duo

Ancho de la cinta: 19 mm (3/4 in.)

Longitud de la cinta: aproximadamente 55 m (60 yardas)

Diámetro interior aproximado del rollo de cinta: 76 mm (3 in.)

Componentes: papel crepe especialmente tratado, adhesivo, indicador químico sensible al peróxido de hidrógeno, embalaje de aluminio

INSTRUCCIONES DE USO

Adjunte los artículos a esterilizar en un embalaje apropiado de material sintético. Abroche el paquete con la Cinta Indicadora VERIFY **VH202**. Tras el proceso de esterilización, observe la cinta indicadora. Verifique que se haya producido un claro cambio de color en la tinta del indicador VERIFY **VH202** de rosado (color inicial) a durazno, amarillo o más claro. Si la tinta no cambia, es posible que la exposición al proceso de esterilización no se haya producido debido a un mal funcionamiento del equipo o un error de procedimiento en el proceso de esterilización.

Un dispensador de cinta múltiplo (número de pieza PD004) está disponible en STERIS para uso con la Cinta Indicadora VERIFY **VH202**.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga la cinta no utilizada a 16° a 24°C (61-75°F) y Humedad Relativa de 30 a 60% lejos de la luz directa. No almacene la cinta indicadora cerca del calor, humedad, agentes oxidantes, ácidos/álcalis o agentes de limpieza/desinfección.

SERVICIO

Ventas

El servicio es una de las maneras más importantes de verificar la calidad consistente del rendimiento y funcionamiento del equipo. Un programa personalizado de servicios por STERIS Corporation brinda operaciones eficaces y libre de problemas.

Servicios Técnicos

STERIS Corporation se complace de ofrecer un laboratorio de servicios técnicos totalmente equipado y con todo el personal capaz de realizar las pruebas necesarias y proporcionar atención por teléfono o presencial cuando sea necesario. Obtenga más detalles de cómo ese servicio puede ser beneficioso en una situación particular de su instalación mediante solicitud.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción	Cantidad	Número de Pedido
Cinta Indicadora VERIFY VH202	1 rollo/caja	PCC070
Cinta Indicadora VERIFY VH202	6 rollos/caja	PCC071
Dispensador de cinta	Cada	PD004

Referencias:

1. Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). Sterilization of health care products – Chemical Indicators – Part 1: General requirement. ANSI/AAMI/ISO 11140-1-1:2014

* STERRAD es una marca registrada de Johnson and Johnson Corporation.

Para más información, póngase en contacto:

STERIS®



STERIS Corporation
Avenida Bem Te Vi, 77
3º andar, Moema – São Paulo – SP
Cód. postal 04524-030 • BRASIL
(55 11) 3372-9499
www.sterislatam.com

Este documento está destinado al uso exclusivo de los clientes de STERIS, incluidos arquitectos o diseñadores. Queda prohibida la reproducción total o parcial por parte de un tercero que no sea un Cliente.

INDICADOR QUÍMICO MULTIVARIABLE CELERITY™ HP PCC079



Productos para el control de procesos

APLICACIÓN

El indicador químico multivariable Celerity HP es un indicador químico multivariable de peróxido de hidrógeno vaporizado. Ha sido diseñado para el control rutinario de los siguientes ciclos:

- con lumen, sin lumen, flexibles, rápidos sin lumen o rápidos en un sistema de esterilización a baja temperatura V-PRO™ o
- ciclos Estándar, Avanzado, Express, Flexible o DUO, son de los sistemas ASP™ STERRAD®¹ System incluyendo aquellos con la Tecnología ALLClear®.

DESCRIPCIÓN

Los indicadores químicos multivariables Celerity HP se han validado para su uso como indicadores multivariables con características superiores de resistencia, similares a las establecidas en la norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1² del American National Standards Institute (ANSI), la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI) y la Organización Internacional de Normalización (ISO). Estos indicadores se colocan dentro de cada paquete (bolsa, recipiente u objeto envuelto) a ser esterilizado. En cada tira indicadora se aplica una tinta indicadora sensible al peróxido de hidrógeno vaporizado. Tras un ciclo de esterilización (consulte la **tabla 1**), un cambio de color de magenta a naranja/amarillo o amarillo claro indica que el producto se ha expuesto a un ciclo de peróxido de hidrógeno vaporizado.


PROPIEDADES TÉCNICAS

Resultados de los datos de prueba. Los indicadores químicos multivariables Celerity HP cumplen los requisitos de rendimiento establecidos para las multivariables de peróxido de hidrógeno vaporizado VH2O2 tipo 4 según lo estipulado en la norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1.

Condiciones de almacenamiento. Almacene los indicadores no utilizados en su caja original a una temperatura entre 5 °C y 25 °C (entre 41 °C y 77 °F). No almacene los indicadores cerca de fuentes de calor, humedad, productos oxidantes, ácidos o alcalinos, productos de limpieza ni desinfectantes.

Período de validez. Se establece en el momento de fabricación según la fecha de caducidad impresa en el indicador.

Tamaño. Aprox. 2–3/4" (70 mm) de longitud y 7/8" (22 mm) de anchura.

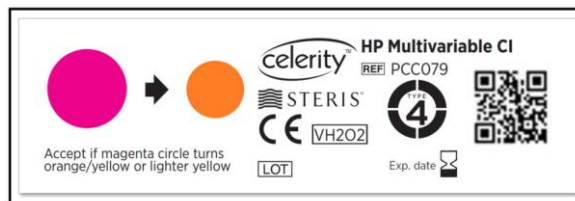

INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE. Esta sección permite al cliente comprender las instrucciones de uso. Así pues, no debe utilizarse nunca para reemplazar instrucciones reales ni información proporcionada en el embalaje o etiquetado del producto. Consulte siempre las instrucciones que vienen con el producto y siga todas las precauciones de seguridad aplicables.

1. Coloque la tira indicadora en el centro de cada paquete que va a esterilizarse. No coloque las tiras indicadoras en contacto directo con la lámina de plástico transparente de la bolsa, el indicador podría crear una unión con la lámina de plástico y, de este modo, impedir la penetración del agente esterilizante en el indicador y dar lugar a un falso resultado de fallo.
2. Selle todos los paquetes.
3. Realice el ciclo de esterilización y, una vez terminado el ciclo, siga los procedimientos de su departamento para la liberación de la carga.
4. Confirme el funcionamiento del indicador en el momento de utilizar el paquete tal como se indica a continuación:
 - Antes de utilizar los contenidos del paquete, retire el indicador y compare su color con el estándar de color/referencia de color de la tira indicadora.
 - El indicador se interpreta como APTO si el indicador ha cambiado de color magenta a naranja/amarillo o amarillo más claro. El contenido del paquete puede utilizarse siempre que se cumplan el resto de criterios de liberación de carga.
 - El contenido del paquete no debe utilizarse si el color es magenta o de cualquier otro color distinto de naranja/amarillo. Siga los procedimientos de su departamento para comunicar los fallos en el proceso de esterilización.

¹ STERRAD, NX y ALLClear® son marcas registradas de ASP Global Manufacturing, GmbH

² Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI). Esterilización de productos para atención sanitaria. Indicadores químicos. Parte 1: Requisitos generales. ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2014.

Servicio técnico

STERIS tiene el placer de proporcionar un laboratorio de servicio técnico completo y bien equipado capaz de realizar las pruebas necesarias y ofrecer asistencia telefónica e in situ siempre que es necesario. Si lo desea, puede solicitar más información sobre la forma en la que este servicio puede suponer una ventana para la situación concreta de un centro.

Educación

STERIS University no solo prepara a los líderes de hoy, sino también a los del mañana. Con una amplia gama de oportunidades de aprendizaje, planes de estudio y experiencia, STERIS University ofrece un programa de educación acreditado que se ajusta a la apretada agenda de cualquier persona. Visite university.steris.com para obtener más información.

Tabla 1. Ciclos validados	
Esterilizador	Ciclo del esterilizador
Esterilizador de baja temperatura V-PRO™ 1Plus	Ciclo sin lumen Ciclo con lumen
Esterilizadores de baja temperatura V-PRO™ maX, V-PRO™ maX 2, V-PRO™ s2 y V-PRO™ 60	Ciclo sin lumen Ciclo rápido sin lumen* Ciclo flexible Ciclo con lumen Ciclo rápido**
Esterilizador ASP™ STERRAD® 100NX (con o sin tecnología ALLClear®)	Ciclo estándar Ciclo para endoscopios flexibles Ciclo Express Ciclo DUO
Esterilizador ASP™ STERRAD® NX (con o sin tecnología ALLClear®)	Ciclo Express Ciclo avanzado
Esterilizador ASP™ STERRAD® 100S	Ciclo estándar
* V-PRO™ maX 2 Unidades solamente. **Solo unidades V-PRO™ s2.	

Información de pedidos

- ☐ PCC079 - Celerity HP Indicador
químico multivariable - Cantidad: 1 caja
con 200 indicadores

Artículo:	
Ubicaciones:	

Si desea obtener más información, póngase en contacto con:



STERIS®

STERIS Corporation
5960 Heisley Rd.
Mentor, OH 44060-1834 • EE. UU.
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com

El idioma original de este documento es el
INGLÉS. Todas las traducciones deben
realizarse a partir del documento original.

**ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE
CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS Y LAS
NORMATIVAS NACIONALES Y LOCALES
APLICABLES**

©2022, STERIS Corporation.
Todos los derechos reservados.

*Este documento está destinado para el uso exclusivo de los clientes de STERIS,
incluidos los arquitectos y diseñadores. Se prohíbe la reproducción total o parcial por
cualquier parte que no sea un cliente.*

PRODUCTO:	ETIQUETAS E INDICADORES QUIMICOS PARA ESTERILIZACIÓN - STERICLIN		
IMPORTADO POR:	SURGIPLAST LTDA.	DOMICILIO:	BOGOTA - COLOMBIA
FABRICADO POR:	VEREIGNITE PAPIERWARENFABRIKEN GMBH	DOMICILIO:	ALEMANIA
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2019DM - 0020718	CLASE DE RIESGO	I
ESPECIFICACIÓN:	CINTA AUTOADHESIVA CON INDICADOR A VAPOR - STEAM		
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Las Etiquetas e Indicadores Químicos marca Stericlin buscan ser una herramienta para la identificación, control, documentación y seguimiento de los sistemas de barrera estéril de los dispositivos médicos que deben ser esterilizados para su uso, facilitando de esta manera su adecuada trazabilidad y monitoreo del proceso de esterilización.		

ESPECIFICACIONES	Propiedades Verificadas por el Fabricante	Cambio indicador: de verde a negro
		Grosor: 0,17 mm
		Ancho: 19 mm
		Largo del rollo: 50 m
		Fuerza de pegado: 10 N / 25 mm
		Fuerza tensil: 90 N / 25 mm
		Alargamiento: 7 %
	Inspecciones Visuales	1. Verificación de referencia del producto. 2. Etiqueta con las especificaciones del producto. 3. Información de lote.
	Fecha de Vencimiento **	De acuerdo a la información suministrada por el proveedor
	Condiciones de Conservación	Humedad Relativa: Entre 35%RH y 50%RH.
		Temperatura: Entre 15 °C a 25 °C.
		No almacene cerca de fuentes de calor, productos oxidantes, acidos o alcalinos, ni de productos de limpieza o desinfectantes
	Empaque Primario	Protector Plástico por unidad
	Empaque Secundario	Cajas de Carton por 48 rollos
	Advertencias y Precauciones	Este producto es de un solo uso, no reutilizar.
		No utilizar si el empaque no está en perfecto estado. Evitar sobre todo humedad, salpicaduras de agua y contacto con elementos cortopunzantes durante su almacenamiento.
	Método de Desecho o Disposición Final del Producto	Este producto después de su uso o mezcla con residuos infecciosos o de riesgo biológico, así como parcialmente utilizado, vencido y/o deteriorado, incluyendo su empaque debe ser separado en recipiente o bolsa roja identificada como riesgo biológico o infeccioso para ser posteriormente desechado de acuerdo a las políticas internas de la institución que lo genera, dando cumplimiento a la reglamentación nacional actualmente vigente.
	Método de Reutilización	No aplicable, dispositivo de un solo uso, No reutilizar

Observaciones:

* Cinta libre de plomo.

** Este producto cumple con el periodo de vida útil siempre y cuando se mantengan las condiciones de manipulación y almacenamiento adecuadas.

Surgiplast Ltda. Certifica que el producto cumple con los requisitos y especificaciones reglamentarias y las solicitadas por el cliente.

surgiPLAST
MEDICAL PRODUCTS-PACKAGING
Dra. CLAUDIA PATRICIA MARTÍNEZ MORENO
Directora Técnica
Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad

VºBº CONTROL DE CALIDAD


Dra. Patricia Martínez Moreno
Directora Técnica