

Nociones básicas del manejo de HyLED 600/HyLED 600M

1. Utilice el mango esterilizable para ajustar la posición del cabezal lumínico.

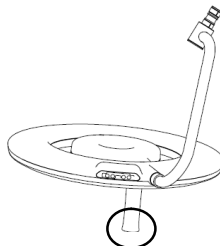


Figura 1 Ajuste de la posición del cabezal lumínico

2. Utilice la unidad de control para encender y apagar el cabezal lumínico y para ajustar la iluminancia. En la figura siguiente se muestra la disposición de la unidad de control.

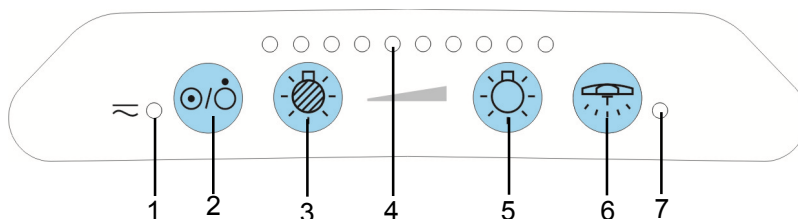


Figura 2 Unidad de control de HyLED 600/HyLED 600M

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1 Indicador de encendido | 2 Botón de encendido |
| 3 Bajar iluminancia | 4 Indicador de iluminancia |
| 5 Subir iluminancia | 6 Iluminación MIS |
| 7 Indicador de iluminación MIS | |

- 1). Encienda el módulo de alimentación de reserva o el módulo de batería si está configurado.
- 2). Pulse el "Botón de encendido" para encender o apagar el cabezal lumínico.
- 3). Pulse el botón "Subir iluminancia" o "Bajar iluminancia" para ajustar la iluminancia.
- 4). Compruebe el nivel de iluminancia en el "Indicador de iluminancia". La iluminancia se puede ajustar en 10 niveles.
- 5). Pulse el botón "Iluminación MIS" para activar o desactivar el modo de iluminación MIS. En este modo, la iluminancia es, aproximadamente, solo el 5% de la iluminancia máxima, suficiente para aportar una luz ambiental en las intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas.

⚠ PRECAUCIÓN

- **Asegúrese de que el módulo de alimentación de reserva o el módulo de batería queda apagado si ha finalizado el uso ese día o no va a utilizar el equipo durante varios días (por ejemplo, durante los fines de semana o las vacaciones). De lo contrario, la batería podría agotarse o dañarse.**