

Código Interno: EP360

Descripción: EA Panel Molecular para Infecciones Respiratorias y Neumonías

La validez de este control es garantizada siempre que se sigan las informaciones que contiene esta ficha.

1 - Identificación de la Empresa:

Controllab Controle de Qualidade para Laboratórios Ltda.

Dirección: Calle Ana Neri, 416 - Benfica - Rio de Janeiro / RJ - Código Postal: 20911-442

Teléfono para Contacto: +55 21 3891-9900

E-mail: Contact@controllab.com

2 - Composición:

Suspensión celular liofilizada o material clínico liofilizado con adición de constituyentes químicos y estabilizadores.

3 - Característica del Material:

Suspensión celular liofilizada o material clínico liofilizado.

4 - Presentación:

Dos ítems, en tubo, cada uno contiene 1,0 mL de muestra.

5 - Condiciones para Transporte:

No transportar con materiales que puedan transmitir olor o contaminar de manera directa o indirecta.

Este material es estable a una temperatura máxima de transporte de 40 °C por 7 días.

6 - Condiciones para Almacenamiento:

Almacenar en temperatura entre 2 °C a 8 °C; separado de materiales que puedan transmitir olor o contaminar de manera directa o indirecta.

7 - Condiciones de Manejo / Situaciones de Emergencia:

Se deben adoptar los procedimientos de Bioseguridad Nivel 2, Precauciones Universales y Buenas Prácticas de Laboratorio en el manejo de este material de control hasta su total eliminación.

Este material solo debe ser manipulado por personal debidamente capacitado en procedimientos de laboratorio y familiarizado con buenas prácticas de laboratorio. Utilizar Equipo de Protección Individual (EPI) con Certificado de Aprobación emitido por el organismo regulador. Las manos deben lavarse incluso después de usar guantes.

En Situaciones de Emergencia, consultar la Ficha de Datos de Seguridad, disponible en la página web de Controllab.

8 - Disposición:

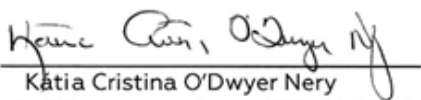
Todos los materiales biológicos de origen humano y/o animal y otros materiales potencialmente infecciosos, deben ser descontaminados y eliminados de forma adecuada como material infeccioso. Descarte los residuos de acuerdo con las regulaciones nacionales, regionales o locales si aplica.

Es deber de la empresa usuaria de este material de control definir los procedimientos para el descarte de este material en su Plan de Gestión de Residuos de Servicios de Salud.

Descartar los embalajes de acuerdo con las regulaciones nacionales, regionales o locales si aplica.

9 - Informaciones Técnicas / Aplicaciones:

Se utiliza para el Ensayo de Aptitud para determinar el rendimiento de la fase analítica del laboratorio.


Kátia Cristina O'Dwyer Nery

Responsable Técnica

Revisión 08 – Fecha de la última revisión: 21/08/2024

Página 1 de 1

Calle Ana Neri, 416 - Barrio: Benfica
Código Postal: 20911-442 - Ciudad: Rio de Janeiro/RJ - Brasil
Teléfono: +55 21 3891-9900
e-mail contact@controllab.com

www.controllab.com/es