

Write-on Bags

Bolsas de muestreo esterilizadas con sistema de escritura, ideales para análisis microbiológico de aguas, alimentos, cosméticos, entre otros.

Las bolsas Write-On Riverlabs proporcionan una solución segura, sostenible y eficiente para la recolección, almacenamiento y transporte de muestras, ayudando a reducir costos y minimizar desperdicios.




Pestañas de alambre a prueba de perforaciones que garantizan un acceso fácil y un cierre sin fugas.



Tira de escritura, etiquetado rápido, identificación clara de muestras y fácil organización y trazabilidad.



Pestañas de tiro con Tyvek antideslizante, dispuestas perpendicularmente a la abertura, que facilitan una apertura segura y aséptica, evitando el contacto de las manos con el interior de la bolsa.

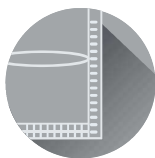

Sello de perímetro continuo para prevenir fugas.



Esterilización post-fabricación con cierre perforado para mantener la esterilidad.



Película de Polietileno con alta claridad, resistencia superior, esterilización post-fabricación y aprobación de la FDA.

Write-on Bags

Aplicaciones

Aplicables para la recolección, almacenamiento y transporte de muestras en laboratorios, industrias alimentarias, ambientales, cosméticas, de aguas, bebidas y farmacéuticas.

Certificación de Aseguramiento de Calidad

Bolsas de muestreo libres de R-NASE, D-NASE y pirógenos, cumplen con los estándares de FDA, ISO 9001 e ISO 11135, y son esterilizadas con gas óxido de etileno en instalaciones certificadas por ISO.

Especificaciones Técnicas

Descripción del Producto	Bolsa estéril sellada por los cuatro lados con alambre metálico
Película Plástica	Película coextrusionada de HDPE (Polietileno de Alta Densidad) y LLDPE (Polietileno Lineal de Baja Densidad)
Alambre Metálico	Aluminio
Cinta	Poliéster
Lengüetas de Tirado	6.5 mm de ancho en Tyvek
Sistema de escritura	Etiquetar de forma rápida y sencilla con bolígrafo o marcador.
Esterilización	Esterilizada con gas EO bajo ISO11135.
Vida útil	Cinco años a partir de la fecha de fabricación.
Regulación	Aprobada por la FDA para contacto con alimentos.

Ventajas

- Cierre fácil de la bolsa doblando la parte superior de la bolsa junto con el alambre tres veces para crear una bolsa de muestreo a prueba de fugas.
- Cinta a prueba de perforaciones y extremos de alambre especialmente tratados para reducir la posibilidad de que el alambre metálico se perfora fuera de la cinta.
- Bolsas con sistema de escritura integrado, ideales para la identificación y etiquetado claro y fácil de las muestras.
- La esterilización está garantizada al esterilizar los cartones sellados con gas óxido de etileno después de la fabricación en una instalación certificada por ISO.

Write-on Bags

Instrucciones de uso




1 Etiquete su muestra.




2 Para abrir, corte a lo largo de la perforación en la parte superior.



3 Use las pestañas de Tyvek para abrir sin riesgo de contaminación.

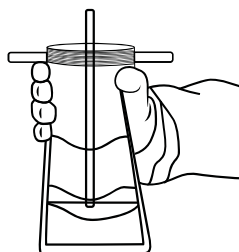


4 Coloque la muestra líquida o sólida en un lado del filtro.

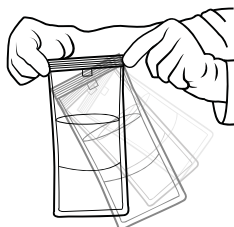

5 Sujete la bolsa por las pestañas y gírela entre 3 y 4 veces para sellarla correctamente.



6 Alternativamente doble la pestaña firmemente entre 3 y 4 veces para cerrarla de manera segura.

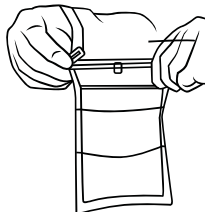

7 Para un cierre seguro, doble los extremos del alambre para mantener los sólidos sellados.



8 O bien, junta los dos extremos del alambre, gíralos, átalos y mételos.

Write-on Bags

Información para pedidos

Código	Producto	Cantidad
RL0818	Write-On 4 oz / 118 ml	500 Bags/Box
RL1018	Write-On 7 oz / 207 ml	500 Bags/Box
RL1123	Write-On 18 oz / 532 ml	500 Bags/Box
RL1523	Write-On 24 oz / 710 ml	500 Bags/Box
RL1930	Write-On 55 oz / 1627 ml	500 Bags/Box
RL2638	Write-On 92 oz / 2721 ml	250 Bags/Box

Almacenamiento

- Lugar seco y limpio, alejado de contaminantes.
- Proteger de la luz.
- Verificar empaque intacto y usar antes de la fecha de vencimiento.
- Mantener en condiciones ambientales de temperatura entre 20-25 °C (68-77 °F), sin superar los 32 °C (90 °F), y con una humedad relativa inferior al 75%.
- Bajo estas condiciones, los productos Write-On Riverlabs tienen una vida útil recomendada de 5 años a partir de su fecha de fabricación.