# JERINGA HIPODÉRMICA CON AGUJA ALFASAFE®





| | |
|---|---|
| **NOMBRE GENÉRICO** | Jeringa desechable con Aguja<br>Jeringa Hipodérmica 3 Partes<br>Jeringa Hipodérmica Estéril |
| **NOMBRE COMERCIAL** | Jeringa Hipodérmica con Aguja |
| **MARCA** | ALFASAFE ® |
| **TIPO DE PRODUCTO** | Dispositivo Médico |
| **REGISTRO SANITARIO** | 2018DM-0001797-R1 |
| **VIGENCIA** | 06 de Febrero de 2028 |
| **TIPO DE RIESGO** | Clase IIA Riesgo moderado |
| **VIDA ÚTIL** | 5 AÑOS |

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | •Dispositivo Médico estéril de un solo uso.<br>•Tubo transparente con un conector de acople macho (LUER LOCK) en uno de sus extremos.<br>•En el extremo cuenta con un pistón con embolo, movible.<br>•Cuenta con aguja la cual consta de una cánula de metal afilado en uno de sus extremos y ensamblado en el otro a un cono de acople hembra que encaja en el conector de acople macho de la jeringa.<br>•Consta de empaque en papel grado médico, hermético, individual de fácil apertura, apirógeno.<br>•El tipo de esterilización es ETO y/o Gamma. |
| **CARACTERÍSTICAS** | •Alas de sujeción para fácil manejo, lo cual permite que la jeringa no se deslice en una superficie inclinada.<br>•Impresión de escala en tinta inyect, no borrable, no removible, no contaminante, indeleble lo cual permite mayor exactitud en la dosificación.<br>•Sistema Luer lock para una mayor sujeción de la aguja y menor riesgo laboral.<br>•Aguja Siliconada y tribiselada para una punción menos traumática. |

| | |
|---|---|
| **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO** | •Humedad Relativa: MÁXIMA 70%<br>•Temperatura: MÁXIMA 30C°<br>•Almacenar en lugar fresco y seco.<br>•Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad del producto. |
| **ESTANDARES NORMATIVOS** | Las jeringas Alfa Safe cumplen con la norma ISO7886-1:1993/CPJ-S, ISO 13485 |
| **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS** | •Dispositivo para un solo uso.<br>•Una vez abierto el empaque estéril utilizarlo en el menor tiempo posible con el fin de evitar contaminación.<br>•No almacenar en ambientes húmedos.<br>•No utilizar si el empaque se encuentra abierto. |
| **DISPOSICIÓN FINAL** | •Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos.<br>•En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo" |

**USOS**

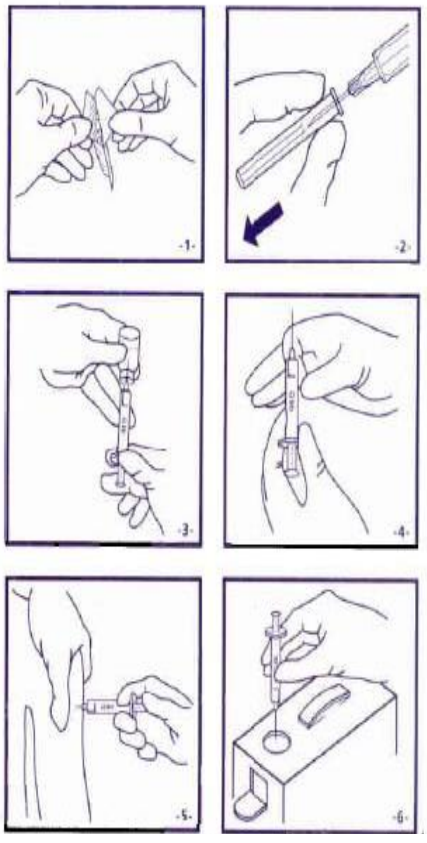



•Verifique que el empaque de la jeringa no esté dañado y/o abierto. En cualquier de estos casos deséchela.
•Abra el extremo del empaque y retire la jeringa.
•Limpie la superficie del frasco-ampolla con alcohol y deje que se seque al aire.
•Remueva el protector de la aguja. No mueva el émbolo ni trate de inyectar aire en el frasco-ampolla ya que esto bloqueará la jeringa.
•Levante e invierta el frasco-ampolla e inserte la aguja.
•Mantenga la punta de la aguja en el líquido en todo momento, no dejando que entre aire a la jeringa. Podría causar una dosis incorrecta.
•Hale el émbolo lentamente para llenar la jeringa. El émbolo se detendrá automáticamente justo después de la marca de los ml.
•Para eliminar las burbujas de aire, retire la aguja del frasco y, sosteniendo la jeringa en posición vertical, golpee la camisa para desplazar las burbujas hacia la punta de la jeringa.
•Hale el émbolo para permitir que entre aire a través de la aguja hasta que dicho aire entre en contacto con el aire en la camisa de la jeringa. Luego empuje con cuidado el émbolo hasta la dosis (ml), expulsando así la burbuja de aire.
•Administre la inyección de acuerdo a las instrucciones clínicas.
•Empuje el émbolo hasta el final para administrar la dosis correcta. El émbolo se bloqueará automáticamente para prevenir que la jeringa vuelva a ser utilizada.
•Deseche la jeringa inmediatamente en un recolector .No tape la aguja.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| CAPACIDAD | GRADUACIÓN MÍNIMA | GRADUACION NUMERICA | CUERPO | | AGUJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Longitud | Diametro | CALIBRE | | LONGITUD | |
| | | | mm | mm | Gauge | mm | Pulgada | mm |
| **2 ml /cc** | 0.1 ml | cada 0.5 ml | 60 ± 5 | 11 ±5 | 21 G | 0.8mm | 1" 1/2 | 38 mm |
| **3 ml /cc** | 0.1 ml | cada 0.5 ml | 60 ± 5 | 11 ±5 | 21 G | 0.8mm | 1" 1/2 | 38 mm |
| **3 ml /cc** | 0.1 ml | cada 0.5 ml | 60 ± 5 | 11 ±5 | 23 G | 0.6mm | 1" | 25 mm |
| **5 ml /cc** | 0.2 ml | cada 1 ml | 63 ± 5 | 14 ±5 | 21 G | 0.8mm | 1" 1/2 | 38 mm |
| **10 ml /cc** | 0.2 ml | cada 1 ml | 77 ± 5 | 16,5 ±5 | 21 G | 0.8mm | 1" 1/2 | 38 mm |
| **20 ml /cc** | 0.5 ml | cada 5 ml | 94,5 ± 5 | 21 ±5 | 21 G | 0.8mm | 1" 1/2 | 38 mm |
| **50 ml /cc** | 2 ml | cada 10 ml | 118 ± 5 | 32 ±5 | 21 G | 0.8mm | 1" 1/2 | 38 mm |

| COMPONENTES | | | |
|---|---|---|---|
| # | PARTES | | MATERIAL |
| **1** | **Embolo** | | Polipropileno |
| **2** | **Cilindro** | | Polipropileno |
| **3** | **Pistón** | | Caucho natural |
| | | **1.Soporte** | Polipropileno |
| **4** | **Aguja** | **2. Cánula** | Acero inoxidable 304 |
| | | **3.Cubierta Segura** | Polipropileno |

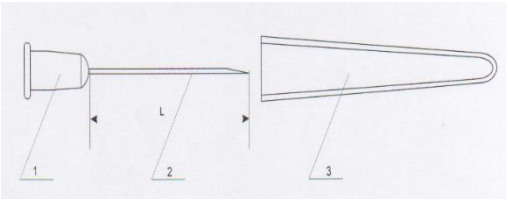


## PRESENTACIÓN COMERCIAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN COMERCIAL (Unidad mínima de despacho) | UNIDAD DE EMBALAJE |
|---|---|---|---|
| JEHL001 | JERINGA HIPODÉRMICA 2 ml x 21G x 1½" ALFASAFE (1 Unidad) | 100 UNIDADES | 2400 UNIDADES |
| JEHL002 | JERINGA HIPODÉRMICA 3 ml x 21G x 1½" ALFASAFE (1 Unidad) | 100 UNIDADES | 2400 UNIDADES |
| JEHL003 | JERINGA HIPODÉRMICA 3 ml x 23G x 1" ALFASAFE (1 Unidad) | 100 UNIDADES | 2400 UNIDADES |
| JEHL004 | JERINGA HIPODÉRMICA 5 ml x 21G x 1½" ALFASAFE (1 Unidad) | 100 UNIDADES | 1800 UNIDADES |
| JEHL005 | JERINGA HIPODÉRMICA 10 ml x 21G x 1½" ALFASAFE (1 Unidad) | 100 UNIDADES | 1200 UNIDADES |
| JEHL006 | JERINGA HIPODÉRMICA 20 ml x 21G x 1½" ALFASAFE (1 Unidad) | 50 UNIDADES | 900 UNIDADES |
| JEHL007 | JERINGA HIPODÉRMICA 50 ml x 21G x 1½" ALFASAFE (1 Unidad) | 25 UNIDADES | 300 UNIDADES |