

Dirección Reg:	2 Fuxing Road, Guilin, Guangxi 541004, China
Dirección Fab:	2 Fuxing Road, Guilin, Guangxi 541004, China Innovation Mansion, Information & Industrial Estate, Guilin High and New Technology Industrial Development Zone
Tel:	+86-773-5855350 (English service for 24 hours) +86-773-5831172
Fax:	+86-773-5822450
E-mail:	woodpecker@mailg.cn sales@woodpecker.cn
Web:	http://www.glwoodpecker.com

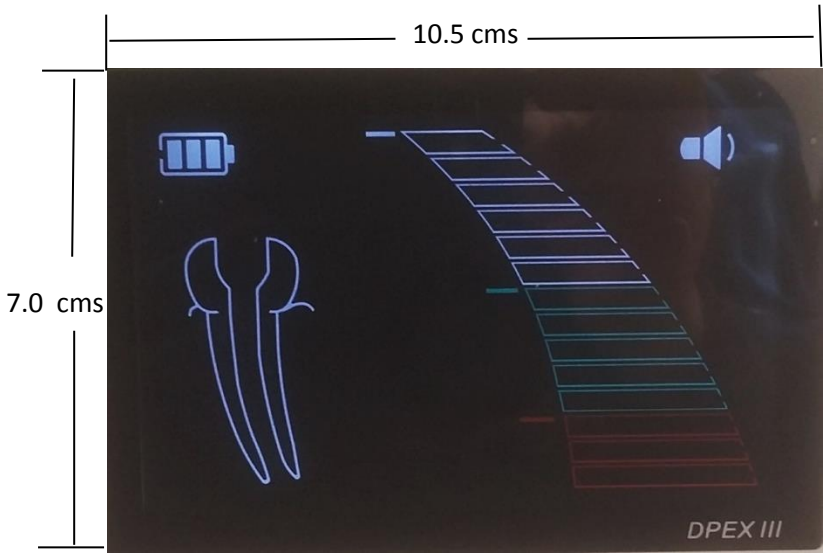
LOCALIZADOR DE APICES DPEX III

FICHA DE DATOS TECNICOS



HOJA DE DATOS TECNICOS	
NOMBRE DEL PRODUCTO	LOCALIZADOR DE APICES
MODELO	DPEX III
CLASE DISPOSITIVO MEDICO	IIA
FABRICANTE	GULIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD 2 Fuxing Road, Guilin, Guangxi 541004, China Tel: 86-773-5855350 Fax: 86-773-5822450 E-mail: woodpecker@mailgl.cn www.glwoodpecker.com
USO	El Localizador de Ápice DPEX III es un equipo portátil, utilizado como soporte para tratamientos endodonticos, que es principalmente usado para medir la longitud del canal radicular del diente, ayudando al dentista a terminar el procedimiento clínico.
COMPONENTES	01 Unidad principal DPEX III 01 Alambre de medida 01 Gancho para labio 01 Gancho para lima 01 Probador 01 Sonda de Contacto 01 Adaptador de corriente 01 Batería Recargable 3.7V 750mAh PZK
CARACTERISTICAS	-Equipado con una pantalla LCD policromática, que proporciona imágenes claras y los diferentes colores indican la trayectoria de la lima claramente. -Basado en una red de frecuencia de avanzada tecnología para medición de impedancia múltiple y calibración automática asegura que las medidas sean exactas. -El gancho de la lima, el gancho del labio y la sonda de contacto, pueden ser autoclavadas a alta temperatura y alta presión, evitando infección cruzada efectivamente. -Equipo portátil, no necesita estar conectado a la corriente, cuenta con batería recargable, no es necesario el cambio de batería repetidamente.
CONTRAINDICACIONES	-Se prohíbe el uso de este equipo en pacientes con marcapasos (u otros equipos eléctricos) o en pacientes que hayan sido advertidos de no usar equipos eléctricos (como afeitadora eléctrica o secador eléctrico) -El equipo debe ser usado con extrema precaución en pacientes con enfermedades del corazón, mujeres embarazadas y niños.
PRECAUCIONES	Para uso profesional exclusivamente Mantenga fuera del alcance de los niños
RECOMENDACIONES GENERALES	El usuario es responsable de la esterilidad del producto para el primer ciclo y de cada uso aún más, así como para el uso de los instrumentos dañados o sucios. -Por nuestra propia seguridad use equipo de protección personal (guantes, gafas, mascarillas).

	-Use únicamente soluciones desinfectantes las cuales estén aprobadas su eficacia (VAH, lista DGHM, marcado CE, aprobación FDA).
ALMACENAMIENTO	El equipo debe ser manejado cuidadosamente. Asegúrese de que está lejos de la vibración, y se debe instalar o mantiene en un lugar seco y fresco lugar. No almacene la maquina junto a artículos combustibles, venenosos, cáusticos o explosivos. Este equipo debe ser almacenado en un lugar en donde la humedad relativa ≤80%, presión atmosférica entre 70kPa y 106kPa y temperatura entre -10°C y 50°C. Evite el almacenamiento en condiciones extremadamente calurosas. Altas temperaturas acortaran el tiempo de vida útil de los componentes electrónicos, daño en la batería, o puede deformar o derretir las partes plásticas. Evite el almacenamiento de en condiciones extremadamente frías. De otra manera, cuando la temperatura del equipo incremente a un nivel normal, habrá gotas de rocío que probablemente dañaran la tarjeta PCB.
TRANSPORTE	Impacto y movimiento excesivo deben ser previstos en el transporte. Colocarlo cuidadosamente y no invertir. Evitar los rayos directos del sol, nieve y humedad por lluvia durante el transporte. No ponga junto a elementos peligrosos durante el transporte.
EL PRODUCTO SE ENCUENTA CONFORME CON LAS SIGUIENTES NORMAS	EN 60601-1:2006 EN 60601-1-2:2007 EN 60601-1-6:2010 EN 62366:2008 EN 980:2008 EN ISO 9687:1195 EN 1041:2008 ISO 15223-1-2012 EN ISO 14971:2012 EN ISO 17664:2004 EN ISO 17665-1:2006 EN ISO 7405:2008 + A1:2003 EN ISO 10993-1:2009 EN ISO 10993-5:2009 EN ISO 10993-10:2010

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Batería	3.7V/750mAh
Adaptador	100 V – 240 V 50Hz/60Hz
Poder de consumo	≤ 0.5 W
Pantalla	4.5” LCD 
Sonido de alerta	El equipo emitirá un sonido cuando la lima endodoncia este a menos de 2 mm del ápice.
Condiciones de Operación	
Temperatura ambiente:	5°C – 40°C
Humedad Relativa	≤ 80%
Presión Atmosférica	70kPa – 106 kPa