Ambu

English

Directions for use

Single Patient Monopolar Needle Electrode (with lead wire)

Indication for use

The Ambu Neuroline Disposable Monopolar needle electrodes are made for muscle activity recording for Electromyography (EMG) applications.

Precautions

Ambu Neuroline Monopolar needle electrodes are for single patient use only. Do not use if individual pouch is damaged or has been opened.

Do not reuse. US: Rx only.

Sterilization/Sterilisation


Sterilized/Sterilised by Ethylene oxide sterilization/sterilisation (ETO).

Packaging

One needle electrode in a pouch.

Directions for use

1.

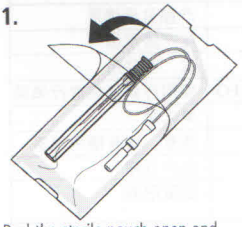

Peel the sterile pouch open and remove the single patient needle electrode.

2.



Connect the Ambu Neuroline Monopolar needle electrode with lead wire, that carries a standard 1.5 mm DIN connector, directly to the equipment. Remove the protective tube.

3.



After use, dispose of the needle electrode in a designated container. Do not reuse or re-sterilize/re-sterilise.

Symbol	Indication
REF	Catalog/Catalogue number
LOT	Batch code
	Use by
Sterile EO	Sterilized/sterilised by Ethylene oxide
	Single use
	Attention, see instruction for use
	Date of manufacture
	Temperature limitation
CE 0086	The Monopolar needle electrodes are in conformity with European Medical Directive 93/42/EEC

CE 0086

Ambu® is a registered trademark of Ambu A/S, Denmark.
Ambu A/S is certified according to ISO 9001 and ISO 13485.

Made in Malaysia
Ambu A/S
DK-2750 Ballerup
Tel.: +45 72 25 20 00
Fax: +45 72 25 20 50
www.ambu.com

Printed in Malaysia
0223-05/07 - Version 1.0.1

Instrucciones de uso

Español

Electrodo de aguja monopolar desechable (con cable conductor)

Aplicación recomendada

Exámenes de electromiografía (EMG)

Precauciones

Los electrodos de aguja monopolares de Ambu Neuroline son únicamente para uso individual. No los utilice si su envoltorio individual se encuentra dañado o abierto.

No reutilizable.

Esterilización

Esterilización con óxido de etileno (ETO).

Envasado

1 electrodo de aguja en un envoltorio.

Instrucciones de uso

1. Abra el envoltorio estéril y extraiga el electrodo de aguja de uso individual.
2. Conecte el electrodo de aguja monopolar de Ambu Neuroline con cable conductor, equipado con un conector DIN estándar de 1,5 mm, directamente al equipo. Retire el tubo protector.
3. Después de su uso, deseche el electrodo de aguja en un recipiente adecuado. No utilice ni esterilice de nuevo.

Símbolo	Indicación
REF	Número de referencia
LOT	Número de lote
	Fecha de caducidad
Sterile EO	Esterilizado con óxido de etileno
	Para uso en un solo paciente
	Ver instrucciones de uso
	Fecha de fabricación
	Temperatura de almacenamiento en envase intacto

Ambu® es una marca registrada de Ambu A/S, Dinamarca.
Ambu A/S dispone de certificado según ISO 9001 e ISO 13485.

Bruksanvisning

Svenska

Ambu Neuroline Monopolar för engångsanvändning (med ledning)

Rekommenderad användning

Elektromyografi (EMG)-undersökningar

OBS

Ambu Neuroline Monopolar är endast avsedda för engångsanvändning. Använd inte produkten om påsen är skadad eller har öppnats.

Endast för engångsbruk.

Sterilisering

Steriliserad med hjälp av etylenoxid (ETO).

Förpackning

1 nålelektrod i en påse.

Bruksanvisning

1. Öppna den sterila påsen och ta ut nålelektroden för engångsanvändning.
2. Anslut Ambu Neuroline-nålelektroden med en pol och en ledning, som är utrustad med en 1,5 mm DIN-standardkonnektor, direkt till utrustningen. Ta bort skyddsröret.
3. Släng nålelektroden i därför avsedd behållare efter användning. Får inte återanvändas eller steriliseras på nytt.

Symbol	Betydelse
REF	Katalognummer
LOT	Spårbart nummer
	Bäst före
Sterile EO	Steriliserad med hjälp av etylenoxid
	Engångsbruk
	Se bruksanvisningen
	Tillverkningsdatum
	Förvaringstemperatur i oöppnad påse

Ambu® är ett registrerat varumärke tillhörande Ambu A/S, Danmark.
Ambu A/S är certifierat i enlighet med ISO 9001 och ISO 13485.