
| BIOPLAST S.A. | **FICHA TECNICA**<br>**PRODUCTO TERMINADO** | **Código:**<br>**FT-DT-010** | **Fecha de emisión:**<br>**2017 Febrero 02** |
|---|---|---|---|
| | | **Versión : 4** | **Página 1 de 1** |

| **INFORMACIÓN GENERAL** | | **COMPONENTES DEL PRODUCTO** |
|---|---|---|
| **Nombre:** | CANULA NASAL PARA OXIGENO MEDICINAL | MODELOS<br>Adulto: 2m, 7m, 15m<br>Neonato: 2m<br>Pediátrica: 2m<br><br>1. Nariguera/pro<br>2. Conector fuente de Oxigeno<br>3. Conector Doble.<br>4. Ajustador.<br>5. Tubo de flujo<br>6. Extensión |
| **Fabricante:** | BIOPLAST S.A. | |
| **Marca:** | BIOLIFE | |
| **Vida Útil :** | 5 Años<br>Estéril: 3 Años | |
| **Procedencia:** | Colombia | |
| **Registro Sanitario INVIMA:** | 2016DM-0000161-R1 | |
| **Vigencia:** | Julio 18 de 2026 | |
| **Clasificación de riesgo:** | IIA | |
| **Método de esterilización** | Óxido de Etileno (ETO) | |

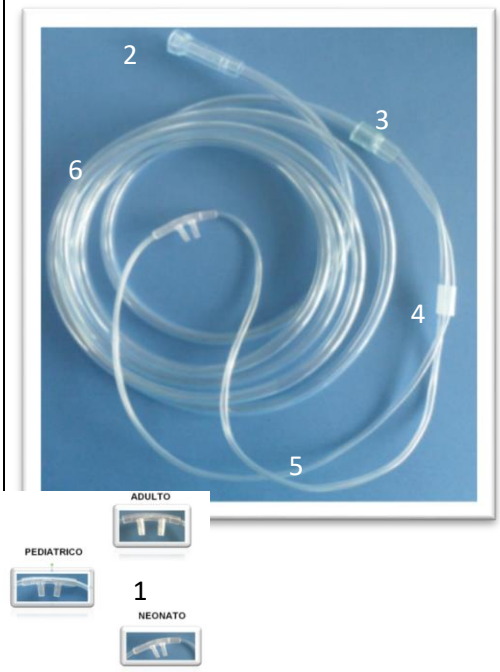


| | |
|---|---|
| **Descripción y uso del producto** | Dispositivo diseñado para la administración de oxígeno a bajo flujo medicinal desde una fuente de oxígeno, tipo gafas, puntas flexibles y extra suaves, conector cónico para la fuente de oxígeno. Por ser desechable elimina el riesgo de contaminación cruzada entre pacientes. La temperatura de plastificación garantiza la asepsia y libera el producto de presencia de patógenos. |
| **Indicaciones y precauciones de uso** | • Uso bajo supervisión de un profesional del área médica.<br>• Conservar en un lugar fresco y seco.<br>• Uso de un solo paciente. |
| **Composición** | PVC grado médico atoxico, flexible. |
| **Contraindicaciones** | • El producto se debe administrar en dosis de bajo flujo, hasta 5 litros por minuto (LPM), para flujos superiores se recomienda el empleo de mascarilla.<br>• En el uso prolongado debe humectarse con empleo de humidificador para Oxigenoterapia a fin de evitar la resequedad de las vías aéreas superiores.<br>• En caso de paciente oxígeno dependiente o aquel que usa el producto durante periodos muy prolongados, se debe efectuar reposición del dispositivo de forma regular ya que por el uso del producto, este puede tender a volverse rígido incomodando al usuario. |
| **Numero de Re-usos** | Un solo uso. Producto Descartable. |
| **Presentación comercial:** | • Extensión 2 metros: Empaque de 200 unidades en caja de cartón corrugado.<br>• Extensión 7 metros: Empaque de 50 unidades en caja de cartón corrugado.<br>• Extensión 15 metros: Empaque de 30 unidades en caja de cartón corrugado. |
| **Condiciones de almacenamiento** | • Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos.<br>• Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo.<br>• Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación. |
| **Disposición final:** | La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 2676 del 2000 (Diciembre 22) del Ministerio de salud “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.” |

| **Elaborado por:**<br>*Sandra Milena Caicedo Infante*<br>**Director Técnico** | **Revisado por:**<br>*Sandra Milena Caicedo Infante*<br>**Director Técnico** | **Aprobado por:**<br>*Gustavo Pinzón Díaz*<br>**Gerente General** |
|---|---|---|
| Fecha : 2017 Febrero 02 | Fecha : 2017 Febrero 02 | Fecha : 2017 Febrero 02 |