
Profamilia
Pensando en ti

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
ESPÉCULOVAGINAL PROFAMILIA

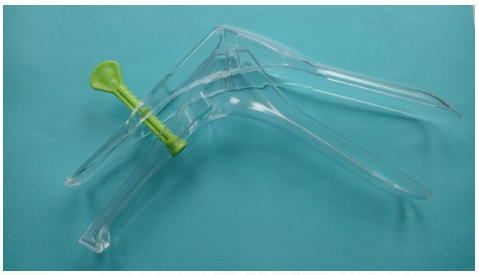

Registro Sanitario	**INVIMA 2014DM-0011342**
Clasificación Dispositivo	**Clase IIa**
Uso	El espéculo vaginal se usa para exploración visual de la vagina, ya que dilata la cavidad y mantiene separadas las paredes de la misma, permite examinar su interior visualmente y facilita la toma de muestras.Normalmente se suele utilizar para los siguientes procedimientos: - Frotis - Toma de muestras - Legrado - Colposcopia - Poner o retirar un dispositivo intrauterino (DIU) - Ablación de pólipos - Recuperar ovocitos - Exámenes de fertilidad
Descripción del producto	EL ESPÉCULO VAGINAL PROFAMILIA evita el contacto directo con secreciones corporales (sangre, moco vaginal, orina, etc), reduciendo el riesgo de transmisión de enfermedades durante los procedimientos de exploración y toma de muestras en aparato reproductor femenino.
Instrucciones de uso	**IMPORTANTE: Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el ESPÉCULO VAGINAL PROFAMILIA:** 1- Cualquier procedimiento puede ser llevado a cabo únicamente por profesional sanitario entrenado, el cual debe informar ala paciente toda información concerniente. 2- La paciente debe estar acostada boca arriba en una camilla especial para facilitar la exploración vaginal. 3- Destape el ESPÉCULO VAGINAL PROFAMILIA y verifique la funcionalidad del espéculo 4- Tome el espéculo eintrodúzcalo en la vagina de la paciente con las valvas cerradas. 5- Mediante el tornillo del espéculo, separe las valvas para abrir la cavidad vaginal. 6- Realice el procedimiento médico. 7- Una vez finalice el procedimiento, cierre las valvas y retire el espéculo con cuidado. Deseche en un lugar adecuado.
Precauciones de Uso	- **PRODUCTO DE USO ÚNICO** - Una vez usado, se debe desechar como material con riesgo biológico. No reutilizar.

	- Una vez abierto el empaque, utilice inmediatamente.
Presentaciones Comerciales	1 Bolsa con Espéculo Vaginal Talla M. 1 Bolsa con Espéculo Vaginal Talla S.
Condiciones de almacenamiento	Almacénese en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños.
Fabricado por:	Medical Nissi S.A.S. Bogotá D.C., Colombia
Importado y distribuido por:	Asociación Probienestar de la Familia Colombiana PROFAMILIA

Q.F. OSCAR FERNANDO TUTA CAIPA
Coordinador de Investigación y Desarrollo
Asociación Probienestar de la Familia Colombiana
Calle 34 No. 14-52
Teléfono: (+57) 3390900
Bogotá, Colombia