



GERMAR GMG S.A.S.
Equipos Médicos e Insumos
www.germarmedical.com
Nit: 900.081.215-8

Electrocardiógrafos
Ecocardiografos
Desfibriladores
Pruebas de Esfuerzo
Holter ECG
Monitores
Mesa Tilt Test
Papelería Médica

Espirómetro MIR
Alcoholímetros
Oxímetros
Telemetría ECG
Electroencefalógrafos
Electromiografos
Cables y Sensores
Chupas y Clamps

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
03	AGOSTO	2020

REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO No. 6802

ENTIDAD: HOSPITAL SANTA CLARA / SAO HANA	UBICACIÓN: BOGOTÁ
RESPONSABLE: DR VACA	REPORTADO POR:

SOLICITUD DE SERVICIO

DIAGNOSTICO

☐

CONTRATO

☐

PREVENTIVO

☒

GARANTIA

☐

CORRECTIVO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

EQUIPO PARA MANTENIMIENTO

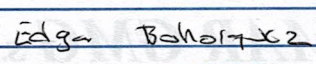
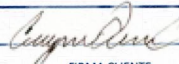
EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ID	HORA
GRABADORA Holter	CARDIO SCAN	DRS 300-3A	3A-14016	6280	

LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO

Verificaciones y pruebas de funcionamiento pre-mantenimiento:	Prueba de impresión.	NA
Estado físico externo del equipo.	Verificación de componentes eléctricos	✓
Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	Limpieza de los cables a paciente ECG.	✓
Transferencia de datos - Interface equipo medico Pc.	Limpieza externa del equipo.	✓
Toma de mediciones de presión arterial.	Lubricación de Tornillo sinfin para inclinación y rodamientos.	NA
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	Verificación de parámetros de simulador: MV PPM PA J SPO2	✓
Prueba de teclado.	Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a paciente.	✓
Pruebas de velocidad.	Verificación de obstrucciones o fugas en el circuito neumático.	NA
Pruebas de inclinación.	Depuración de errores y/o fallas en el software.	NA
Prueba parada de emergencia.	Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento:	
Estado físico interno del equipo.	Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	✓
Verificación de errores en el software.	Carga de información de paciente usando comunicación PC-Holter.	✓
Backup de la información.	Muestreo de datos.	✓
Sincronización de la base de datos.	Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	✓
Verificación de configuraciones del software.	Verificación modo prueba de PA	NA
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro.	Descarga de la información usando comunicación Holter-PC.	✓
Realización del mantenimiento del equipo:	Prueba de velocidad e inclinación.	NA
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electrónicas	Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura.	NA
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación.	Comprobación de funcionamiento normal del Software.	✓
	Asignación de Adhesivo ST.	NA

No. 8865

DESCRIPCION: Se realiza revision tecnica y funcional limpieza general carcasa tarjeta electronica cable de paciente Se hacen pruebas con simulador de ECG y se descarga estudio en el software y el equipo apto para su uso

 FIRMA INGENIERO	 FIRMA CLIENTE	PRUEBA DE DOSIMETRÍA SI ☐ NO ☐
--	---	--

Bogotá, Diagonal 115A #70B-17 – PBX 6135499-CEL:3102117586

germarmedical@gmail.com