
Guía rápida para M9

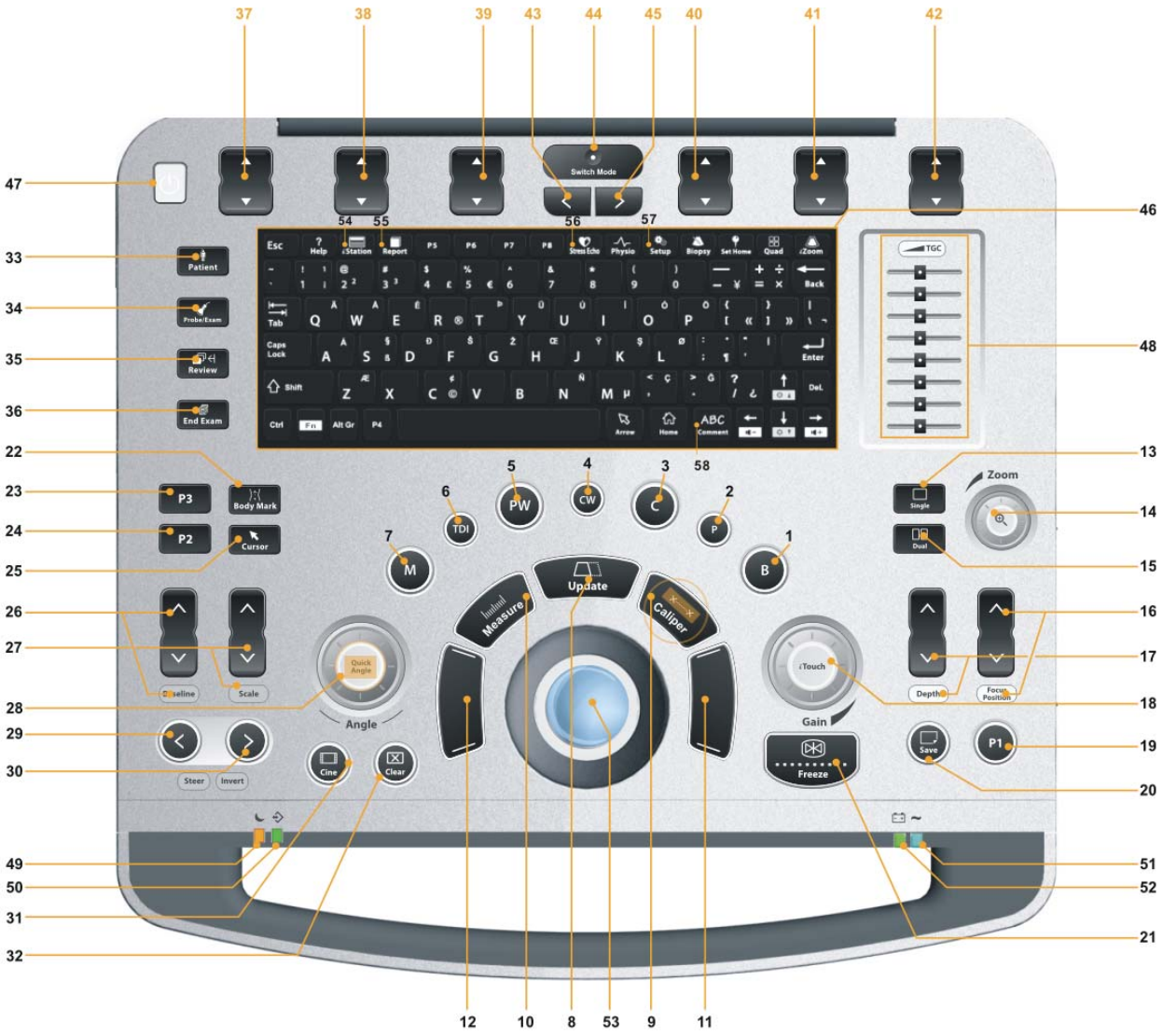

1	Modo B	30	Steer/Invert (Dirigir/Invertir)
2	Modo Power	31	Cine
3	Modo Color	32	Clear (Borrar)
4	Modo CW	33	Patient information (Paciente)
5	Modo PW	34	Interruptor Probe/Exam (Sonda/Examen)
6	TDI	35	Review (Revisar)
7	Modo M	36	End Exam (Fin examen)
8	Update (Actualizar)	37	Soft key1 (Tecla multifunción 1)
9	Caliper (Calibre)	38	Soft key2 (Tecla multifunción 2)
10	Measure (Medida)	39	Soft key3 (Tecla multifunción 3)
11	Set (Definir)	40	Soft key4 (Tecla multifunción 4)
12	Set (Definir)	41	Soft key5 (Tecla multifunción 5)
13	Ventana Single (Único)	42	Soft key6 (Tecla multifunción 6)
14	Zoom	43	Menu page turning (Cambio de página de menú) (siguiente)
15	Ventana Dual	44	Mode switching (Cambio de modo)
16	Focus Position (Pos f)	45	Menu page turning (Cambio de página de menú) (anterior)
17	Depth (Prof.)	46	Numerical keyboard (Teclado numérico)
18	Gain/iTouch (Ganancia/iTouch)	47	Power switch (Interruptor de conexión/desconexión)
19	User-defined key1 (Tecla definida por el usuario 1)	48	TGC slider (Barra deslizante TGC)
20	Save (Guardar)	49	Standby indicator (Indicador de estado de espera)
21	Freeze (Congelar)	50	HDD indicator (Indicador HDD)
22	Body Mark (Ref corp)	51	AC power indicator (Indicador de la fuente de alimentación de CA)
23	User-defined key 3 (Tecla definida por el usuario 3)	52	Battery indicator (Indicador de la batería)
24	User-defined key 2 (Tecla definida por el usuario 2)	53	Trackball (Bola de seguimiento)
25	Cursor	54	iStation
26	Baseline (Lín base)	55	Report (Informe)
27	Scale (Escala)	56	Stress Echo (Eco de esfuerzo)
28	Angle/Quick Angle (Ángulo/Ángulo rápido)	57	Setup (Configuración)
29	Steer/Invert (Dirigir/Invertir)	58	Text comment (Comentario de texto)

1. Inicio

Nuevo paciente

1. Pulse **[Patient]** (Paciente), complete la información básica del paciente.
2. Pulse **[Probe/Exam]** (Sonda/Examen).
3. Utilice la **[Trackball]** (Bola de seguimiento) y pulse la tecla **[Set]** (Definir) para seleccionar la sonda y el modo de examen.

2. Exploración



Las teclas de función ubicadas en la parte inferior de la pantalla se corresponden con el menú de software. Utilice la tecla **[Switch Mode]** (Cambiar modo) para cambiar de modo: pulse las teclas multifunción para ajustar los parámetros; utilice las teclas **[Menu Page Turning]** (Cambio de página de menú) para cambiar de página hacia arriba o hacia abajo.

Modo B

1. Pulse el botón **[B]** para acceder al modo B. 2. Gire el mando **[Gain & iTouch]** (Ganancia e iTouch) para ajustar la ganancia.

CDFI/Modo Power

1. Pulse el botón **[C]** para acceder al modo Color. 2. Mueva la **[Trackball]** (Bola de seguimiento) para cambiar la posición de la RDI.
3. Pulse **[Set]** (Definir) y, a continuación, mueva la **[Trackball]** (Bola de seguimiento) para cambiar el tamaño de la RDI, y pulse **[Set]** (Definir).

Modo PW/CW

1. Pulse el botón **[PW]** para acceder al modo PW.
2. Mueva la **[Trackball]** (Bola de seguimiento) para cambiar la posición del volumen de muestra.
3. Utilice el menú de software para cambiar el tamaño y el ángulo del volumen de muestra y pulse **[Update]** (Actualizar) o **[PW]** para obtener el Doppler de onda de impulso.

Modo Free Xros M (modo anatómico M [Opción]

1. En el modo B, haga clic en [Free Xros M] ubicado en el menú de la esquina superior izquierda de la pantalla.
2. Utilice la **[Trackball]** (Bola de seguimiento) para definir la posición de la línea de muestreo, y gire **[Angle]** (Ángulo) para cambiar el ángulo de la línea de muestreo.

Captura de imágenes Doppler de tejidos [Opción]

1. En el modo B con la sonda de matrices sincronizadas, pulse el botón **[TDI]** para acceder al modo TDI.
2. Utilice la **[Trackball]** (Bola de seguimiento) para cambiar la posición y el tamaño de la RDI.
3. Pulse el botón **[M]** para acceder al modo TVM; pulse el botón **[PW]** para acceder al modo TVD; pulse **[P]** para acceder al modo TEI.

Vista de iScape [Opción]

1. En el modo B, haga clic en [iScape View] (Vista de iScape) ubicado en el menú de la esquina superior izquierda de la pantalla.
2. Pulse **[Update]** (Actualizar) para iniciar la adquisición, pulse **[Freeze]** (Congelar) para detener la adquisición.

Captura de imágenes de Elasto [Opción]

1. Ubique la región en el modo B y, a continuación, haga clic en la opción [Elasto] ubicada en el menú de la esquina superior izquierda de la pantalla.
2. Ajuste la RDI en función de la situación real.
3. Ajuste los parámetros de imagen para obtener la imagen optimizada y la información necesaria.

Captura de imágenes por contraste [Opción]

1. Seleccione la sonda C5-1s y realice la captura de imágenes 2D para obtener la imagen de destino y, a continuación, mantenga fija la sonda.
2. Haga clic en la opción [Contrast Imaging] (Captura de imágenes por contraste) ubicada en el menú de la esquina superior izquierda de la pantalla para acceder al modo, inyecte el agente de contraste y ajuste el temporizador.
3. Observe la imagen de los tejidos para encontrar la vista de destino.

3. Medición

1. Pulse **[Measure]/[Caliper]** (Medida/Calibre) para acceder al estado de medición de la aplicación.
2. Para elegir una herramienta de medida, mueva el cursor y, a continuación, vaya a la posición deseada para medir.

4. Postexploración

Comentarios y referencias corporales

Comentario

Pulse **[Comment]** (Comentario) para elegir la posición de configuración del comentario y añadirlo después a la imagen.

Referencia corporal

1. Pulse **[Body Mark]** (Ref corp) y utilice el **[Cursor]** y la bola de seguimiento para seleccionar la referencia que desee. Pulse **[Set]** (Definir) para confirmar la adición que se resaltará con un marco verde en la parte inferior izquierda de la imagen.
2. Mueva la **[Trackball]** (Bola de seguimiento) para colocar la marca de la sonda y gire **[Angle]** (Ángulo) para ajustar la orientación de la sonda.

Guardar imágenes o cine

1. Pulse **[Save]** (Guardar) o **[P1]**, de acuerdo con las indicaciones del menú de software, para guardar una imagen de fotograma único o un archivo de cine en el sistema.
2. Pulse **[Review]** (Revisar) o seleccione un examen de un paciente en la pantalla **[iStation]**, y haga clic en **[Review]** (Revisar) para ver la imagen o el archivo de cine.

Informes e impresión

1. Pulse **[Report]** (Informe), mueva el cursor al cuadro de texto del comentario e introduzca el texto.
2. Haga en [Add Picture] (Agregar imagen) en la página de informes para añadir imágenes, haga clic en [Preview] (Vista previa) para acceder a la vista previa del informe y, a continuación, haga clic en [Print] (Imprimir) para imprimir el informe.

Fin exam

Pulse **[Fin exam]** para finalizar una exploración. Puede comenzar una nueva exploración repitiendo las instrucciones anteriores.

5. Administración de imágenes

Transferencia de imagen:

1. Pulse **[iStation]** para acceder al sistema de gestión de imágenes y elija las imágenes.
2. Haga clic en el botón de envío para enviar las imágenes a un dispositivo USB o DICOM, etc.

Nota: para obtener información más detallada, consulte el manual del operador.

N.º de referencia: 046-006246-00 (V1.0)