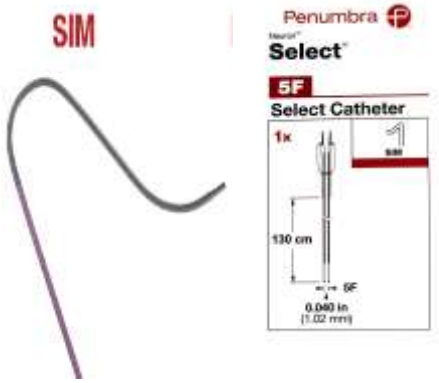
Penumbra	**FICHA TÉCNICA**

1. REFERENCIA: PNS5F130SIM	
	
2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre comercial	Cateter de Selección 5F Neuron – 130CM Simmons
Fabricante	Penumbra, Inc
Marca	Penumbra
Distribuidor	Compañía de Representaciones Medicas - CTP MEDICA S. A
Descripción	Es un catéter de una sola luz, con refuerzo trenzado, hipotubo y de rigidez variable, cuenta con un extremo distal radiopaco y un conector luer en el extremo proximal. **Longitud de Trabajo:** 130 cm, **Zona Flexible Distal:** 9 cm **Diámetro Distal:** 5fr, **Diámetro Proximal:** 5.5fr **Diámetro Interno:** 0.040” **Punta:** Simmons
Registro Sanitario	2012DM-0008855 Vence**:** 20 Junio 2022
Vida útil	3 años
Clasificación de riesgo	III
Factor de Empaque	Unidad Estéril
Numero de usos	Un solo uso por paciente
Método de Esterilización	Oxido de Etileno
3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES	
Catéter de poliamida termoplástica transparente, acero inoxidable, poliolefina y PTFE. El catéter viene dentro de un tubo protector de polietileno de alta densidad, que luego se coloca en una bolsa de PET, sellada térmicamente para mantener la esterilidad.	
4. INDICACIONES Y USOS	
Los catéteres Penumbra Select permiten la entrega primaria de nuestros dispositivos de acceso, facilitando la colocación rápida y atraumática a la posición final sin necesidad de un intercambio de guía. Permite la selección fácil del arco aórtico, y la colocación final inmediata. Facilita la	

colocación atraumática en la vasculatura distal. Se puede utilizar para angiografía de diagnostico por su lumen 0,040 ". Compatible con catéter Neuron 070 de 105 cm y catéter Benchmark de 105 cm.
Compatible con guia 0,014" hasta 0,038"

5. PRECAUCIONES

- El dispositivo esta indicado para un solo uso. No lo reesterilice o reutilice.
- No use dispositivos dañados o acodados.
- No utilice el dispositivo si el empaque se encuentra abierto o dañado.
- Utilícelo antes de la fecha de vencimiento.
- Use el sistema de acceso intracraneal junto con visualización fluoroscópica
- Mantenga infusión continua con una solución de lavado adecuada
- Si se restringe el flujo a través del dispositivo, no intente despejar la luz con infusión. Retire y sustituya el dispositivo.

6. CONTRAINDICACIONES

No existen contraindicaciones conocidas

7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: No aplica
Contacto con los ojos: No aplica
Ingestión: No aplica

8. ALMACENAMIENTO

Conservar en su empaque original, almacenar en lugar limpio, seco y fresco a temperatura entre 15°C y 25°C.
.

9. MANEJO DE DESECHOS

Disponer de acuerdo con las regulaciones legales, Decreto 2676/00 y Resolución 1164/02 sobre manejo de residuos hospitalarios.

10. REGULACIONES

FDA, CE MARK E INVIMA

11. RECOMENDACIONES DE USO

- Selección el cateter de tamaño adecuado según la anatomia y longitud requerida.
- El cateter Select tiene disponible una variedad de puntas para manejo de diferentes tipos de anatomia, se elegira según cada caso.
- Retire con cuidado el cateter y la tarjeta de la bolsa.
- Inserte el cateter Neuron Select 130 cm en el cateter Neuron 070 o Benchmark de 105 cm y haga avanzar el Select hasta la punta distal del Neuron.
- Inserte a traves de la vasculatura el sistema Neuron y Select simultaneamente, y haga avanzar el select a una distancia de 5 a 6 cm de la punta del Neuron, seleccione el vaso adecuado con el cateter Select.
- Despues de conseguir el acceso al vaso deseado con el cateter Select, haga avanzar el

Neuron sobre el select.
- Retire el cateter Select y reemplace por una guia 0,035” y avance el neuron hasta el sitio deseado.

12. VENTAJAS

- Procedimientos más rápidos y eficientes
- Elimina el intercambio de guía porque es útil para angiogramas diagnósticos gracias a su lumen de 0,040".
- Transiciones atraumáticas sin costuras en el segmento que se une con la punta del cateter Neuron 070 o cateter Bencharck, según sea el caso.

CTP MEDICA

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA COLOMBIA
KM 1.5 Siberia Cota, Parque empresarial Potrero Chico, San Miguel 6 A. Cota – COLOMBIA
Tel: +57 1 8773979
info@ctpmedica.com