
INNOVID
Life Innovations

## Ficha Técnica

| Código – Referencia | |
|---|---|
| **NEBS41221-G** | |
| Edición | 3 |
| Fecha | 2024-03-08 |

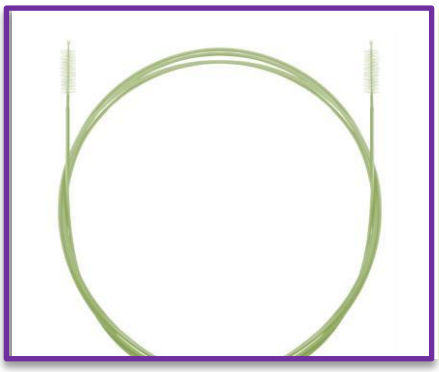

# Cepillos de Limpieza

### Descripción

Cepillos de Limpieza para un solo uso, no estériles, con cepillos en ambos extremos, para utilizar con endoscopios flexibles. Elevada seguridad higiénica gracias a los cepillos en ambos extremos y por ser de un solo uso, Puntas redondeadas para evitar daños en el endoscopio

### Caracteristicas

**NEBS41221-G** Cepillo de Limpieza doble punta, para canales de trabajo (Long: 230cm, Diam: 7mm) Longitud de las cerdas de los cepillos 20 ml y 40 ml, espiral de acero inoxidable. Las cerdas y el vástago de los cepillos de limpieza están fabricados con plásticos de alta calidad. Color verde

### Almacenamiento

Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso de objetos que afecten su integridad y su esterilidad. No Almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor

**Marca:**
Endo-Flex

**País de Fabricación:**

Alemania

**Registro INVIMA:**

2015DM-0013461

### Prueba funcional

Los dispositivos médicos deben ser revisados antes de su uso con respecto a los siguientes aspectos:

- Fecha de caducidad
- Embalaje en buen estado
- Que no hallan daños en el producto (fisuras, torceduras, deformaciones)

### Presentación

Individual. Unidad de Empaque: Caja por 25 unidades

ENDO-FLEX®
MANUFACTURED FOR LIFE

INNOVID
Life Innovations
Cl. 49 N° 13 – 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 - (601)7910502
info@innovid.com.co
WWW.INNOVID.COM.CO

## Especificaciones

Diseño de Cepillo Universal que garantiza la limpieza de toda la gama de canales endoscópicos; Punta redondeada del cepillo que mejora el paso a través del canal del alcance y protege el canal de daños;
Cepillo de doble punta disponible para utilizar dos cepillos de limpieza con un paso de catéter; Excelente relación precio-rendimiento.

Los cepillos de limpieza combinan rendimiento y cumplimiento en una solución eficiente y rentable. Los cepillos de limpieza largos cuentan con cerdas específicas en el cabezal del cepillo para evitar daños en el canal de trabajo y el cilindro de succión y aire y agua durante el paso repetido del dispositivo. Se utilizan rizos de alta resistencia para unir el cabezal del cepillo al catéter flexible, lo que reduce el riesgo de desprendimiento del cabezal del cepillo. El material ofrece la cantidad correcta de resistencia en columna mientras permanece lo suficientemente flexible como para navegar un telescopio en espiral durante la limpieza. Disponible en kits combinados, la gama de cepillos presenta.

**Vida Útil:**

La vida útil del producto suele ser de 3 años a partir de la fecha de fabricación en condiciones normales

**Precauciones:**

Se recomienda el uso sólo por personal calificado. Evite tocar las cerdas del cepillo sin guantes y con sus dedos, lo puede contaminar o si está en uso se puede generar alergias cutáneas.

Producto no estéril

**Observaciones:**

Ninguna

## Instrucciones de Uso

1. Enjuagar y cepillar el canal de trabajo del endoscopio comenzando en el cuerpo de control y avanzando hasta el extremo distal para retirar todos los residuos orgánicos (por ejemplo, sangre, tejidos) El cepillado debe realizarse en inyecciones axiales iguales bajo un aclarado permanente con el producto de limpieza autorizado para el tratamiento validado de los endoscopios. A este respecto, es esencial respetar las instrucciones del fabricante.

2. Desechar el cepillo inmediatamente después de la limpieza, de acuerdo a protocolo de la Institución.

ENDO-FLEX®
MANUFACTURED FOR LIFE

Cl. 49 N° 13 – 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 - (601)7910502
info@innovid.com.co
WWW.INNOVID.COM.CO

| | |
|---|---|
| REF | Símbolo para "Número de artículo" |
| LOT | Icono "Código de lote" |
| | Icono de "fabricante" |
| | Icono "Fecha de fabricación" |
| | Símbolo para "observar las instrucciones de uso" |
| STERILE EO | Símbolo de "esterilizado con óxido de etileno" |
| | Icono de no reutilizar |
| | No reesterilizar icono |
| | No usar si el paquete está dañado símbolo |
| | Usar por icono |
| | Mantenga el icono seco |
| | Proteger del símbolo de la luz solar |
| | icono de precaución |

ENDO-FLEX®
MANUFACTURED FOR LIFE

Cl. 49 N° 13 – 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 - (601)7910502
info@innovid.com.co
WWW.INNOVID.COM.CO