
INNOVID
Life Innovations

Ficha Técnica	Código – Referencia	
	STENT - PE200	
	Edición	1
	Fecha	2021-12-5

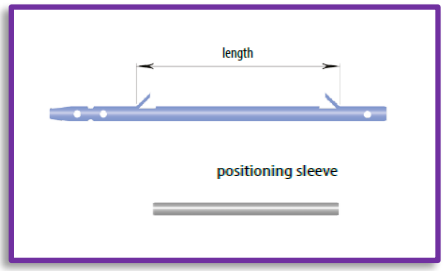

Stents Plásticos Biliares

Marca:
Endo-Flex

País de Fabricación:

Alemania

Registro INVIMA:

2017DM-0015816

Descripción

Un **stent** (endoprótesis) es un pequeño tubo de plástico que se coloca a través de la obstrucción en el conducto. Este pequeño tubo mantiene el conducto abierto para permitir la descarga de bilis al intestino delgado. Estos procedimientos pueden realizarse como parte de un procedimiento de colangiografía, como ERCP o PTC o, en algunos casos, durante la cirugía. Se realizan a menudo para ayudar a aliviar o prevenir los síntomas de cánceres más avanzados, aunque también se pueden realizar para ayudar a aliviar la ictericia antes de llevar a cabo una cirugía potencialmente curativa.

Características

PE200, Stent Biliar PE derecho 2 colgajos de un solo uso Fr.7, Fr. 8.5 Fr. 10.0 Fr. 11.5. Compatible con alambre guía .035". incluye introductor

Almacenamiento

Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso de objetos que afecten su integridad y su esterilidad

Materiales de Composición

RESINA, NYLON, POLIESTER AMIDA, POLIAMINA, ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO, POLICARBONATO, TITANIO, TANTALIO.

Presentación

Individual. Unidad de Empaque: Caja por 10 unidad

ENDO-FLEX®
MANUFACTURED FOR LIFE

INNOVID
Life Innovations
Cl. 49 N° 13 – 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 - (601)7910502
info@innovid.com.co
WWW.INNOVID.COM.CO

Especificaciones

Actualmente existen dos tipos de stent utilizadas en el manejo de las estenosis de la vía biliar: Las prótesis plásticas (PP), las cuales fueron desarrolladas inicialmente como tubos simples de polietileno para su posicionamiento en la vía biliar con el fin de permitir el drenaje de la bilis.

Estos dispositivos han sufrido ciertas modificaciones como orificios laterales que optimizan el drenaje y flaps que evitan la migración; sin embargo, las PP han mostrado tener problemas de permeabilidad a largo plazo, por el desarrollo de una biopelícula bacteriana que lleva a la oclusión de la prótesis en un tiempo aproximado de 3 meses cuando se usan diámetros de 10-11,5 Fr.

Vida Útil:

La vida útil del producto suele ser de 3 años a partir de la fecha de fabricación en condiciones normales

Precauciones:

Se recomienda el uso sólo por personal calificado

Observaciones:

¡No almacene los instrumentos cerca de productos químicos, desinfectantes o radiación radiactiva!

Instrucciones de Uso

Un stent biliar es un tubo delgado, de metal o plástico que se coloca en el conducto biliar para mantenerlo abierto y permitir que la bilis fluya hacia el intestino. El stent se puede colocar de dos formas:

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE):

1. Se introduce el endoscopio, en la boca y se mueve lentamente por la garganta, a través del estómago y hasta el intestino.

2. Una vez que llega al área de donde debe fluir la bilis, se inyecta tinte.

3. El tinte se puede ver mediante una radiografía y le mostrará al médico qué áreas están bloqueadas. Una vez que se encuentra una obstrucción, se usa un endoscopio para colocar un stent dentro del conducto biliar.

Colangiografía transhepática percutánea (CTP):

1. la CTP se realiza a través de una aguja que se inserta a través del abdomen hasta el hígado.

2. Se inyecta un tinte para identificar el conducto bloqueado.

Cl. 49 N° 13 – 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 - (601)7910502
info@innovid.com.co
WWW.INNOVID.COM.CO

3. Una vez localizado, el médico pasa un pequeño tubo a través de la aguja hasta el conducto biliar. Luego, empuja el stent a través del tubo y dentro del conducto.

4. Recibirá anestesia y estará dormido durante el procedimiento. Los stents biliares generalmente se colocan durante un procedimiento ambulatorio, lo que significa que se irá a casa después de pasar un tiempo en la sala de recuperación. Los stents biliares deben reemplazarse cada 3 a 6 meses, o con más frecuencia si el stent se bloquea o se inflama (colangitis).

Características

Stent Biliar plastico: derecho, de dos colgajos, blando, incluido manguito de posicionamiento; radiopaco.

	diameter			
length	Fr. 7.0	Fr. 8.5	Fr. 10.0	Fr. 11.5
3 cm	PE 200 07003	PE 200 08003	PE 200 10003	PE 200 11003
4 cm	PE 200 07004	PE 200 08004	PE 200 10004	PE 200 11004
5 cm	PE 200 07005	PE 200 08005	PE 200 10005	PE 200 11005
6 cm	PE 200 07006	PE 200 08006	PE 200 10006	PE 200 11006
7 cm	PE 200 07007	PE 200 08007	PE 200 10007	PE 200 11007
8 cm	PE 200 07008	PE 200 08008	PE 200 10008	PE 200 11008
9 cm	PE 200 07009	PE 200 08009	PE 200 10009	PE 200 11009
10 cm	PE 200 07010	PE 200 08010	PE 200 10010	PE 200 11010
11 cm	PE 200 07011	PE 200 08011	PE 200 10011	PE 200 11011
12 cm	PE 200 07012	PE 200 08012	PE 200 10012	PE 200 11012
13 cm	PE 200 07013	PE 200 08013	PE 200 10013	PE 200 11013
14 cm	PE 200 07014	PE 200 08014	PE 200 10014	PE 200 11014
15 cm	PE 200 07015	PE 200 08015	PE 200 10015	PE 200 11015

Presentación	Empaque sellado					
Tipo de Dispositivo	Descartable	X	Reusable		Clasificación	IIa

ENDO-FLEX®
MANUFACTURED FOR LIFE

Cl. 49 N° 13 – 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 - (601)7910502
info@innovid.com.co
WWW.INNOVID.COM.CO