
INNOVID
Life Innovations

| Ficha Técnica | Código – Referencia | |
|---|---|---|
| | STENT - PE200 | |
| | Edición | 1 |
| | Fecha | 2021-12-5 |

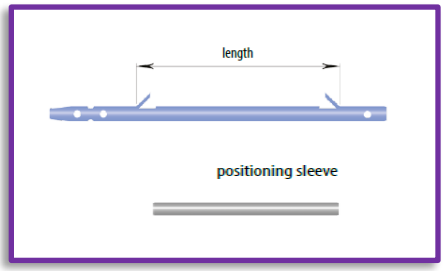


# Stents Plásticos Biliares

**Marca:**
Endo-Flex

**País de Fabricación:**

Alemania

**Registro INVIMA:**

2017DM-0015816

## Descripción

Un **stent** (endoprótesis) es un pequeño tubo de plástico que se coloca a través de la obstrucción en el conducto. Este pequeño tubo mantiene el conducto abierto para permitir la descarga de bilis al intestino delgado. Estos procedimientos pueden realizarse como parte de un procedimiento de colangiografía, como ERCP o PTC o, en algunos casos, durante la cirugía. Se realizan a menudo para ayudar a aliviar o prevenir los síntomas de cánceres más avanzados, aunque también se pueden realizar para ayudar a aliviar la ictericia antes de llevar a cabo una cirugía potencialmente curativa.

## Características

**PE200,** Stent Biliar PE derecho 2 colgajos de un solo uso Fr.7, Fr. 8.5 Fr. 10.0 Fr. 11.5. Compatible con alambre guía .035". incluye introductor

## Almacenamiento

Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso de objetos que afecten su integridad y su esterilidad

## Materiales de Composición

RESINA, NYLON, POLIESTER AMIDA, POLIAMINA, ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO, POLICARBONATO, TITANIO, TANTALIO.

## Presentación

Individual. Unidad de Empaque: Caja por 10 unidad

ENDO-FLEX®
MANUFACTURED FOR LIFE

INNOVID
Life Innovations
Cl. 49 N° 13 – 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 - (601)7910502
info@innovid.com.co
WWW.INNOVID.COM.CO

## Especificaciones

Actualmente existen dos tipos de stent utilizadas en el manejo de las estenosis de la vía biliar: Las prótesis plásticas (PP), las cuales fueron desarrolladas inicialmente como tubos simples de polietileno para su posicionamiento en la vía biliar con el fin de permitir el drenaje de la bilis.

Estos dispositivos han sufrido ciertas modificaciones como orificios laterales que optimizan el drenaje y flaps que evitan la migración; sin embargo, las PP han mostrado tener problemas de permeabilidad a largo plazo, por el desarrollo de una biopelícula bacteriana que lleva a la oclusión de la prótesis en un tiempo aproximado de 3 meses cuando se usan diámetros de 10-11,5 Fr.

**Vida Útil:**

La vida útil del producto suele ser de 3 años a partir de la fecha de fabricación en condiciones normales

**Precauciones:**

Se recomienda el uso sólo por personal calificado

**Observaciones:**

¡No almacene los instrumentos cerca de productos químicos, desinfectantes o radiación radiactiva!

## Instrucciones de Uso

Un stent biliar es un tubo delgado, de metal o plástico que se coloca en el conducto biliar para mantenerlo abierto y permitir que la bilis fluya hacia el intestino. El stent se puede colocar de dos formas:

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE):

1. Se introduce el endoscopio, en la boca y se mueve lentamente por la garganta, a través del estómago y hasta el intestino.

2. Una vez que llega al área de donde debe fluir la bilis, se inyecta tinte.

3. El tinte se puede ver mediante una radiografía y le mostrará al médico qué áreas están bloqueadas. Una vez que se encuentra una obstrucción, se usa un endoscopio para colocar un stent dentro del conducto biliar.

Colangiografía transhepática percutánea (CTP):

1. la CTP se realiza a través de una aguja que se inserta a través del abdomen hasta el hígado.

2. Se inyecta un tinte para identificar el conducto bloqueado.

Cl. 49 N° 13 – 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 - (601)7910502
info@innovid.com.co
WWW.INNOVID.COM.CO

3. Una vez localizado, el médico pasa un pequeño tubo a través de la aguja hasta el conducto biliar. Luego, empuja el stent a través del tubo y dentro del conducto.

4. Recibirá anestesia y estará dormido durante el procedimiento. Los stents biliares generalmente se colocan durante un procedimiento ambulatorio, lo que significa que se irá a casa después de pasar un tiempo en la sala de recuperación. Los stents biliares deben reemplazarse cada 3 a 6 meses, o con más frecuencia si el stent se bloquea o se inflama (colangitis).

## Características

Stent Biliar plastico: derecho, de dos colgajos, blando, incluido manguito de posicionamiento; radiopaco.

| | diameter | | | |
|---|---|---|---|---|
| length | Fr. 7.0 | Fr. 8.5 | Fr. 10.0 | Fr. 11.5 |
| 3 cm | PE 200 07003 | PE 200 08003 | PE 200 10003 | PE 200 11003 |
| 4 cm | PE 200 07004 | PE 200 08004 | PE 200 10004 | PE 200 11004 |
| 5 cm | PE 200 07005 | PE 200 08005 | PE 200 10005 | PE 200 11005 |
| 6 cm | PE 200 07006 | PE 200 08006 | PE 200 10006 | PE 200 11006 |
| 7 cm | PE 200 07007 | PE 200 08007 | PE 200 10007 | PE 200 11007 |
| 8 cm | PE 200 07008 | PE 200 08008 | PE 200 10008 | PE 200 11008 |
| 9 cm | PE 200 07009 | PE 200 08009 | PE 200 10009 | PE 200 11009 |
| 10 cm | PE 200 07010 | PE 200 08010 | PE 200 10010 | PE 200 11010 |
| 11 cm | PE 200 07011 | PE 200 08011 | PE 200 10011 | PE 200 11011 |
| 12 cm | PE 200 07012 | PE 200 08012 | PE 200 10012 | PE 200 11012 |
| 13 cm | PE 200 07013 | PE 200 08013 | PE 200 10013 | PE 200 11013 |
| 14 cm | PE 200 07014 | PE 200 08014 | PE 200 10014 | PE 200 11014 |
| 15 cm | PE 200 07015 | PE 200 08015 | PE 200 10015 | PE 200 11015 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Presentación** | Empaque sellado | | | | | |
| **Tipo de Dispositivo** | Descartable | X | Reusable | | Clasificación | IIa |

ENDO-FLEX®
MANUFACTURED FOR LIFE

Cl. 49 N° 13 – 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 - (601)7910502
info@innovid.com.co
WWW.INNOVID.COM.CO