Ficha Técnica

Apósito Elect◇ Hydro Border Apósito Elect◇ Hydro Delgado Apósito hidrocoloide para heridas

Características

- Proporciona un ambiente húmedo para curar las heridas
- La película superior de poliuretano es una barrera bacteriana
- La película superior de poliuretano es resistente al agua
- Los apósitos son fáciles de aplicar y de quitar
- No es sensibilizante ni irritante
- Autoadhesivo
- Los apósitos se pueden utilizar hasta por 7 días, dependiendo del exudado del paciente
- Adaptable



Descripción

ELECT HYDRO son apósitos hidrocoloides absorbentes estériles, no irritantes, que consisten en una sola capa autoadhesiva recubierta con una película de carboximetilcelulosa. Están disponibles en dos variantes, Border y Thin, para heridas que tienen un exudado de ligero a moderado.

Indicaciones

- Úlceras por presión
- Úlceras en las piernas
- Úlceras en los pies por diabetes
- Heridas quirúrgicas
- Sitios de donantes
- Úlceras de pie diabético, incluyendo pequeñas quemaduras, abrasiones, cortes, laceraciones y granulaciones de heridas.

Contraindicaciones

- Heridas causada por quemaduras de espesor total
- Heridas infectadas clínicamente
- Pacientes con alergia conocida a los apósitos hidrocoloides

Instrucciones de uso


Los apósitos ELECT Hydro son fáciles de aplicar y de quitar.

- Limpie la herida con una solución salina o con un limpiador de heridas apropiado.
- Elija un vendaje lo suficientemente grande como para cubrir la herida con 2 cm de superposición en todos los lados de la herida.

Beneficios

- Fomenta la curación de las heridas
- Evita la contaminación externa o secundaria
- Permite ducharse al paciente
- Evita el trauma en el lecho de la herida y en los tejidos de granulación
- Adecuado para pacientes con piel sensible
- No se necesita fijación secundaria
- Lo que se traduce en menos cambios de apósito
- Fácil de utilizar y mejora la comodidad del paciente

Composición
Poliuretano y carboximetilcelulosa

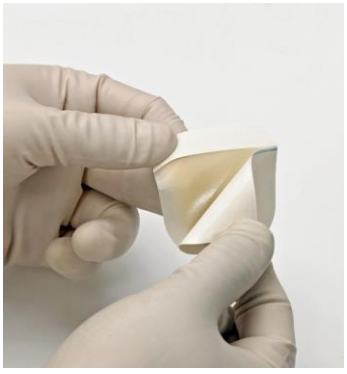

Retire el papel del respaldo para exponer la superficie adhesiva



Centre el apósito sobre la herida, presione suavemente el lado adhesivo hacia abajo y presione desde el centro hacia afuera



Apósito Elect◊ Hydro Borde
Apósito Elect◊ Hydro Delgado

Para retirarlo:

1. Presione hacia abajo sobre la piel y levante con cuidado el apósito empezando en un borde.
2. Remueva hacia el centro de la herida hasta que retire el apósito.
3. Limpie la herida con solución salina o con un limpiador de heridas apropiado, si es necesario.

Presentación

Apósitos ELECT HYDRO Border

Código Producto	Medida	Unidades / Envase
53HYB0505	5x5 cm	20
53HYB1010	10 cm x 10 cm	10
53HYB0812	8 cm x 12 cm	10
53HYB1515	15 cm x 15 cm	10
53HYB2020	20 cm X 20 cm	10

Apósitos ELECT HYDRO Thin

Código Producto	Medida	Unidades / Envase
53HYT0505	5 cm x 5 cm	20
53HYT1010	10 cm x 10 cm	10
53HYT1515	15 cm x 15 cm	10
53HYT2020	20 cm X 20 cm	10

Re. San.: INVIMA 2018DM- 0017702

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

◊Marca registrada
Smith&Nephew