Ordenes & Suministros	**FICHA TÉCNICA** **BOLSA POST. OP 70 MM**	Coloplast

Bolsa Coloplast Pop 70mm

Bolsa drenable de Ostomía 70MM



- **Descripción:**

Dispositivo de ostomía formado por una bolsa abierta con cierre Hide Away y un clipper que asegura la unión entre la barrera y la bolsa. Creado en 1993, el diseño de la bolsa (Alterna Free) combina protección, discreción y confort para el usuario.

- **Composición del Producto:**

Bolsa: La bolsa recolectora está hecha de un suave material “libre de susurros” y a prueba de olor. Tiene una película de 5 capas, que consiste en: ✓ EVA (Etileno Vinylacetat)

- ✓ EVA
- ✓ PVDC (Polyvinyllidenchlorid) ✓ EVA ✓ EVA.


Las capas de EVA hacen posible soldar la bolsa en conjunto, y la capa de PVDC hace que la bolsa sea a prueba de olor.

Clipper: Polipropileno.

Filtro: El filtro consiste en un paquete de filtro y un paquete de espuma. El paquete de espuma incluye una película de PE perforada y la propia espuma. La espuma es una especie de "pre-filtro" que protege el carbón. El paquete de filtro incluye el carbón activado y una membrana de teflón. El carbón está cubierto por una película de PE en la que hay un agujero (donde entra el aire al filtro). La membrana de teflón cubre el agujero con el fin de evitar que las heces y la humedad entren en el filtro. El filtro también tiene un agujero donde el gas purificado sale.

- **Características y Acciones del Producto**

  - Nuevo sistema de vaciado integrado en bolsas abiertas Hide-away: La bolsa abierta con salida Hide-away consta de los siguientes componentes: Las orejas (aletas de gancho), la placa de velcro y la espuma de vaciado están pegados a la película de la bolsa con un adhesivo a base de caucho.

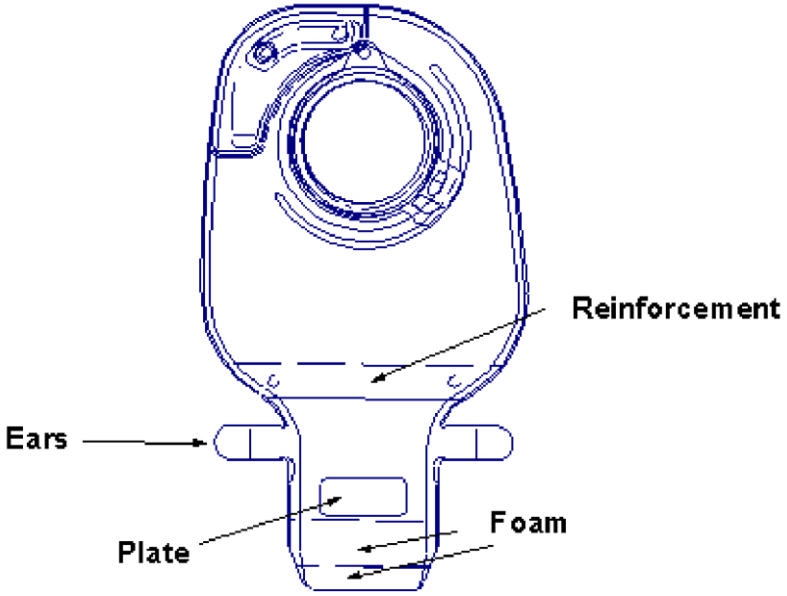

  - **Espuma (Foam)**
    La espuma es del mismo tipo de nuestros clips suaves. La espuma está hecha de PE (polietileno). Las células de la espuma están cerradas, y por lo tanto la espuma no es capaz de absorber la humedad. Sin embargo, puede decolorarse con el tiempo cuando constantemente está expuesta a la salida de heces, dependiendo de la agresividad éstas. El propósito de la espuma es para sellar la abertura y proporcionar un apretado y seguro cierre de la salida. Además, la espuma hace que la salida sea más firme, lo que hace que sea más fácil para controlar el vaciado y la limpieza de la salida sea más higiénica.

  - **Orejas (Ears – aletas de gancho)**
    Las orejas están hechas de PP blanco (polipropileno). Las orejas gancho se cierran sobre la placa y proporcionan junto con la espuma un cierre seguro de la salida.

- **Placa (Plate – Velcro)**
  La placa está hecha de PA opaco (poliamida). Cuando la placa se expone a la humedad, absorbe parte de la misma. Sin embargo, puede ser secada con un trozo de papel / toalla, y funciona así como cuando está seco.

- **Película de refuerzo (capa anterior y posterior protectora)** Con el fin de hacer un frente suave y fuerte para apoyar la función de plegado hacia arriba del cierre Hide-Away, una parte de la película de la bolsa está soldada a la parte delantera blanda. Otra película cubre la parte de atrás de la bolsa, para proteger la piel del plástico.

- **Bolsas transparentes**
  Con el fin de hacer posible plegar el cierre Hide-Away en las bolsas transparentes, una pieza extra de la película de la bolsa se suelda a la parte inferior de las bolsas.

- Diseño anatómico, que proporciona la máxima adaptabilidad al contorno corporal.

- La capacidad es máxima en la parte inferior de la bolsa sin que se desperdicien espacios inútiles en la parte superior de las bolsas, además, de un extremo amplio para el vaciado

- Cierre hermético entre la barrera y la bolsa, también cuenta con un Clip que proporciona doble seguridad en la unión entre la bolsa y el disco. Es muy cómodo y fácil de manejar

Indicaciones

- Pacientes ostomizados
- Ileostomías
- Colostomías

Instrucciones de Uso

1. Limpie la piel con agua templada, evite usar jabón si no es absolutamente necesario

2. Seque la piel cuidadosamente

3. Mida el estoma (usando la guía) y calque esta medida en el disco adhesivo, a continuación recorte

4. Retire el papel protector de la barrera y colóquela en su sitio

5. Firmemente presione el adhesivo de la barrera a la piel periostomal

6. Asegúrese que el clip de seguridad de la bolsa esté abierto. Presione juntos el aro de la bolsa con el reborde de la barrera, con los dedos haga movimientos de abajo para arriba hasta que escuche un pequeño clic

7. Encaje o cierre el clip de seguridad, cuando escuche el clic la bolsa estará firmemente unida a la barrera

8. Doble la aleta móvil final del sistema de vaciado hacia adelante, y doble 2 veces más hacia adelante hasta encontrar el velcro, afronte las orejas al centro del velcro y adhiéralas.

- **Presentaciones**
    - Diámetros: 70mm. Bolsas compatibles con barreras de ostomía Coloplast POP 70mm
    - Referencias:Bolsa opaca: 10367
    - Caja: por 10 unidades

- **Almacenamiento**
    - En lugar fresco, seco y limpio
    - Protegido de la luz y con humedad relativa menor a 60%

- Temperatura entre 5 a 25 °C

- **Datos de Interés General**
  - Fabricante: COLOPLAST A/S
  - Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
  - País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
  - Registro Sanitario Invima No. 2017DM-0000362-R1 vigente hasta 02/11/2027
  - Tipo de Dispositivo: No invasivo
  - Clasificación de Riesgo: I
  - Vida útil: 3 años