
TALLIMETRO PORTATIL – AVANUTRI REF: AVA-312

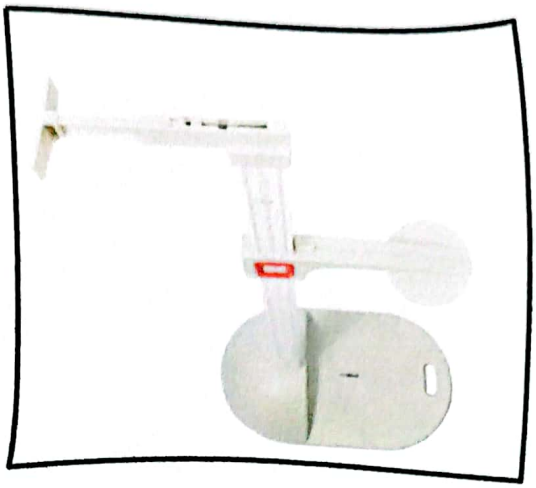

DESCRIPCIÓN

- Base grande (23,5 X 13,5 cm) con diseño moderno con curvas redondeadas
- Nuevo medidor de altura (plano de Frankfurt) con punto de contacto y diseño con líneas suaves
- Indicador de lectura con tamaño ampliado para una fácil visualización de la altura
- Sistema de regla de medición con sistema de ajuste preciso y suave
- Estabilizador de regla exclusivo con diseño en "T" con ajuste de distancia que proporciona estabilización vertical y horizontal del equipo
- Textura en la base para facilitar la higiene
- Estandarización de colores (Base, medidor, regla y estabilizador) para cumplir con el nuevo concepto Avanutri
- Equipo probado y certificado por el Instituto de Metrología más importante de Brasil – IMI – INMETRO Peso 5 kg
- Dimensiones37 × 65 × 19 cm
- Marca: **AVANUTRI**

SKU: AL328001

Powered by CamScanner


2. - Enganche el estabilizador entre las reglas:



CÓMO TRANSPORTAR



3. - Por último, encaje el medidor en el compartimiento delantero, y deslice hacia atrás.

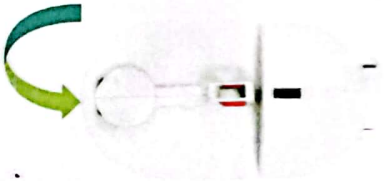

INSTRUCCIONES DE HIGIENIZACIÓN
Limpiar con un paño húmedo, no utilizar productos abrasivos.

GARANTÍA:
01 Año con cambio inmediato contra defectos de fabricación.

AVANUTRI
Equipos de Evaluación

AVANUTRI E NUTRIÇÃO SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.775.666/0001-60

RUA SÃO JOSE, 1304 - TRIÂNGULO -
TRÊS RIOS / RJ - CEP: 25.820-160
TELEFONE: +55 24 2252 2468
RESPONSABLE TÉCNICO: RODRIGO IZIDORO SANTANA
CRN-4: 6100815
EFA/ ANVISA: P217ML960215

Tallímetro Portátil Avanutri AVA-312




AVANUTRI Evaluation Equipments | www.avanutriequipments.com

Powered by CamScanner


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

VERSIÓN ESPAÑOLA

1- Después de retirar de la caja, desenganche las reglas comenzando por la parte inferior;

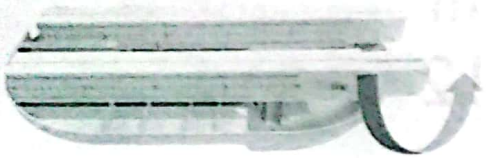

2- Retire todas las piezas;

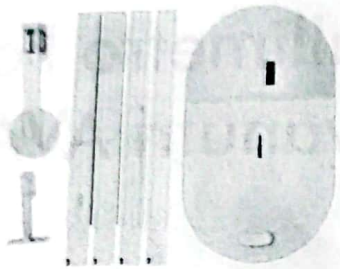


3- Enganche las reglas en la base en orden ascendente:

3.1 - Comience por la regla con el logotipo de Avanutri que empieza en la medida de 20cm;



3.2 - Enganche la segunda regla, que empieza en la medida de 61 cm y luego encaje la tercera regla que se inicia en la medida de 101cm;

4. - Enganche el medidor en la tercera regla;

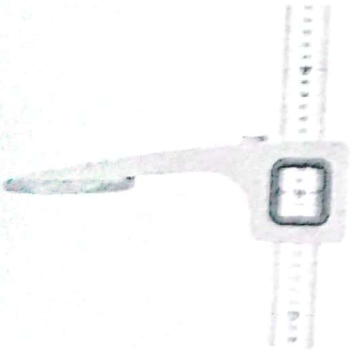

5. - A continuación, ajuste el estabilizador en la última regla que comienza con la medida de los 161cm de forma que se vuelva a la pared:



5.1 - Así, el estatorómetro portátil Avanutri AVA-312 quedará montado como en la figura al lado:



6. - Para realizar la medición, el paciente debe quedar ligeramente inclinado en la regla, con el cuerpo erguido, sin accesorios en el pelo, mirando hacia adelante y brazos hacia abajo;




6.1 - La lectura debe hacerse entre las flechas





INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE

Para desmontar su Estadiómetro Avanutri AVA-312, separe todas las piezas:

1. - Enganche las reglas en la base, comenzando por la parte superior y frotando liger hasta que esté trabada:

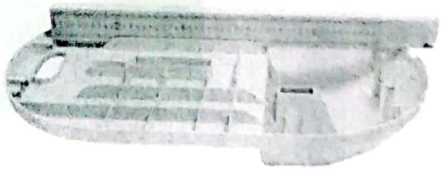

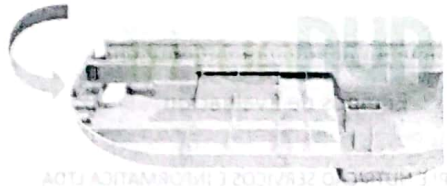

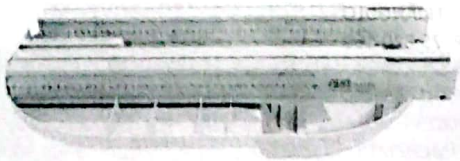

AVA NUTRI Evaluation Equipments www.avanutriequipments.com

Powered by CamScanner