

DETERGENTE **PRE-DESINFECTANTE** PARA **INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO**

Aniosyme X3

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO Y EQUIPAMIENTO DE ENDOSCOPIA PREVIO A LA ESTERILIZACIÓN

- Fórmula patentada
- Eficacia antimicrobiana optimizada desde los 5 minutos
- No corrosivo con los materiales



ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

REPROCESADO
DEL INSTRUMENTAL


Aniosyme X3

Limpieza y desinfección de instrumental médico-quirúrgico y equipamiento de endoscopia previo a la esterilización


CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- Complejo trienzimático
- Eficacia probada mediante DCP (*Degreasing Cleaning Power- Poder de Limpieza Desengrasante)
- pH neutro: compatible con aleaciones
- Ausencia de cloro: sin efecto corrosivo sobre los materiales
- Compatible con proceso de ultrasonidos
- Líquido azul claro
- pH en dilución (0,5%): con agua corriente: aproximadamente 7,5


INSTRUCCIONES DE USO

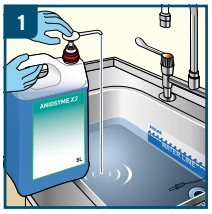


Solución concentrada de uso profesional. Utilizar mediante inmersión a una dilución adecuada respetando el tiempo de contacto.

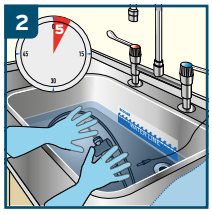

Sumerja totalmente el producto sanitario. Utilice un cepillo si lo cree necesario.

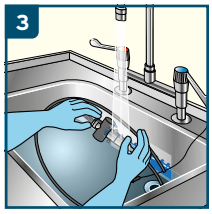

Aclare abundantemente el producto sanitario en agua del grifo y elimine así todos los residuos orgánicos del instrumental.

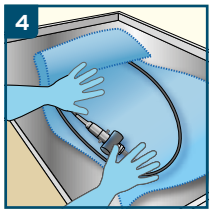

Reemplace la solución tan pronto como esté visiblemente sucia y al menos una vez al día para mantener la efectividad del producto.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

CONDICIONES	CONCENTRACIÓN	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida - Acorde con EN 13727 y EN 14561, en condiciones sucias	0,5%	5 min
Levaduricida - Acorde con EN 13624 y EN 14562, en condiciones sucias	0,5%	5 min
Eficacia frente a virus envueltos acorde con EN 14476/EN 17111, condiciones sucias	0,5%	7 min

EMBALAJE Y INFORMACIÓN DE PEDIDOS

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Aniosyme X3	12 x Envase de 1 L	3119820
Aniosyme X3	4 x Envases de 5 L con válvula de 25 ml	3119840

ÁREA DE APLICACIÓN

Limpieza y desinfección de instrumental médico-quirúrgico y equipamiento de endoscopia previo a la esterilización.

INSTRUCCIONES DE USO

Solución concentrada de uso profesional. Utilizar mediante inmersión a una dilución adecuada respetando el tiempo de contacto. Sumergir totalmente el producto sanitario. Cepillar si se observa suciedad visible. Aclarar abundantemente con agua para eliminar todos los residuos. Reemplace la solución tan pronto como esté visiblemente sucia y al menos una vez al día para mantener la efectividad del producto.

COMPOSICIÓN

Amonios cuaternarios, digluconato de clorhexidina, surfactantes no iónicos, complejo enzimático (proteasa, lipasa y amilasa), perfume, colorante y excipientes.

ALMACENAMIENTO


Peligroso- respetar las precauciones de uso (elaborado de acuerdo con las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos). Almacenar de 5ºC a 25ºC.

CERTIFICADOS

Producto sanitario. La actividad antimicrobiana completa se encuentra incluida en el dossier técnico de producto disponible baja demanda.

PRODUCTO SANITARIO. UTILIZAR CON PRECAUCIÓN

Por favor lea el etiquetado del producto para más información.

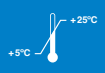

PARA USO PROFESIONAL.

LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France
0459

Distribuido por:
ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.
Avinguda del Baix Llobregat nºs. 3-5
Sant Joan Despí-08970

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

© 2022 Ecolab. All rights reserved. HC-IR-A.X3-5016-2-ES-1122

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20154986	**Nombre producto**	**ANIOSYME X3 - DETERGENTE PREDESINFECTACTE PREVIO DEL INSTUMENTAL**				
Registro Sanitario	INVIMA 2018DM-0019064	**Vencimiento**	2028/12/17	**Modalidad**	IMPORTAR Y VENDER	**Estado Registro**	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS						
Marcas	ANIOS						

Datos de Interes

Vida Util		**Miembros Comprometidos**	CUERPO HUMANONO
Usos	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS: INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS Y MÉDICOS, INSTRUMENTOS TERMOSENSIBLES Y MATERIAL DE ENDOSCOPIA, ANTES DE ESTERILIZACIÓN.	**Riesgo**	IIa

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
ENVASE DE 1L, ENVASE DE 5L.
ENVASE DE 25ML

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	SURGICON & CIA S.A.S	Centro Empresarial de Occidente Km 1 vía Siberia-Cota	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	info@surgicon.com.co
FABRICANTE	LABORATORIES ANIOS	1 RUE DE L'ESPOIR 59260 LEZENNES	FRANCIA			
IMPORTADOR	SURGICON & CIA S.A.S	Centro Empresarial de Occidente	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	info@surgicon.com.co

		Km 1 vía Siberia-Cota				
TITULAR REGISTRO SANITARIO	SURGICON & CIA S.A.S	Centro Empresarial de Occidente Km 1 vía Siberia-Cota	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	info@surgicon.com.co

Imprimir << Atras