Stratafix™ Portafolio
Lo mejor de dos mundos

Stratafix ofrece la eficiencia de la **técnica de cierre continua**, con la seguridad de la **técnica interrumpida**[1]



TM

ETHICON
PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

Stratafix™ Portafolio

el único dispositivo de cierre que ofrece


Stratafix™
KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE
Secure every pass.


- Anclas que se fijan en el tejido proporcionando múltiples puntos de estabilidad
- Diversos materiales y diseños de anclas indicados para cubrir sus necesidades en diferentes planos y tejidos
- Desempeño superior de agujas de Ethicon, líder mundial en cierre de heridas

STRATAFIX™ Symmetric™ PDS Plus


Dispositivo que ofrece un cierre fuerte y seguro indicado para áreas de alta tensión como la **fascia***[2]

Symmetric

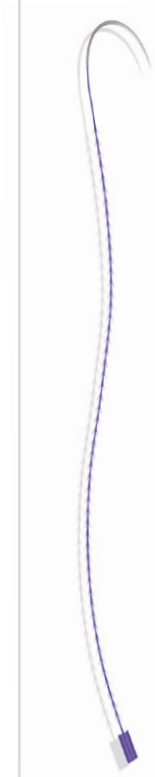

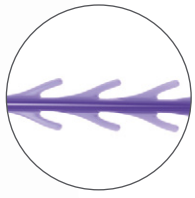

Anclas con patrón **simétrico** que mantienen la integridad del núcleo del dispositivo[2]

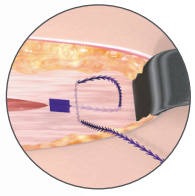

La **técnica** de cierre provee una fuerza superior de cierre al inicio de la herida comparado con una sutura tradicional de PDS® Antibacterial Plus (polydioxanona) con una anudada en torre[3]




El **único** dispositivo de cierre con tecnología antibacterial[2]

STRATAFIX™ Spiral


Dispositivos de cierre con un amplio rango en diseños unidireccionales y bidireccionales indicados para **piel, órganos y tejido** celular subcutáneo

Spiral




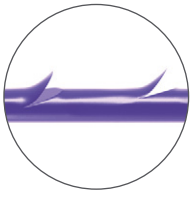

Anclas formadas a lo largo del dispositivo con patrón en **espiral**[4]

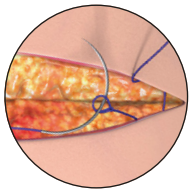

El diseño **unidireccional** tiene un loop ajustable al final de la hebra[2]

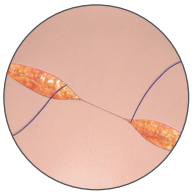

El diseño **bidireccional** permite el manejo de la tensión desde el medio de la insición[2]



Si todavía no tuvo la oportunidad de conocer los dispositivos Stratafix, solicite a su representante de ventas una demostración

Referencias: 1. Boutros S, Weinfeld AB, Friedman JD. Continuous versus interrupted suturing of traumatic lacerations: a time, cost, and complication rate comparison. J Trauma Injury Infect Crit Care. 2000;48(3):495-497. **2.** Data on file, Ethicon, Inc.: STRATAFIX Knotless Tissue Devices Matrix SFX-308-12. 2013 . **3.** Data on file Ethicon, Inc.: AST-2013-0603: Performance testing of STRATAFIX Symmetric PDS PlusSize 0 and 1 Devices- initiation strength in porcine tissue. **4.** Data on file, Ethicon, Inc.: STRATAFIX Spiral Unidirectional CAD Drawings.

059493-160902
©Johnson & Johnson de Colombia S.A., 2016.

Impreso en: 12/2016. Distribuido desde 12/2016 hasta 12/2017

En Argentina: Johnson & Johnson Medical S.A. Mendoza 1259. Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina. CP: C1428DJG En Caribe: Johnson & Johnson Medical Caribbean Suite 200, Office 2130 Street C #475 Guaynabo, PR 00969. En Chile: Johnson & Johnson de Chile S.A. Avenida Presidente Kennedy, 5454 – Piso 12. Vitacura. CP (7630586). Santiago – Chile – 1333. En Colombia: Johnson & Johnson de Colombia S.A. Yumbo - Valle. Colombia. En Costa Rica: Johnson & Johnson de Costa Rica, S.A. Oficentro La Virgen, Edificio B, Oficina 01. 100 mts Oeste de Faco la Uruca. San José, Costa Rica. En Republica Dominicana: Johnson & Johnson Republica Dominicana, SAS. Ave. John Kennedy #10. Edificio Perellano y Herrera. 3er. Piso, Sector Miraflores. Santo Domingo, Republica Dominicana. En Ecuador: Johnson & Johnson del Ecuador S.A. Edificio Corporativo II de la MZ 275 de Parque Empresarial Colon. Frente a Av. Rodríguez Chávez González, entre las urbanizaciones Urdesa Norte y Urdenor. Oficinas # 502, 504 5º piso. Zip code 170515. Guayaquil – Ecuador. En Guatemala: Johnson & Johnson Guatemala, S.A. 26 Avenida 5-90 Zona 11. Plaza Vía Majadas, 2do. Nivel Local No. 201. Parque Comercial Las Majadas Guatemala Ciudad 01011 - Guatemala – Guatemala. En Mexico: Johnson & Johnson de Mexico, S.A.de C.V. Javier Barros Sierra No .555, 1er Piso. Colonia Zedec - Santa Fe. Deleg. Alvaro Obregón, CP 01210 - Mexico D.F. – Mexico. Teléfono: 55-1105-8100. En Panama, El Salvador, Honduras y Nicarágua: Ethnor del Istmo, S.A. Complejo Business Park, entre Ave La Rotonda y Ave Principal, Edificio Sur, Piso 1, Costa del Este. Republic of Panama – Panama. PO Box 0835-00241. En Peru: Johnson & Johnson del Peru S.A. Av. Canaval y Moreyra, No. 480, Piso 9-13. San Isidro. Lima 27, Peru. En Puerto Rico: Johnson & Johnson Medical Caribbean. Suite 200. 475 Calle C. Guaynabo, PR 00969En Uruguay: Johnson & Johnson de Uruguay S.A. Edificio Art Carrasco Business. Av. Italia 7519 – Oficina 301. CP 11500 Montevideo-Uruguay. En Venezuela: Johnson & Johnson Medical, S.C.S. Avd. Rómulo Gallegos – Edf. Johnson & Johnson, Piso 8. Los Dos Caminos – 1071. Caracas, Venezuela. En Jamaica: Johnson & Johnson Jamaica. 30A Westminister Road. Kingston 10, Jamaica.

Volver al sitio de Ethicon →

Inicio / Product Code Search | Ethicon Product Center


ETHICON PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES | Shaping the future of surgery

SXPP1A404

Nombre del producto

STRATAFIX™ Symmetric PDS Plus Suture

Quick View	
Categoria de producto	Cierre de Heridas
Grupo de productos	Knotless Tissue Control Devices

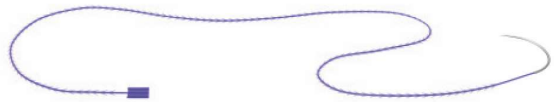Device image


Alternative Products	
Productos Alternativos	SXPP1A405, SXPP1A407

Additional Specifications	
Descripción	1 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CT-1
Marca	STRATAFIX™ Symmetric PDS Plus
Subcategoría	Suture
Tamaño de Sutura	1
Longitud	18in
Color	Violet
Controlar	No
Composición del material	Triclosan, Polydioxanone
Categoría	Cierre de Heridas
QTY / BX	12
Sanitary License	Uruguay 63484,Ecuador 1752-DME-0316,Colombia INVIMA 2015 DM -

0013800,Peru
DM10828E

©2020 Johnson & Johnson Medical Devices & Diagnostics Group – Latin America, L.L.C.

Email:
ethicon_latam@its.jnj.com
Por telefone: 0800 707 5420

Esta página es publicada por Johnson & Johnson Medical Devices & Diagnostics Group – Latin America, L.L.C. quien es enteramente responsable por su contenido. Es destinada a los profesionales de la salud de Latino América.

Carreras

Contacto

Información Legal

Instituto Ethicon

Política de Privacidad

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20094619	**Nombre producto**	**STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE - DISPOSITIVO DE CONTROL DE TEJIDO SIN NUDOS STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS**				
Registro Sanitario	INVIMA 2015DM-0013800	**Vencimiento**	2025/10/19	**Modalidad**	IMPORTAR Y VENDER	**Estado Registro**	Vigente
Observaciones	REFERENCIAS: STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS MEDIANTE RAD 20181215485 DEL 19 D EOCTUBRE DE 2018 SE APRUEBA CAMBIO DE INSERTO: ACTUALIZAR EL INSERTOS (IFU) QUE SE ENCUENTRA APROBADO EN EL REGISTRO SANITARIO INVIMA 2015DM-0013800, EXPEDIENTE 20094619, EN EL SENTIDO DE ELIMINAR EL TEXTO "USAR LOS ESTUDIOS DE LA ZONA DE INHIBICIÓN" EN LA SECCIÓN DE ACCIONES, QUEDANDO: ACCIONES DOS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DESCRIBEN EL RENDIMIENTO IN VIVO DE LOS DISPOSITIVOS ABSORBIBLES: EN PRIMER LUGAR, LA RETENCIÓN DE LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y EN SEGUNDO LUGAR, LA TASA DE ABSORCIÓN (PÉRDIDA DE MASA). EL DISPOSITIVO STRATAFIX™ SYMMETRIC PDS™ PLUS SE HA FORMULADO PARA REDUCIR AL MÍNIMO LA VARIABILIDAD DE ESTAS CARACTERÍSTICAS Y PARA PROPORCIONAR SOPORTE A LA HERIDA DURANTE UN PERIODO DE CICATRIZACIÓN PROLONGADO. LOS DATOS OBTENIDOS A PARTIR DE ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN EN ANIMALES DEMUESTRAN QUE EL DISPOSITIVO STRATAFIX™ SYMMETRIC PDS™ PLUS SE ABSORBE TOTALMENTE 210 DIAS DESPUES DE SU IMPLANTACION. LOS RESULTADOS DE ESTUDIOS DE IMPLANTACION INDICAN EL PORCENTAJE DE RESISTENCIA ORIGINAL RETENIDO (TABLA 3). TABLA 3. DIAS IMPLANTACION % DE RESISTENCIA ORIGINAL APROXIMADO RESTANTE 14 DIAS 75 % 28 DIAS 65 % 42 DIAS 55 % SE HA COMPROBADO QUE EL DISPOSITIVO STRATAFIX™ SYMMETRIC PDS™ PLUS CON IRGACARER* MP (TRICLOSAN) INHIBE LA COLONIZACIÓN DEL DISPOSITIVO POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS, STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS, S. AUREUS RESISTENTE A LA METICILINA, S. EPIDERMIDIS RESISTENTE A LA METICILINA, ESCHERICHIA COLI Y KLEBSIELLA PNEUMONIAE, QUE SON MICROORGANISMOS CONOCIDOS POR SU ASOCIACION CON INFECCIONES EN EL SITIO QUIRÚRGICO. LOS ESTUDIOS EN ANIMALES HAN DEMOSTRADO QUE EL DISPOSITIVO STRATAFIX™ SYMMETRIC PDS™ PLUS INHIBE LA COLONIZACIÓN BACTERIANA DEL DISPOSITIVO DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN DIRECTA IN VIVO CON BACTERIAS.						
Marcas	STRATAFIX, ETHICON						

Datos de Interes

Vida Util	5 AÑOS	**Miembros Comprometidos**	TEJIDOS
Usos	STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS ES UN DISPOSITIVO DE CONTROL DE TEJIDO SIN NUDOS, INDICADO PARA UNA APROXIMACIÓN GENERAL A TEJIDOS BLANDOS, DONDE EL USO DE SUTURAS ABSORBIBLES SEA EL APROPIADO. EL NUEVO DISPOSITIVO	**Riesgo**	III

	TIENE CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SIMILARES A LOS QUE YA SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO. STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS CONSISTEN EN UN MONOFILAMENTO ABSORBIBLE CON TEJIDO UNIDIRECCIONAL, CON UNA AGUJA QUIRÚRGICA EN UN EXTREMO Y UN TOPE DE FIJACIÓN EN EL OTRO. ESTO PERMITE LA APROXIMACIÓN AL TEJIDO SIN NECESIDAD DE AMARRAR NINGÚN NUDO QUIRÚRGICO.		

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
CAJA POR 12 UNIDADES.

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	1498448	OPEN MARKET LTDA.	Carrera 69 No. 21-63 Bodega 4 y 6	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	ariasfajardo@registrosencolombia.com
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2011074909	OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA - OPEN MARKET LTDA BODEGA DISCOVERY	CALLE 20 NO. 68 C - 57	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2021123144	OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA, SIGLA: OPEN	KILÓMETRO 0,7 VÍA DEL ROUND POINT DE SIBERIA, VÍA FUNZA, PARQU	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	TENJO	

			MARKET LTDA	E EMPRESARIAL SIBERIA BODEGAS 12 Y 13.				
FABRICANTE	Consecutivo	20120 63561	ETHICON INC.	Calle Durango No. 2751. Ciudad Juarez. Lote Bravo. Chihuahua, México. CP 32575	MEXICO			ariasfajardo@registrosencolombia.com
IMPORTADOR	Nit	89010 18159	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	Calle 15 N. 31-146 Acopi	COLOMBIA	VALLE	YUMBO	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Nit	89010 18159	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	Calle 15 N. 31-146 Acopi	COLOMBIA	VALLE	YUMBO	

Imprimir << Atras