


IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

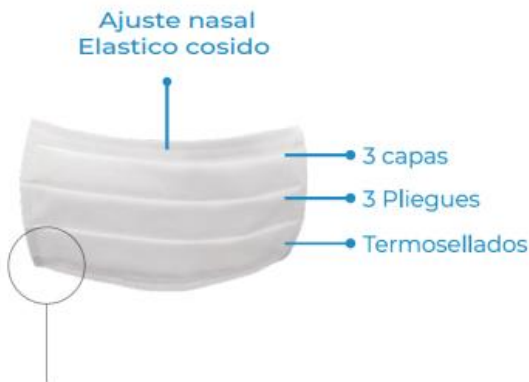

Capas termoselladas
Por los cuatro lados

Nombre: Mascarilla o tapabocas quirúrgico desechable

Marca: Gio Isaza Group S.A.S (Nacional)

Material: Tapabocas en tela no tejida de poliéster, con resorte y varilla ajustable

Acabado: Termosellado por los cuatro lados

Color: Blanco o azul

Tallas: Única (Adultos)


Proceso termosellado y ajuste nasal

Las 3 capas de tela (2 capas de tela no tejida y 1 capa de filtro) se adhieren con calor y sin costuras para impedir la entrada de fluidos, por medio de una costura se incorpora una varilla plastificada en el tapabocas en la parte superior y el elastico en los extremos del tapabocas.

Esterilizado

Proceso certificado mediante el cual se destruyen todos los microorganismos viables presentes en un objeto o superficie, incluidas las esporas microbianas.

Tres capas

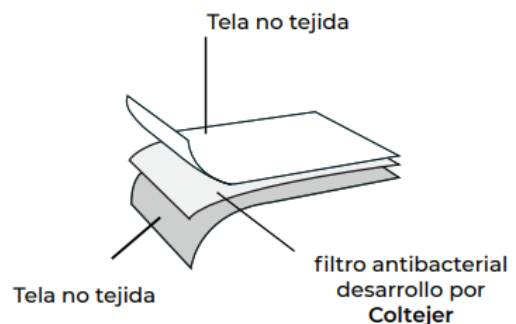

TAP-3CGIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Forma	Rectangular
Largo	18 cm +/- 0.5 cm
Ancho	9,0 xm +/- 0.5 cm
Número de capas	Tres capas de telas no tejidas
Cobertura	Cubre de la parte baja del mentón a la línea baja de los ojos
Elástico	Cuenta con 38 cm de elástico

APLICACIONES

La mascarilla protege de neblinas y polvos. Las dos capas de telas no tejidas, portegen al usuario de fluidos externos y a externos de quien la use. Su diseño permite cubrir 2/3 partes del rostro.

INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIIONES

- Colóquese la mascarilla cuidadosamente, de manera que cubra la boca y la nariz, y átela con seguridad para minimizar la presencia de espacios entre la cara y la mascarilla.
- Mientras esté usando la mascarilla, evite tocarla.
- Cuando toque una mascarilla usada, por ejemplo, al quitársela o limpiarla, lávese las manos con agua y jabón o use una solución para manos a base de alcohol.
- Sustituya la mascarilla usada por una limpia; cambie la mascarilla en cuanto se humedezca.