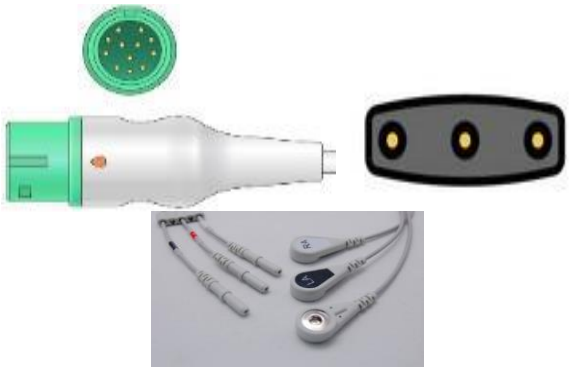
Hospitécnica
Pasión por la vida

FICHA TÉCNICA

IMAGEN:		
	***PRODUCTO***	**CABLE ECG PARA 3 DERIVADAS**
	MARCA	UNIMED
	REFERENCIA	D-1347 + D3-90S
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004316-R1
	RIESGO	IIA

USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.
CARACTERÍSTICAS	Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conector	Redondo 12 pin/ 3 pin, estilo DIN
Compatible con:	COMEN: C100,/C100A/C90/ C80/C70/C60/50 C30/C21/C20 NC3/NC5/NC8 NC12/NC10/NC19
Longitud del cable:	2.5M
Diámetro del cable	5.0mm
Peso:	159g
Autoclavable:	No
Temp. Operación:	5°C a 45°C
Humedad operación:	0 a 80% No condensada

D3-90S

Conector	BROCHE/ Pin Sencillo Tipo DIN
Derivadas	3
Compatible con:	Todas las marcas
Longitud del cable:	0.9M
Diámetro del cable	2.6mm
Peso:	0.64g
Autoclavable:	No
Temp. Operación:	5°C a 45°C
Humedad operación:	0 a 80% No condensada

MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada
PRESENTACIÓN	Unidad.
RECOMENDACIONES	**Mantenimiento:** - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución. **Precauciones:** - Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración. - No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente. - Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura. - Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal. - Siempre refiérase al manual de operador del módulo para instrucciones completas o información adicional. - Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.