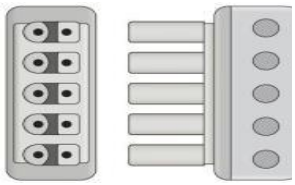
Hospitécnica
Pasión por la vida

FICHA TÉCNICA

IMAGEN:		
	***PRODUCTO***	**LEADS DESMONTABLE DATASCOPE/ MINDRAY X 5 TIPO BROCHE**
	MARCA	UNIMED
	REFERENCIA	MRC5-90P
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004316-R1
	RIESGO	IIA

USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.
CARACTERÍSTICAS	Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Conector	PINZA/ Tipo LL
Derivadas	5
Compatible con:	Datascope Expert, Passport 2, Passport 2LT, Passport XG, Spectrum, Trio, Mindray PM 5000, PM 6000, BeneView T5, BeneView T8, Beneheart D6, iPM-9800, MEC 1000
Longitud del cable:	0.9M
Diámetro del cable	2.6mm
Peso:	0.64g
Autoclavable:	No
Temp. Operación:	5°C a 45°C
Humedad operación:	0 a 80% No condensada

MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada
PRESENTACIÓN	Unidad.

RECOMENDACIONES	**Mantenimiento:** - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución. **Precauciones:** - Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración. - No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente. - Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura. - Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal. - Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.