LABBRANDS S.A.S

Autopista Bogotá- Medellín Km 7.5 Parque Industrial Bruselas Bodegan°1 Tenjo.
Tel.8966220
E-mail: alejandro.galindo@labbrands.com
NIT 860028662-8

Reporte de Servicio

No. 26956

FOP-16 V02

Cliente: Instituto Nacional de Salud	*Usuario: Laboratorio Microbiología.*	
Dirección: Avenida Calle 26 # 51-20 Bogotá.	*Teléfono: 2207700 Ext 1273*	
Equipo: PLANCHA DE CALENTAMIENTO DLAB.	*Serie: MN236BE0001293*	*Referencia: MS7-H550-PRO*
Accesorios: Bandejas, Manija seguro de Puerta, Cable de Poder		
Fecha último servicio: N/A	*Fecha y hora de entrada: 20/11/2024*	
Recibido para: Mantenimiento Preventivo		

Concepto técnico

Se realiza mantenimiento preventivo a la plancha, la cual no se observa algún tipo de daño físico aparente. Se hace prueba de funcionamiento y el equipo responde con completa normalidad a todas sus funciones, se hace apagado y desconexión, se retiran los accesorios y se hace verificación interna de las partes y componentes del equipo evidenciando que se encuentran en buenas condiciones, se ensambla nuevamente el equipo y se efectúan nuevas pruebas de funcionamiento, se encuentra ubicado en mesón firme y nivelado, es anti vibratorio. Temperatura y humedad relativa del ambiente adecuadas para el funcionamiento del equipo.

El equipo se encuentra en correcto funcionamiento y estado físico adecuado para su operación

Servicio realizado

Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo. Verificación y chequeo de funcionamiento. Se hace revisión de teclado display, señales de control, memorización de programas, medición de sensor de temperatura, control de temperatura, control de sistema de recirculación. Se hace verificación de voltaje de alimentación general 116.8VAC, voltaje de sistema de recirculación, voltaje de alimentación de sistema de calentamiento y vibración
Sensor de temperatura
Conexiones y cableado: verificación de estado físico del cableado, motor de convección.
Se realiza limpieza general interna, externa y verificación de desgaste físico de componentes mecánicos. El equipo queda funcionando correctamente

Repuestos requeridos

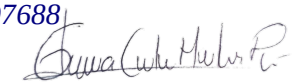
Ninguno.

Repuestos utilizados.

Ninguno.

Recomendaciones.

Seguir las instrucciones del manual del usuario y aplicarlo como herramienta instructiva, limpieza con alcohol al 70%

Disponibilidad de repuestos:	
Realizado por: Lab Brands	*Fecha:20 /11/2024*
Responsable: Jeferson Duarte 	*Cliente: Gloria Malaver C.C.1030597688* 

Condiciones Comerciales: Aclaración: Los precios de revisión, reparación o verificaciones son excluyentes entre si. Toda revisión se cobra. Al aprobar la cotización de reparación de le quipo se deberá generar una orden de servicio formal, a los 4 días hábiles siguientes se entregará el equipo; excepto en importaciones especiales las cuales están sujetas al tiempo de disponibilidad del repuesto