GUÍA DE MANEJO PIPETA AUTOMÁTICA (TRANSFERPIPETA) A UTOCLAVABLE

MARCA: BOECO






1. Presione el botón de funcionamiento hasta la primera parada

2. Si es una pipeta de volumen variable gire el botón para cambiar de volumen

3. sumergir la punta de la pipeta en la solución hasta una profundidad de alrededor de 1 cm y presionar lentamente el botón de funcionamiento. Esperar un momento y entonces retirar la pipeta del líquido tocando contra el borde del recipiente para eliminar el exceso de líquido adherido a la superficie exterior de la punta.

4. Dispersar el líquido en el recipiente de recogida suavemente, presionando el botón hasta la primera parada. Después de un segundo, presionar el botón hasta la segunda parada. Esto vaciara la punta totalmente. Sacar la pipeta del recipiente utilizado deslizándola por la pared el mismo

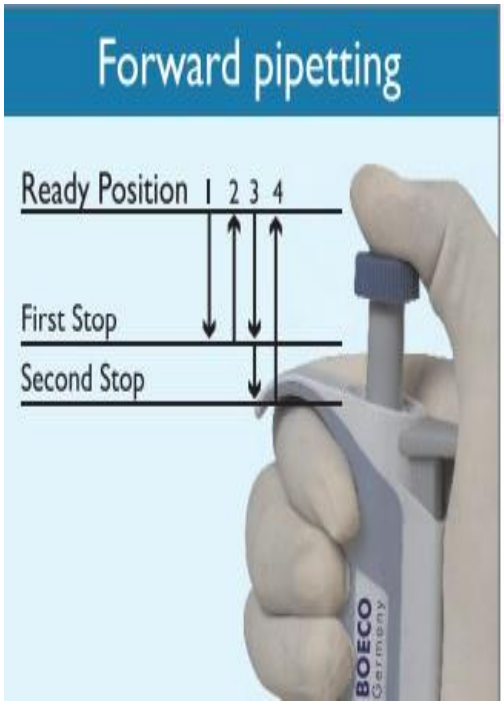

4. colocar el botón de funcionamiento en la posición “listo”.