Sikuany SAS Red de servicios farmacéuticos	HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS E.S.E CAPACITACION Página: 1

ACTA DE SOCIALIZACION


ACTA DE REUNIÓN	
Tema: CARACTERISTICAS, LIEMPIEZA Y BUEN USO DEL COMPRESOR ODONTOLOGICO	**Acta No 2**
Solicitud: CAPACITACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL CONTRATO 826 DEL 2024 **Realizada por: INGENIERO BIOMEDICO JHON JAIRO URBINA ZEPEDA**	**Lugar: CENTRO DE SALUD LA INDEPENDENCIA**

PUNTOS DE DISCUSION	
1	Presentación del tema de socialización
2	Presentación
3	Conclusiones y resolución de dudas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


SE DA INICIO A LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA CON EL FIN DE PROLONGAR LA VIDA UTIL DEL COMPRESOR POR MEDIO DEL CORRECTO USO.


Compresor dental Remac-Dent

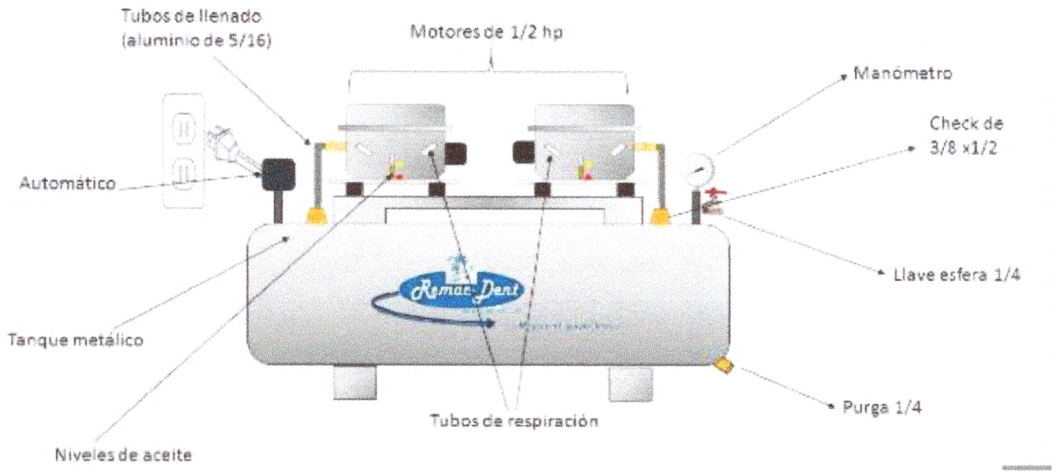


Mantención

1. Para garantizar la seguridad, el compresor de aire no tiene que tocar ninguna parte de la máquina mientras esté operando.
2. Esta máquina posee un compresor libre de aceite y por consiguiente no requiere aceite lubricante.
3. La temperatura de funcionamiento es de entre 5 y 40°C.
4. Corte la energía del compresor cuando esté limpiándolo, y no le rocíe agua. A su vez, solo debe utilizar una tela suave y seca para remover el polvo. Sea cuidadoso, no dañe ninguno de los componentes.
5. Corte la energía cuando el compresor de aire no esté siendo utilizado.

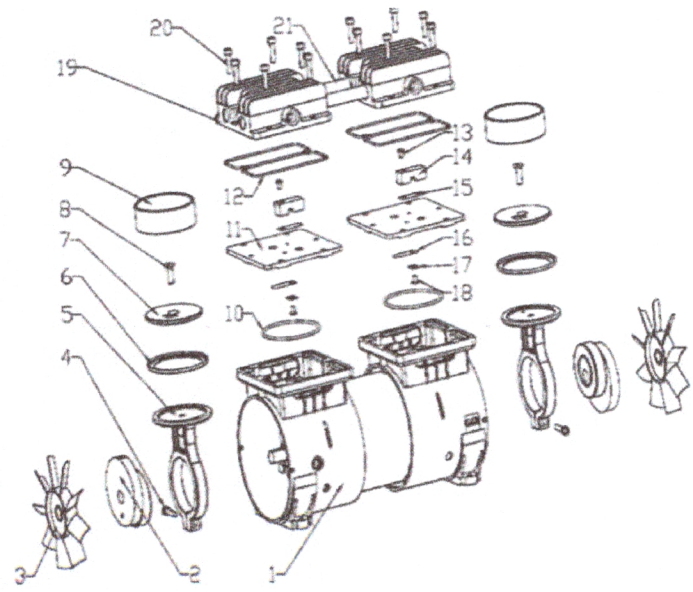

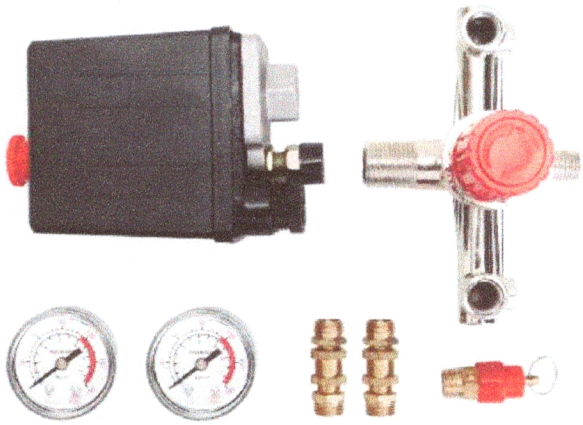


4. Caracteristica Principal

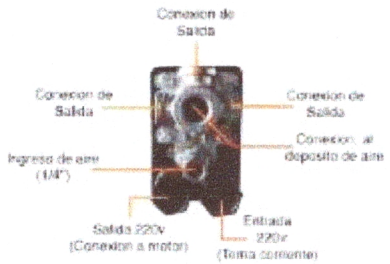

Conexion de salida: Manguera, Manometro, valvula de alivio.

5.Conexion electrica Monofasica 220v

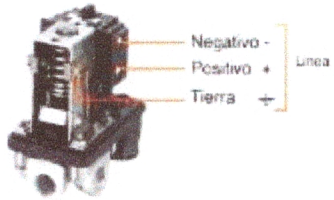

Soporte de capacitación

SE DA POR FINALIZADA LA CAPACITACION SE RESUELVEN DUDAS SOBRE LOS TEMAS SOCIALIZADOS Y SE REALIZA EVALUCION PARA MEDICION DE ADHERENCIA DE CONOCIMIENTOS.