Sikuany SAS Red de servicios farmacéuticos	HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS E.S.E CAPACITACION Página: 1

ACTA DE SOCIALIZACION

ACTA DE REUNIÓN	
Tema: CARACTERISTICAS, LIEMPIEZA Y BUEN USO DEL DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO	**Acta No 5**
Solicitud: CAPACITACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL CONTRATO 826 DEL 2024 **Realizada por: INGENIERO BIOMEDICO JHON JAIRO URBINA ZEPEDA**	**Lugar: CENTRO DE SALUD LA INDEPENDENCIA**

PUNTOS DE DISCUSION	
1	Presentación del tema de socialización
2	Presentación
3	Conclusiones y resolución de dudas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DA INICIO A LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA CON EL FIN DE PROLONGAR LA VIDA UTIL DEL DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO (DEA) POR MEDIO DE LA CORRECTA LIMPIEZA, DESINFECCION Y USO.

ResQNavi™ inteligente

En intervenciones de salvamento no profesionales, la habilidad de los rescatadores en el proceso de reanimación es muy variable. Los que carecen de experiencia en reanimación necesitan un asesoramiento más detallado, mientras que las indicaciones demasiado complicadas podrían reducir la eficiencia de los rescatadores.

Basándose en numerosas investigaciones sobre comportamientos y datos psicológicos de los usuarios, la tecnología ResQNavi™ puede identificar la condición de cada rescatador y proporcionar instrucciones paso a paso apropiadas para el rescatador en cuestión durante todo el proceso de reanimación.

Guía de salvamento interactiva

BeneHeart C1A sabe qué necesita. Cuando el rescatador está muy nervioso o es inexperto y tarda en colocar los parches, ResQNavi™ es capaz de reconocer el problema y proporciona instrucciones más detalladas mediante voz.



Rengo de energía por defecto


200 – 300 - 360 J (adulto)

50 - 70 - 100 J (pediátrico)



Cómo se acelera la aplicación de la primera descarga con la tecnología QShock™

QShock™ no solo acorta en gran medida el tiempo de encendido y el análisis del ritmo cardiaco, sino que además realiza una precarga sincrónica en el proceso de análisis del ritmo cardiaco.
Una vez completado el análisis del ritmo, se puede suministrar energía inmediatamente, para que las víctimas reciban una descarga eléctrica lo antes posible, y los rescatadores trabajen con menos estrés.

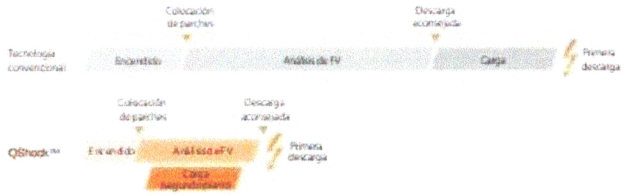




Resistencia a caídas de 1,5 m (6 superficies)



Resistencia IP55 al agua y al polvo



Cumple las normas para transporte en helicóptero y otros medios

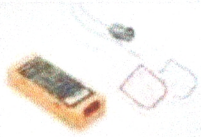

BeneHeart C1A está equipado con accesorios consumibles de alta calidad. Las baterías y los parches tienen un ciclo de vida de hasta 5 años, lo que resulta en un menor coste total de propiedad.

5 AÑOS

Soporte de capacitación

SE DA POR FINALIZADA LA CAPACITACION SE RESUELVEN DUDAS SOBRE LOS TEMAS SOCIALIZADOS Y SE REALIZA EVALUCION PARA MEDICION DE ADHERENCIA DE CONOCIMIENTOS.






mindray

Sikuany SAS Red de servicios farmacéuticos	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E	
	FORMATO ACTA DE REUNIONES Y/O CAPACITACIONES	Página 1 de 1

ACTA DE REUNIÓN	
Tema: Formato de Asistencia	Acta No 005
Citada por: hospital municipal de acacias e.s.e	Equipo: DEA
Lugar: hospital municipal de acacias e.s.e	

PARTICIPANTES				
No.	Nombre	Cargo	Teléfono	Firma
1	Alexandra Margo Gómez	Médico	3208506999	AlexandraMGG
2	Jair Steven Hoyorga G	Coor. Asistencial	3105802782	
3.	Dayanne Yurissa Herrera	Medico SSO	3204313189	

Sikuany SAS Red de servicios farmacéuticos	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E	5/6
	ACACÍAS-META	
	EVALUACION DE INDUCCION O REINDUCCION	Página 1 de 1
EVALUACION (UNICA RESPUESTA)		

1. ¿Cuáles son los partes que compone el equipo?

a) cable de poder, electrodos, batería
b) cargador, batería, electrodos
c) electrodos, batería, consola central ✓
d) Bandeja, soporte ,batería, cable de poder

2. ¿Qué protección tiene el equipo?

a) IP55 ✓
b) IP100
c) IP69
d) ninguna

3. ¿Cuántas veces se pueden reutilizar los electrodos?

a) 10 veces
b) Hasta que pierdan el adhesivo
c) Ninguna porque son desechables ✓
d) 2 veces

4. ¿Cuáles son los niveles de energía para paciente pediátrico?

a) 5, 15, 50 julios
b) 10 , 20, 50 julios ✗
c) 50, 70, 200 julios
d) 50, 70, 100 julios

5. ¿Cuáles son los niveles de energía para paciente adulto?

a) 50, 100, 250 julios
b) 80, 150, 300 julios
c) 200, 300,360 julios ✓
d) 200, 250, 350 julios

6. ¿Cuándo se debe usar el DEA?

a) Paciente presenta una fractura
b) Paciente inconsciente o con dificulta para respirar ✓
c) Paciente desorientado
d) Todo lo anterior

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	SEDE	FIRMA
TRABAJADOR:	Alexandra Marcela Gamez	medico	Resto de salud. Independencia Acacias	Alexandra Marcela G
CALIFICÓ:				

Sikuany SAS Red de servicios farmacéuticos	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E	6/6
	ACACÍAS-META	
	EVALUACION DE INDUCCION O REINDUCCION	Página 1 de 1
EVALUACION (UNICA RESPUESTA)		

1. ¿Cuáles son los partes que compone el equipo?

a) cable de poder, electrodos, batería
b) cargador, batería, electrodos
c) electrodos, batería, consola central ✓
d) Bandeja, soporte ,batería, cable de poder

2. ¿Qué protección tiene el equipo?

a) IP55 ✓
b) IP100
c) IP69
d) ninguna

3. ¿Cuántas veces se pueden reutilizar los electrodos?

a) 10 veces
b) Hasta que pierdan el adhesivo
c) Ninguna porque son desechables ✓
d) 2 veces

4. ¿Cuáles son los niveles de energía para paciente pediátrico?

a) 5, 15, 50 julios
b) 10 , 20, 50 julios
c) 50, 70, 200 julios
d) 50, 70, 100 julios ✓

5. ¿Cuáles son los niveles de energía para paciente adulto?

a) 50, 100, 250 julios
b) 80, 150, 300 julios
c) 200, 300,360 julios ✓
d) 200, 250, 350 julios

6. ¿Cuándo se debe usar el DEA?

a) Paciente presenta una fractura
b) Paciente inconsciente o con dificulta para respirar ✓
c) Paciente desorientado
d) Todo lo anterior

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	SEDE	FIRMA
TRABAJADOR:	Jair Steven Moyorga G	Coor. Urgencias	HMA	
CALIFICÓ:				

Sikuany SAS	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E	5/6
	ACACÍAS-META	
	EVALUACION DE INDUCCION O REINDUCCION	Página 1 de 1
EVALUACION (UNICA RESPUESTA)		

1. ¿Cuáles son los partes que compone el equipo?

   a) cable de poder, electrodos, batería
   b) cargador, batería, electrodos
   c) electrodos, batería, consola central ✓
   d) Bandeja, soporte ,batería, cable de poder

2. ¿Qué protección tiene el equipo?

   a) IP55 ✓
   b) IP100
   c) IP69
   d) ninguna

3. ¿Cuántas veces se pueden reutilizar los electrodos?

   a) 10 veces
   b) Hasta que pierdan el adhesivo
   c) Ninguna porque son desechables ✓
   d) 2 veces

4. ¿Cuáles son los niveles de energía para paciente pediátrico?

   a) 5, 15, 50 julios
   b) 10 , 20, 50 julios
   c) 50, 70, 200 julios ✓
   d) 50, 70, 100 julios

5. ¿Cuáles son los niveles de energía para paciente adulto?

   a) 50, 100, 250 julios
   b) 80, 150, 300 julios X
   c) 200, 300,360 julios
   d) 200, 250, 350 julios

6. ¿Cuándo se debe usar el DEA?

   a) Paciente presenta una fractura
   b) Paciente inconsciente o con dificulta para respirar ✓
   c) Paciente desorientado
   d) Todo lo anterior

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	SEDE	FIRMA
TRABAJADOR:	Dayanne Yurissa Herrera Rodriguez	Medico SSO	Independencia	
CALIFICÓ:				