

HOGAR INFANTIL

LOS COLORES DE MANDALAY

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BÁSCULA	
Báscula digital JAZ – A10	
Nombre del equipo	Báscula electrónica de piso
Tipo de equipo	Báscula electrónica de piso.
Marca	JAZ
Modelo	JAZ – A10
Serial o lote	15011280
Ubicación	CDI – Oficina de nutrición
Fecha de calibración	27-08-2022 / 20221906
Responsable del equipo	Coordinadora CDI y/o nutricionista
Fecha de ingreso	SD
Instrucciones de uso	<p>Conectar a la corriente. Ubicar en una superficie plana y fija. Encender y tarar. Esperar a que el lector se coloque en “0” Colocar los dos pies de la persona a medir, usando la técnica adecuada. Esperar que el valor que figura en el campo visual se estabilice, para obtener el dato. Al finalizar el uso, puede retirar las baterías.</p>
Datos técnicos	<p>Capacidad 150 kg Division de escala 20 g Escala de verificación 40 g Carga mínima 200 g Clase III Unidades de medición lb; kg; oz; t; g; Pcs Temperatura operación 0°C – 40°C Fuente de alimentación Adaptador entrada: 110 VAC, 60 Hz Batería Bateria recargable Display Display LED rojo de alta visibilidad Carcasa Indicador ABS de alta resistencia Dimensiones de la Plataforma 30 x 40 cm Interface RS 232</p>
Sensibilidad	100 g.
Capacidad	150 kg, 330 lbs.
Anexos	Manual de instrucciones.
Verificaciones intermedias:	Masas patrón CZ Kennedy – 06-03-2024. Se anexa formato.

HOGAR INFANTIL LOS COLORES DE MANDALAY



HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: BASCULA Marca: JAZ
Modelo: JAZ- A10 Tipo: DIGITAL SN: 15011280
Fabricante: JAZ País: CHINA
Fecha: Año: 2022 Mes: 08 Día: 27
Ubicación del equipo: HOGAR INFANTIL MANDALAY NIT: 860 031 909-2 DIR: CL 5B N° 73B- 26

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación	12V	Voltaje mín. de operación	NA
Corriente máx. de operación	NA	Corriente mín de operación	NA
Consumo máximo de potencia en watts	NA	Frecuencia en hertz	NA
Peso neto	NR	Capacidad	150Kg
División	0.1Kg	Presión	NA
Rango temperatura	NA	Temperatura de operación	NR
Rango humedad	NA	Humedad de operación	NR

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA Gas: NA Aire: NA Vapor: NA Electricidad: X
Energía solar: NA Derivados del petróleo: NA Otros: NA Baterías: X
Especificar:

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
	X				X					X			

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X Mantenimiento: X Catálogo de partes: NA Otros: X	Eléctricos: X Hidráulicos: NA Neumáticos: NA Mecánicos: NA Electrónicos: NA	Básico: NA Medio: X Avanzado: NA
Tecnología		Clasificación
Eléctricos: NA Electrónicos: X Mecánicos: NA Electromecánicos: NA	Hidráulicos: NA Neumáticos: NA Vapor: NA Energía solar: NA	Diagnósticos: X Rehabilitación: NA Prevención: NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	Bombillos: NA	Interruptores: NA	Brazaletes: NA	Traductores de presión:
Filtros: NA	Bases: NA	Jeringas triples: NA	Pasadores: NA	Integrados: NA
Microfiltros: NA	Turbinas: NA	Fibra óptica: NA	Papel: NA	Tambores: NA
Sensores: NA	Fusibles: NA	Shuts: NA	Ventanas: NA	Equipo de infusión: NA
Electrodos: NA	Cambia fresas: NA	Tubos de lámpara: NA	Transistores: NA	

NA: NO APLICA, NR: NO REGISTRA

Calle 46 No. 13-44 - Tel.: 601 402 46 78
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
15 Años
a su
Servicio

Preventivo ☒ correctivo ☐

INSTITUCION	HOGAR INFANTIL MANDALAY	EQUIPO	BASCUA DIGITAL
NIT ó CC	860 031 909-2	MARCA	JAZ
DIRECCION	CL 5B N° 73B- 26	MODELO	JAZ-A10
UBICACIÓN		SERIE	15011280
FALLAS _____		ESTADO DEL EQUIPO	
		Bueno ☒ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACION DE ESTADO							
Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display			
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registadores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores			
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO					
LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

Fecha	27	08	2022
Próximo mantenimiento	27	08	2023

Firma y sello técnico
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

Calle 46 No. 13-44 - Tel.: 601 402 46 78
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Eklmedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

HOGAR INFANTIL

LOS COLORES DE MANDALAY



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20221906

Fecha de calibración 2022-08-27

SOLICITANTE: HOGAR INFANTIL MANDALAY
 DIRECCIÓN: CL 5B N° 73B- 26
 CIUDAD: BOGOTÁ
 EQUIPO: BASCULA DIGITAL
 MARCA: JAZ
 MODELO: JAZ-A10
 NÚMERO DE SERIE: 15011280

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado es por comparación directa, de acuerdo con la Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg-01/v.00:2009.


CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 19.7

Humedad Relativa %: 57.6

MEDICIÓN REALIZADA

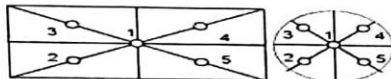

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	CLASE	FABRICANTE	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
MASA 5Kg	M1	PESATRONIK	JB01	M220014	2022-01-12
MASA 10Kg	M1	PRODUPESAS	JB02	M220013	2022-01-12
MASAS 20Kg	M1	PRODUPESAS	001 - 002 -003	M220018	2022-01-12



Calle 46 No. 13-44 - Tel.: 601 402 46 78
 Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
 JoseLuisbocachica@yahoo.es
 Ekimedicos@outlook.com
 Bogotá, D.C. - Colombia

HOGAR INFANTIL LOS COLORES DE MANDALAY



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20221906

Fecha de calibración 2022-08-27

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUÍA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

EXACTITUD

PATRON Kg	INSTRUMENTO Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
5	5.00	0.00	1,97	0,34
10	10.00	0.00	1,97	0,34
20	20.00	0.00	1,97	0,34
40	40.00	0.00	1,97	0,34
60	60.00	0.00	1,97	0,34
75	75.00	0.00	1,97	0,50

REPETIBILIDAD

CARGA N°	PATRON Kg	INSTRUMENTO Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
1	20	20.00	0.00	1,97	0,34
2	20	20.00	0.00		
3	20	20.00	0.00		

EXCENTRICIDAD

CARGA Punto	PATRON Kg	INDICACIÓN Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
1	20	20.00	0.00	1,97	0,34
2	20	20.00	0.00		
3	20	20.00	0.00		
4	20	20.00	0.00		
5	20	20.00	0.00		

Nota: Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.

Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

Calle 46 No. 13-44 - Tel.: 601 402 46 78
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Jose Luis Bocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia