FECHA: Bogotá, 6 de mayo, de 2023.

HORA: 1:00 p.m. - 2:00 p.m.

LUGAR: Centro Integrarte Atención Externa Grupo 4

TEMA: Capacitación en uso de equipos antropométricos

ASISTENTES: Diego Cortes, Cesar Vargas

ORDEN DEL DÍA:

1. Capacitación funcionamiento de báscula
2. Capacitación funcionamiento de tallímetro

DESARROLLO:

1. Se realiza capacitación y revisión del funcionamiento del indicador de peso LP-7516, inicialmente se presentan las generalidades del equipo, dadas a continuación



Posteriormente, se aclara que Indicado de peso LP7516 ideal para uso en ambientes seco, lugares oscuros o polucionados. No se recomienda para exteriores pues su luminosidad se ve opacada por la luz solar intensa. Tienen funciones de Tara, Cero. Calibración y configuración totalmente digital. Display LED de gran visibilidad color rojo. Trabaja a 110VAC y tiene batería interna recargable cuya duración es de aproximadamente 30 horas.

Luego, se enseñó la función de ENCENDIDO APAGADO:

- La tecla roja on/off permite encender/apagar el indicador.
- Para encender, oprima el botón
- Para apagar, oprima el botón durante 3 segundos



Posteriormente, se aclaró el uso de la tecla TOTAL

- Con esta función podrá sumar distintos pesos. Esta función es muy útil a la hora de controlar la carga de
- Los vehículos. Pulse la tecla “total” cuando la balanza haya calculado el primer peso y en la pantalla aparecerá el indicador “n 001”. La balanza habrá guardado el peso en la memoria. El valor
- Aumentará cada vez que pulse la tecla “total”
- Cuando active esta función, la pantalla mostrará el indicador →total← en la parte inferior de la pantalla.



Seguido, se indicaron las funciones de la tecla HOLD

- Pulse la tecla “hold” si quiere retener el valor de medición actual en la pantalla. Si pulsa de nuevo la tecla “hold”, la pantalla volverá al modo de medición estándar.
- Esta función sirve para mantener el peso en la pantalla cuando haya retirado el material de encima de la balanza. Así podrá incluir los datos del peso en la documentación correspondiente.



Para la tecla TARE, Pulse la tecla “TARE” para que la balanza indique el peso con la tara. Pulse esta tecla dentro del menú para disminuir un valor




Con la función “ZERO” pondrá la pantalla a cero. Al contrario de lo que sucedía con la función BRUTO / NETO, la función de tara no tendrá en consideración la puesta a cero.




VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA BÁSCULA

Con una masa patrón certificada por la ONAC, tare la báscula, posteriormente, colóquela en la plancha de la misma, el valor debe ser correspondiente al peso indicado en la masa patrón. En caso de que el peso no corresponda, es necesario calibrar la báscula.

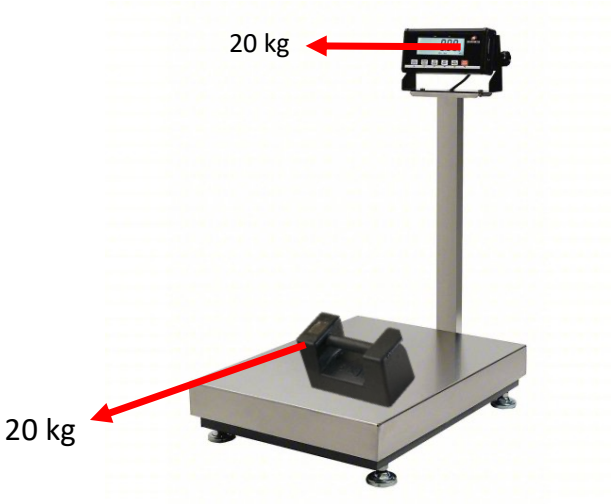

PESAJE DE PERSONAS

Para realizar pesaje de personas, utilice la función tare, para tarar la báscula, en caso de requerir un elemento adicional, como sillas, colóquelos en la báscula, posteriormente, oprima la tecla tare, para que al momento del pesaje, no se tenga en cuenta el peso de la silla.

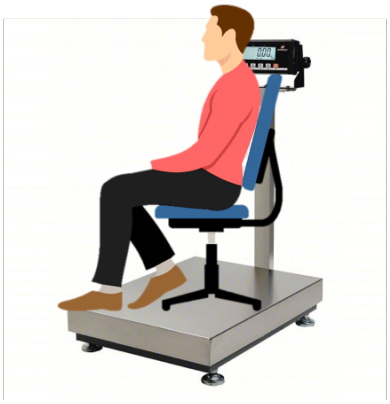

CUIDADOS GENERALES

- Mantenga su balanza bien nivelada y en una superficie estable.
- Ponga su balanza en un lugar alejado de fuentes de calor / frío y humedad.
- Tenga atención al estado de la batería de la balanza.
- Realizar limpieza con un paño limpio y seco

2. Se realiza capacitación y revisión del funcionamiento tallímetro SECA 213, inicialmente se presentan las generalidades del equipo, que está concebido para el uso en hospitales, consultorios médicos e instalaciones de medición y de cuidados estacionarias.


   SEGURIDAD

   Antes de utilizar el nuevo estadiómetro, tómese un poco de tiempo para leer los avisos siguientes de seguridad.


   Observar los avisos indicados en las instrucciones de uso
   Utilizar el montaje de montaje entregado
   Después de realizada la medición, desplazar el estadiómetro hacia arriba, para que no haya peligro de lesiones.

ENSAMBLAR EL TALLÍMETRO

Retirar cuidadosamente una a una las piezas que se encuentran en la parte inferior del tallímetro, puede apoyarse con los pulgares, como se observa en la imagen.

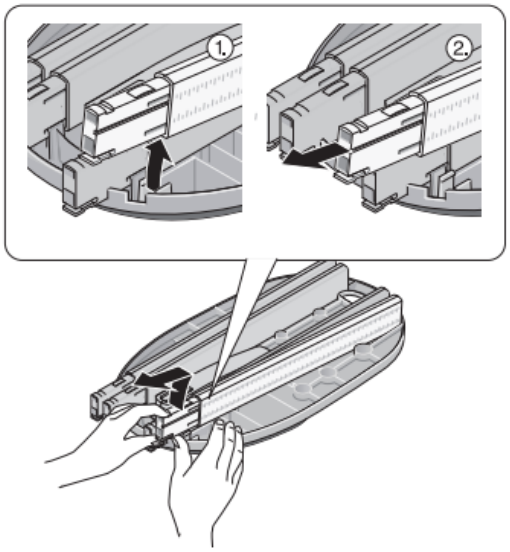


Posteriormente, ensamblar las piezas teniendo en cuenta la secuencia en centímetros, de menor a mayor

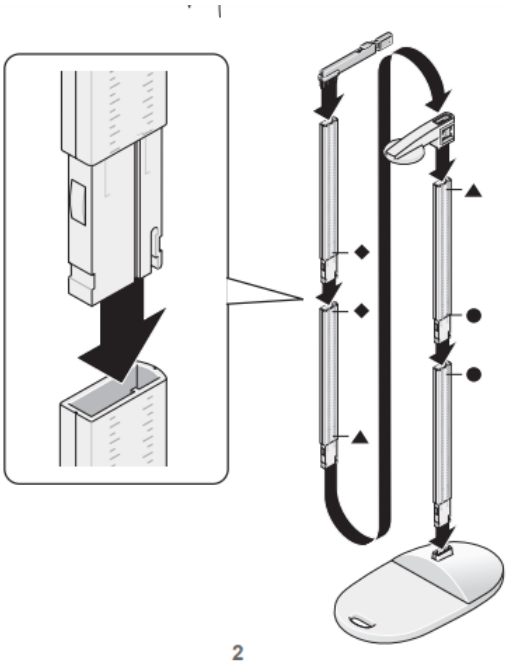


MEDIR CON EL ESTADIÓMETRO


La persona a medir se coloca debajo del tallímetro
La lengüeta medidora se baja hasta la cabeza
En el campo de visión aparece la altura del cuerpo.
Manteniendo los pasos mencionados arriba se obtiene una precisión mayor de +/- 1 mm.

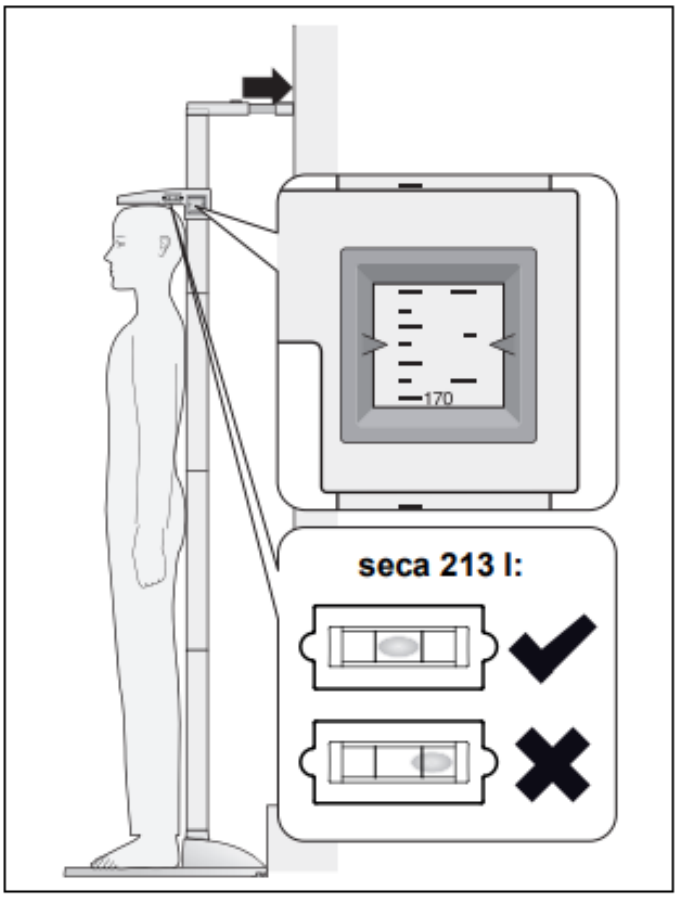

LIMPIEZA

Limpiar la varilla de medición , según fuera preciso, con un trapo húmedo. Seguir los avisos del fabricante.

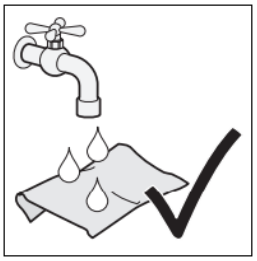

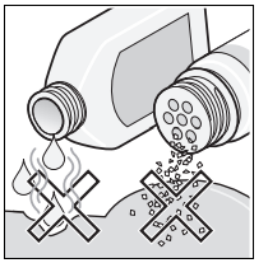

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos

Rango de medición en cm:	20 - 205 cm
División:	1 mm, 1 mm
Dimensiones (AxAxP):	337 x 2165 x 590 mm
Peso neto:	2,4 kg
CE:	CE 0123

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma