
eufar


Bonzyme®
Detergente Multienzimático Concentrado


¿Cómo realizar lavado manual de instrumental o material con detergente multienzimático?


CONSULTE AQUÍ
VIDEO DE CAPACITACION

Siempre use elementos de protección personal. Evite que se seque el instrumental o material después de su uso; inicie inmediatamente el proceso con BONZYME diluído.

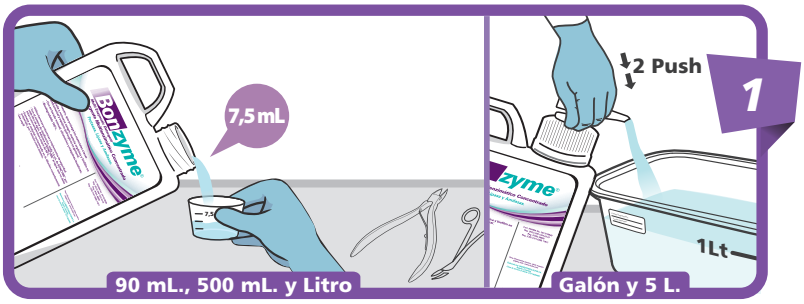


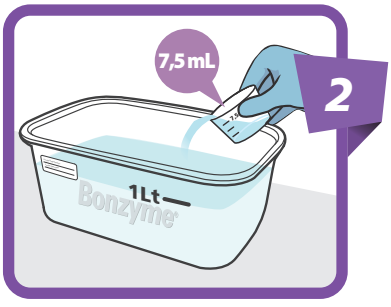


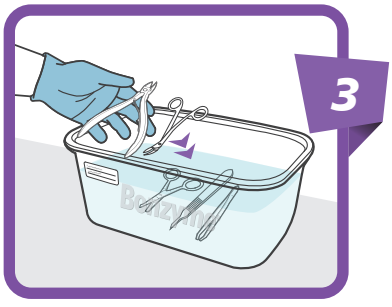


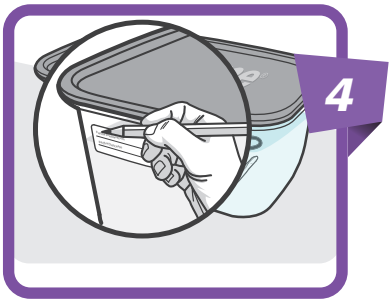




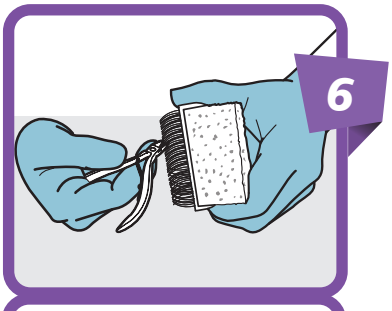

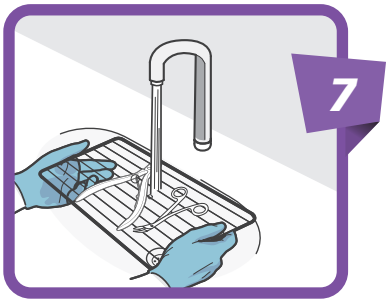

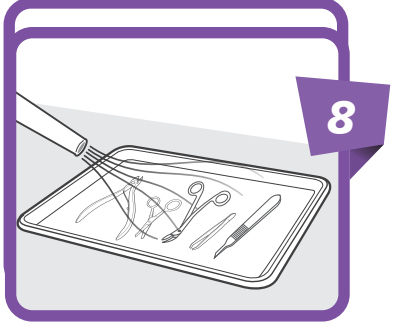

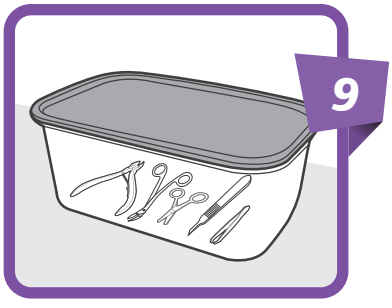

1. Mida 7,5 mL de **BONZYME®** con el sistema de dosificación adjunto.
2. Adicione esta cantidad de **BONZYME®** a 1 litro de agua potable a temperatura no mayor a 40° C y mezcle.
   Use la cantidad necesaria para cubrir el material o instrumental; si necesita mayor cantidad de solución, conserve la proporción establecida.
3. Sumerja el material a lavar, de tal forma que quede totalmente cubierto.
4. Tape el recipiente, marque la fecha y hora de preparación.
5. Deje en inmersión por mínimo un minuto.
6. Retire y verifique el estado de limpieza y si es necesario use cepillo o esponja suave, evitando salpicar.
7. Enjuague el instrumental con agua potable o destilada.
8. Escurra y/o seque con aire comprimido limpio.
9. Continúe con la desinfección de alto nivel con **GLUTFAR® Plus HLD, EUFARCIDE** o esterilización en autoclave, según su protocolo.

Evite el reuso de la solución y descártela diariamente. Si cuenta con equipo para lavado automático o ultrasónico, siga las instrucciones del equipo, usando **BONZYME®** *diluído.*

PP - V&M - 008 Rev. 11