
4. Manejo

Para pesar correctamente



– Pulse la tecla **START** sin ningún peso sobre la báscula.
  En el visualizador aparecen sucesivamente SECA, 88888. y 0.000. Después la báscula se repone automáticamente a cero, quedando lista para el servicio.
– **Al pesar bebés:** Colocar al bebé en la artesa. Cuidar de que el niño se quede lo más quieto posible.
  ¡Importante!
  El peso adicional máximo es de 10 kg (modelo ***384***) / 20 kg (modelo ***385***) en el margen de pesada 1 y de 20 kg (modelo ***384***) / 50 kg (modelo ***385***) en el margen de pesada 2. El peso máximo visualizable se reduce en el peso de los objetos ya colocados.
– **Al pesar niños que puedan estar de pie:** retirar la bandeja conforme a lo descrito (véase “Colocar la báscula” an la pagina 45).
  Nota:
  Comprobar la posición segura de la parte inferior. Subir el niño a la báscula y procurar que permanezca quieto.
– Lea el peso en la indicación digital.
  Nota:
  ¡La báscula no debe ser sujeta a pesas que exceden la carga máxima especificada!
– Para desconectar la báscula, apretar de nuevo la tecla **START**.



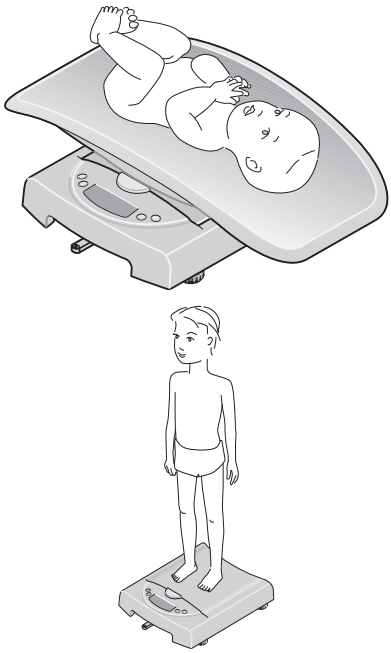

Desconexión automática /ahorro de energía

La báscula está preparada para pesar durante aprox. 20 segundos después de su conexión. Si se realiza un pesaje, el valor indicado se mantiene durante aprox. 2 minutos hasta la desconexión automática de la báscula.

Tarar la indicación de peso (TARA)

La función de tara es útil, cuando no se quieran pesar objetos adicionales (como por ejemplo paños o una base en la superficie de peso) . Proceder de la manera siguiente:

– Colocarse primero sin el peso adicional sobre la báscula y activarla pulsando largo la tecla **HOLD/TARE**.



La indicación de la báscula se repone de nuevo a “0” y se puede comenzar una pesada normal.

– Ahora puede realizar tantas pesadas como desee con este peso adicional.

– TARA se desactiva al apretar de nuevo la tecla **HOLD/TARE** o desconectando la báscula.



Memorización del valor de peso (HOLD)

El valor de peso calculado puede seguir apareciendo también después de la descarga. Con ello también es posible tomar de nuevo al bebé antes de anotar su peso.

– Pulsar la tecla **HOLD/TARE**, mientras está cargada la báscula. Entonces parpadea la indicación, hasta que se haya registrado un peso estable. Luego la indicación queda almacenada.



El valor permanece memorizado en el visualizador hasta la desconexión automática.

– La función HOLD puede desactivarse pulsando de nuevo la tecla **HOLD/ TARE**. En el visualizador aparece 0.0 con báscula descargada o el peso actual. La indicación “HOLD“ desaparece.



Nota:

La función HOLD se puede activar incluso cuando se ha ejecutado previamente la función TARA.