Guía Rápida Ecógrafo ACCLARIX LX9



1. PANTALLA LCD
2. PANTALLA TOUCH
3. PANEL DE CONTROL
4. CONECTOR ECG
5. PUERTO USB
6. CONECTOR TRANSDUCTORES

PANEL DE CONTROL ECOGRAFO ACCLARIX



1. CONTROLES DE PANTALLA TOUCH
2. SWITCH ON/OFF
3. TIPO DE PACIENTE
4. RECEPTACULO
5. TIPO DE TRANSDUCTOR
6. CURSO DE PANTALLA
7. TGC
8. TRACKBALL

INICIAR EXAMEN

- PULSE LA TECLA “TRANSDUCTOR”, PARA SELECCIONAR EL TRANSDUCTOR QUE DESEAY PREAJUSTE DEL EXAMEN PRESENTE
- PULCE LA TECLA #PACIENTE” E INTRUDUZCA LA INFORMACION, BASICA DEL PACIENTE
- PULSE EL BOTON DE LA PANTALLA TACTIL” INICIAR EXAMEN”, PARA INICIAR LA ADQUISICION DE IMAGENES

NOTA: TENGA ENCUENTA QUE, SI NO NECESITA INFORMACION DEL PACIENTE, COMO PARA UN EXAMEN DE EMERGENCIA, UN EXAMEN INICIA AUTOMATICAMENTE CON UNA CAPTURA DE IMAGEN.

IMAGEN

MODO B

- PRESIONE “B” EN LA CONSOLA PARA INGRESAR AL MODO B.
- GIRE ”B” PARA AJUSTAR GANANCIA TOTAL

MODO DE COLOR

- PRESIONE”C” EN LA CONSOLA Y APARECE EL CUADRO ROI.
- AJUSTE EL TAMAÑO Y LA POSICION DEL CUADRO ROI CON EL TRACKBALL Y “SET”.
- PRESIONE LA TECLA MODO “PDI”,”DPDI” O COLOR EN LA PANTALLA TACTIL PARA CAMBIARLOS DIFERENTES MODOS DOPPLER COLOR.

MODO PW/CW


- PRESIONE “PW”/”CW” EN LA CONSOLA PARA MOSTRAR LA LINEA DE MUESTRA
- USE LA BOLA DE SEGUIMIENTO Y LOS CONTROLES TACTILES PARA AJUSTAR LA POSICION DE LA LINEA DE MUESTRO, Y EL TAMAÑO DEL ANGULO DE LA PUERTA DE MUESTREO
- PRESIONE” ACTUALIZAR” EN LA CONSOLA PARA MOSTRAR LA TIRA DOPPLER

MODO M

- PRESIONE “M” EN LA CONSOLA PARA MOSTRAR LA TIRA M Y LA LINEA DE MUESTRA.
- MUEVA EL TRACKBALL PARA AJUSTAR LA LINEA DE SEGUIMIENTO.

MODO DE 3D/4D

- SELECCIONE UN TRANSDUCTOR WOBBLER Y PRESIONE LA TECLA “3D/4D” PARA INGRESAR.
- USE EL TRACKBALL Y LA TECLA “SET” PARA AJUSTAR EL VOI.
- PULSE LA TECLA “START” O LA TECLA “UPDATE” PARA INICIAR LA ADQUISICION DE IMAGENES.
- AJUSTE LA REPRESENTACION DE MODOS, DISEÑO, PARAMETROS EN LA PANTALLA TACTIL

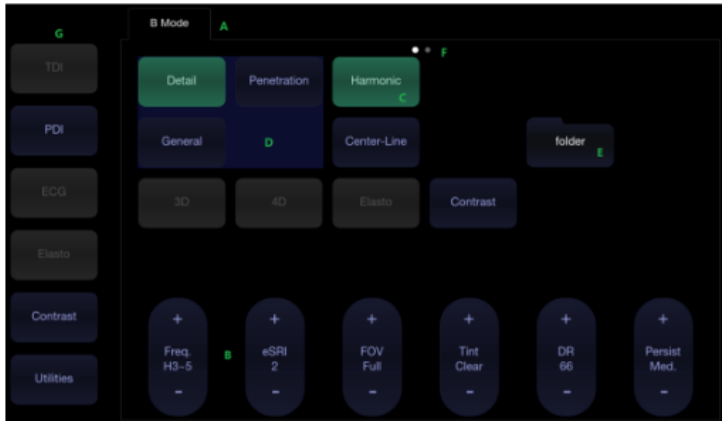

MODO M ANATOMICO


- SELECCIONE UN TRANSDUCTOR DE MATRIZ EN FASE E INGRESE AL MODO M
- PRESIONE “ANATOMIC” O “CURVED AMM” EN LA PANTALLA TACTIL INGRESAR A MODO LINEAL MODO M ANATOMICO M O MODO M ANATOMICO CURVO

MODO TDI

- EN MODO COLOR PRESIONE “TDI” EN LA PANTALLA TACTIL PARA IMÁGENES AL MODO TVI
- EN EL MODO “PW”, PRESIONE “TD” EN LA PANTALLA TACTIL PARA INGRESAR AL MODO TVD
- EN EL MODO COLOR M, PRESIONE “TD” EN LA PANTALLA TVM

MODO ELASTOGRAFIA

- INGRESE TRANSDUCTOR LINEAL Y PRESIONE “ELASTO” PARA INGRESAR.
- AJUSTE EL TAMAÑO Y LA POSICION DEL CUADRO ROI CON EL TRACKBALL Y LA TECLA “SET”.
- PRESIONE EL TRANSDUCTOR SOBRE LA LESION DDE FORMA ADECUADA.

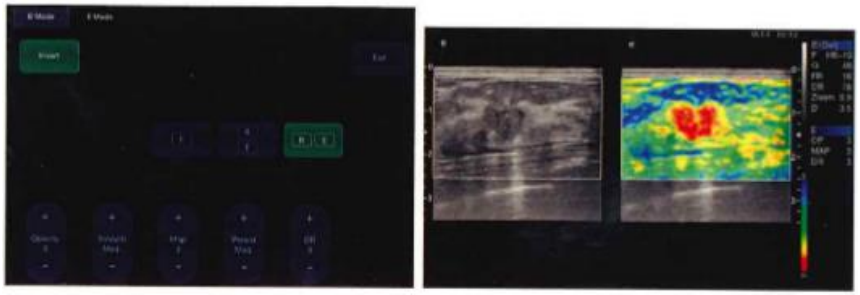

MEDICION

- PRESIONE “MEASURE” PARA INGRESAR LA MEDICIONDE LA APLICACIÓN, PULSE EL “CALIBRADOR” PARA GENERAR LA MEDICION.

COMENTARIO/MARCA CORPORAL

- PULSE LA TECLA “COMMENT” PARA SELECCIONAR LOS COMENTARIOS PREDEFINIDOS O PARA INTRODUCIR UN COMENTARIO
- PRESIONE LA TECLA “BODY MARK” PARA SELECCIONAR UNA MARCA CORPORAL PREDEFINIDA Y GIRE LA PERILLA “ANGLE” PARA MOVER LA ORIENTACION DEL ICONO DEL TRANSDUCTOR

GUARDAR IMAGEN/CINE

- USE LA TECLA “STORE” EN LA CONSOLA PARA ALMACENAR IMÁGENES O CINE

REPORTE

- PRESIONE LA TECLA FIJA “REPORT” Y LUEGO PRESIONE “INFORME” EN LA PANTALLA TACTIL PARA VER LOS RESULTADOS DE LA MEDICION, PRESIONE “PRINT” PARA IMPRIMIR EL INFORME SI UNA IMPRESORA DE INFORMES ESTA CONECTADO