JERINGA INSULINA ALFA SAFE®




NOMBRE GENÉRICO	Jeringa de Seguridad Insulina. Jeringa desechable estéril para insulina.
NOMBRE COMERCIAL	Jeringa de Insulina
MARCA	ALFASAFE ®
TIPO DE PRODUCTO	Dispositivo Médico
REGISTRO SANITARIO	2018DM-0001797-R1
VIGENCIA	06 de Febrero de 2028
TIPO DE RIESGO	Clase IIA Riesgo moderado
VIDA ÚTIL	5 AÑOS

DESCRIPCIÓN	•Dispositivo Médico estéril de un solo uso. •Tubo transparente con un conector en uno de sus extremos. •Libre de Pirógenos. •Libre de Látex •Con aguja tribiselada fija, Sin espacio muerto para la administración de insulina. •Con pistón de goma siliconado para facilitar el desplazamiento, con dispositivo dosificador agregado y con sistema de tope en el barril para el pistón. •Único cuerpo con Tapas de seguridad en aguja y embolo. •Consta de empaque en papel grado médico, – película de Polietileno/Polipropileno, hermético, individual de fácil apertura, apirógeno. •Tipo de esterilización ETO.
CARACTERÍSTICAS	•Cumple con los máximos requisitos de seguridad, calidad y precisión. •Garantiza una perfecta y segura conexión de la aguja. •Envase seguro y de fácil apertura. •Dosificación fácil, avance suave y regular del embolo. •Impresión de escala en tinta inyect, no borrable, no removible, no contaminante, indeleble lo cual permite mayor exactitud en la dosificación.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	•Humedad Relativa: MÁXIMA 70% •Temperatura: MÁXIMA 30C° •Almacenar en lugar fresco y seco. •Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad del producto.

ESTÁNDARES NORMATIVOS	Las jeringas ALFA SAFE ® cumplen con la norma **ISO7886-1:1993/CPJ-S.**
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	•Dispositivo para un solo uso. •Una vez abierto el empaque estéril utilizarlo en el menor tiempo posible con el fin de evitar contaminación. •No almacenar en ambientes húmedos. •No utilizar si el empaque se encuentra abierto.
DISPOSICIÓN FINAL	•Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos. •En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo"

USOS

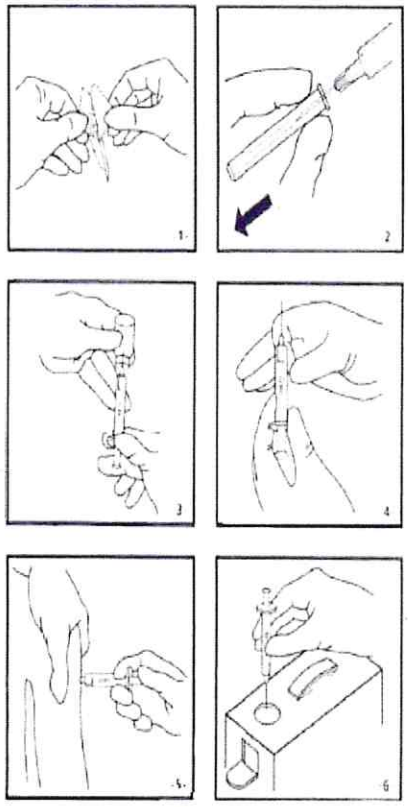

•Verifique que el empaque de la jeringa no esté dañado y/o abierto. En cualquier de estos casos deséchela.
•Abra el extremo del empaque y retire la jeringa.
•Limpie la superficie del frasco-ampolla con alcohol y deje que se seque al aire.
•Remueva el protector de la aguja. No mueva el embolo ni trate de inyectar aire en el frasco-ampolla ya que esto bloqueará la jeringa.
•Levante e invierta el frasco-ampolla e inserte la aguja.
•Mantenga la punta de la aguja en el líquido en todo momento, no dejando que entre aire a la jeringa. Podría causar una dosis incorrecta.
•Hale el embolo lentamente para llenar la jeringa. El embolo se detendrá automáticamente justo después de la marca de los ml.
•Para eliminar las burbujas de aire:
- Retire la aguja del frasco y sosteniendo la jeringa en posición vertical golpee la camisa para desplazar las burbujas hacia la punta de la jeringa.
- Hale el embolo para permitir que entre aire a través de la aguja hasta que dicho aire entre en contacto con el aire en la camisa de la jeringa.
- Luego empuje con cuidado el émbolo hasta la dosis (ml), expulsando así la burbuja de aire.

•Administre la inyección de acuerdo a las instrucciones clínicas.
•Empuje el émbolo hasta el final para administrar la dosis correcta.
•El émbolo se bloqueará automáticamente para prevenir que la jeringa vuelva a ser utilizada.
•Deseche la jeringa inmediatamente en un recolector. No tape la aguja.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CAPACIDAD	GRADUACIÓN MÍNIMA	GRADUACIÓN NUMÉRICA	AGUJA			
			CALIBRE		LONGITUD	
			Gauge	mm	Pulgada	mm
0.3 ml/cc 30 UNITS	1 Unidad	Cada 5 Unidades	31G	0.22 mm	1/3"	8mm
0.5 ml /cc 50 UNITS	1 Unidad	Cada 5 Unidades	31G	0.22 mm	1/3"	8mm
0.5 ml /cc 50 UNITS	1 Unidad	Cada 5 Unidades	30G	0.25 mm	1/3"	8mm
1 ml /cc 100 UNITS	2 Unidades	Cada 10 Unidades	31G	0.22 mm	1/3"	8mm
1 ml /cc 100 UNITS	2 Unidades	Cada 10 Unidades	30G	0.25 mm	1/3"	8mm

COMPONENTES Y MATERIALES

	Nombre de las Partes		Nombre del Material
1	Embolo		Polipropileno
2	Cilindro		Polipropileno
3	Pistón		Caucho natural para uso médico
4	Aguja	1.Eje / Centro	Polipropileno
		2. Cánula	Acero inoxidable
		3.Cubierta Segura	Polipropileno

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN COMERCIAL (Unidad Mínima de Venta)	UNIDAD DE EMBALAJE
JEI004	JERINGA INSULINA 0.3 ML X 31 G X 1/3" ALFASAFE	CAJA X 100 UNIDADES	3000 UNIDADES
JEI006	JERINGA INSULINA 0.3 ML X 31 G X 1/3" X 10 UNIDADES	CAJA X 10 PAQUETES	3000 UNIDADES
JEI007	JERINGA INSULINA 0.5 ML X 31 G X 1/3" ALFASAFE	CAJA X 100 UNIDADES	3000 UNIDADES
JEI008	JERINGA INSULINA 0.5 ML X 31 G X 1/3" X 10 UNIDADES	CAJA X 100 UNIDADES	3000 UNIDADES
JEI010	JERINGA INSULINA 1 ML X 31 G X 1/3" ALFASAFE	CAJA X 100 UNIDADES	3000 UNIDADES
JEI013	JERINGA INSULINA 1 ML X 30G X 1/3" ALFASAFE	CAJA X 100 UNIDADES	3000 UNIDADES
JEI014	JERINGA INSULINA 0.5 ML X 30 G X 1/3" ALFASAFE	CAJA X 100 UNIDADES	3000 UNIDADES