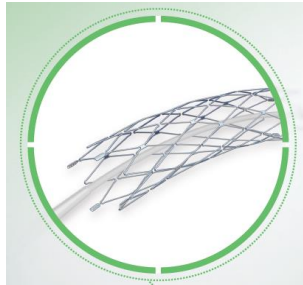


Nombre Comercial del Producto :	STENT WINGSPAN CON CATETER BALON GATEWAY	
Nombre Técnico:	STENT WINGSPAN	
Marca:	STRYKER NEUROVASCULAR	
Modelo, referencia y/o Familia: LO AMPARA EL REGISTRO INVUMA	STENT WINGSPAN CON CATETER BALON GATEWAY	
Número Catalogo:	250150 Stent NV modelo Wingspan 2.5 mm x 15 mm marca STRYKER 250200 Stent NV modelo Wingspan 2.5 mm x 20 mm STRYKER 350200 Stent NV modelo Wingspan 3.5 mm x 20 mm marca STRYKER 400200 Stent NV modelo Wingspan 4.0 mm x 20 mm STRYKER	
Categoría de producto:	69 - STRYKER EMEA	
Fabricante y País de Origen:	STRYKER NEUROVASCULAR DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICAS	
Registro Sanitario o Permiso de	2023DM-0008937-R1	
Clasificación de Riesgo:	III	
Tipo de Dispositivo:	INVASIVO	
Vida Útil del Producto:	3 AÑOS	Foto del Producto
Producto Esteril o Limpio:	ESTERIL	
Almacenamiento:	Almacenar en un entorno seco, a temperatura ambiente, no exponer a temperaturas superiores a 40 grados c. Este producto es de único uso.	
Descripción y características del Producto:	El stent está indicado para mejorar el diámetro del lumen arterial cerebral en pacientes con aterosclerosis intracraneal que no responden al tratamiento médico, en vasos intracraneales con una estenosis $\geq 50\%$ que son accesibles para el sistema	
Composición:	Stent de nitinol multisegmentado, cuatro (4) bandas marcadoras opacas al radio; sistema de liberación: eje de cuerpo exterior, extremo distal reforzado con acero inoxidable encapsulado por una capa de poliuretano y un forro ptfé, extremo distal con marcador de banda radiopaco y encapsulado por una capa exterior de poliuretano, eje del cuerpo exterior recubierto hidrófilamente. Eje de cuerpo interno: eje proximal reforzado con una trenza de acero inoxidable encapsulada en polimida y forro compuesto de ptfé, hipotubo de acero inoxidable, eje distal pead.	
Especificaciones técnicas:	El stent está indicado para mejorar el diámetro del lumen arterial cerebral en pacientes con aterosclerosis intracraneal que no responden al tratamiento médico, en vasos intracraneales con una estenosis $\geq 50\%$ que son accesibles para el sistema	
Usos y Aplicaciones: <u>(Incluir Principio de funcionamiento cuando se trate de Equipos)</u> <u>Ejemplo: mecánico, electrónico, etc.</u>	El stent está indicado para mejorar el diámetro del lumen arterial cerebral en pacientes con aterosclerosis intracraneal que no responden al tratamiento médico, en vasos intracraneales con una estenosis $\geq 50\%$ que son accesibles para el sistema. Luego de realizar angioplastia con el balón Gateway, se introduce el stent wingspan y es liberado para tratar la placa ateromatosa y permitir que el vaso mantenga el lumen adecuado para el paso del flujo sanguíneo.	
Accesorios Incluidos:	N/A	
Accesorios Adicionales:	N/A	

Tipo de producto:	N/A	¿Es de datos?	
Uso o destino:	N/A	Tipo de material:	
Tensión:			
<u>Estado del catalogo:</u>			
Nota: La información que se requiera adicional debido al tipo de dispositivo (Equipos Médicos, Dispositivos Médicos, Accesorios, Repuestos, consumibles) incluirla en el campo Información Importante . Los campos que no apliquen diligencian con la frase N/A .			