N° DE ACTA:	**FECHA: 24/11/2025**
REUNIÓN: Capacitación de termohigrómetros.	

ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO**	**ÁREA/ENTIDAD**
Se anexa listado de asistencia		Subred Norte E.S.E

ORDEN DEL DÍA / AGENDA

1. Realizar pre- test con el fin de evaluar el conocimiento por parte del personal asistencial acerca del ventilador mecánico.
2. Informar al personal acerca de los diferentes termohigrometros que se pueden encontrar en el servicio de ambulancias.
3. Validar los conocimientos del personal con la información brindada (definición, uso ó manejo, clasificación de riesgo, rutas de notificación, limpieza y desinfección, entre otros).
4. Cuantificar la adherencia al tema.
5. Realizar Pos-test con el fin de medir la apropiación o adherencia del tema.
6. Diligenciar la asistencia.

REVISIÓN COMPROMISOS ANTERIORES

Responsable	Fecha	Cumplimiento		Causa
		SI _____	NO _____	
		SI _____	NO _____	
		SI _____	NO _____	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo el 24 de noviembre del 2025 se realiza acta de fortalecimiento de competencias realizada de manera virtual por plataforma Meet el día 24 de noviembre del presente año desde la sede de Engativa Calle 80 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, tratando los siguientes temas:

Política del Eje de Gestión de la Tecnología

En la subred integrada de servicios de salud ESE norte nos comprometemos a gestionar permanentemente la tecnología, mediante un proceso racional dentro del ciclo de gestión de la tecnología (Planeación, Adquisición, Instalación, Uso Clínico, Mantenimiento y Disposición final), dando respuesta a las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y colaboradores.

Ciclo de Gestión de la Tecnología



- ✓ **Planeación**

La fase de planeación recopila los pasos mediante los cuales se establece el cambio tecnológico y/o la adquisición de nuevas tecnologías.

- ✓ **Adquisición**

Dentro de la implementación de una nueva tecnología para la Subred Integrada de servicios de Salud Norte se debe efectuar el análisis de alternativas relacionando la seguridad, eficacia y efectividad de cada una, para la selección dentro del contexto de seguridad al paciente y la sostenibilidad del servicio, determinando el uso clínico y desarrollo de guías para el uso adecuado de la tecnología, teniendo en cuenta el estudio previo a la adquisición basado en evidencias de uso, calidad pertinencia y aseguramiento de la calidad de los servicios de salud.

- ✓ **Instalación**

Una vez realizada la recepción técnica de tecnología, se procede a validar los ítems de la tecnología adquirida dando inicio con la instalación de los mismos.

- ✓ **Uso Clínico**

Se cuentan con diferentes estrategias establecidas y ejecutadas desde el subproceso de gestión tecnología biomédica y por medio de las cuales se pretende apoyar el uso adecuado de la tecnología y prolongar la vida útil del equipo.

- ✓ **Mantenimiento**

Es indispensable dentro de la gestión de tecnología puesto que mediante de una serie de actividades periódicas o eventuales indicadas por el fabricante de la tecnología biomédica se minimizan riesgos y se asegurar la continua operación de esta, logrando que se encuentre en óptimas condiciones durante el tiempo de vida útil.

Beneficios:

- Prevención de fallas en los equipos biomédicos.
- Conservación de los equipos durante la vida útil.
- Disminución de costos.
- Contribución de manera oportuna frente a la prestación de servicios de salud mediante el cumplimiento de la calidad prevista por la ley.

✓ **Disposición Final de la Tecnología**

La disposición final es la última fase del ciclo de gestión de la tecnología, para esta parte se tiene en cuenta la matriz de Evaluación del inventario, vida útil, disponibilidad repuestos, mantenimiento, soporte técnico y renovación de la tecnología, esta matriz tiene como finalidad consolidar la información general de funcionamiento y estado financiero/económico

Mesa de Servicios

Se cuenta con un aplicativo institucional en el cual se realizan los requerimientos relacionados con fallas en la tecnología. Este reporte lo puede realizar cualquier persona que cuente con usuario y contraseña.


Cada servicio de cualquier unidad cuenta con el usuario y contraseña generado desde el subproceso de sistemas de información TICS, teniendo en cuenta la estructura establecida (tres primeras letras de la unidad seguida de un punto y el servicio) así:

INICIO DE SESIÓN	NOMBRE	APELLIDO	CORREOS ELECTRÓNICOS	UBICACIÓN
cha.urgencias	URGENCIAS	CHAPINERO		HOSPITAL CHAPINERO
ema.urgencias	URGENCIAS	EMAUS		HOSPITAL ENGATIVA > Hospital Emaus
eng.admisionesurgencias	ADMISIONES URGENCIAS	ENGATIVA		HOSPITAL ENGATIVA
eng.consultoriosurgencias	CONSULTORIOS URGENCIAS	ENGATIVA		HOSPITAL ENGATIVA
eng.coordinacionurgencias	COORDINACION URGENCIAS	ENGATIVA		HOSPITAL ENGATIVA
eng.facturacionurgencias	FACTURACION URGENCIAS	ENGATIVA		HOSPITAL ENGATIVA
eng.urgencias	URGENCIAS	ENGATIVA		HOSPITAL ENGATIVA
eng.urgenciaspediatria	URGENCIAS PEDIATRIA	ENGATIVA		HOSPITAL ENGATIVA
sim.coordurgencias	COORDINACION URGENCIAS	SIMON BOLIVAR		HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR
sim.criticosurgencias	CRITICOS URGENCIAS	SIMON BOLIVAR		HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR
sim.salasurgencias	SALAS URGENCIAS SIMON BOLIVAR			HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR

Dentro del requerimiento se debe notificar: la novedad que presenta, ubicación exacta con sede y servicio, placa o identificación, quien reporta, los casos que se generen serán atendidos directamente por personal de biomédica de la sede.

Para el reporte de fallas con equipos de terceros, se realiza la primera respuesta por parte del personal de gestión tecnología biomédica de la Subred Norte, posteriormente el líder de sede realizará la gestión del correctivo o requerimiento a la empresa.

Cuando se dé la solución en la mesa de servicio por parte de gestión tecnología biomédica, el servicio deberá aprobar o rechazar la solución, cuando esta sea aprobada deberán calificar el servicio prestado de 1 a 5.

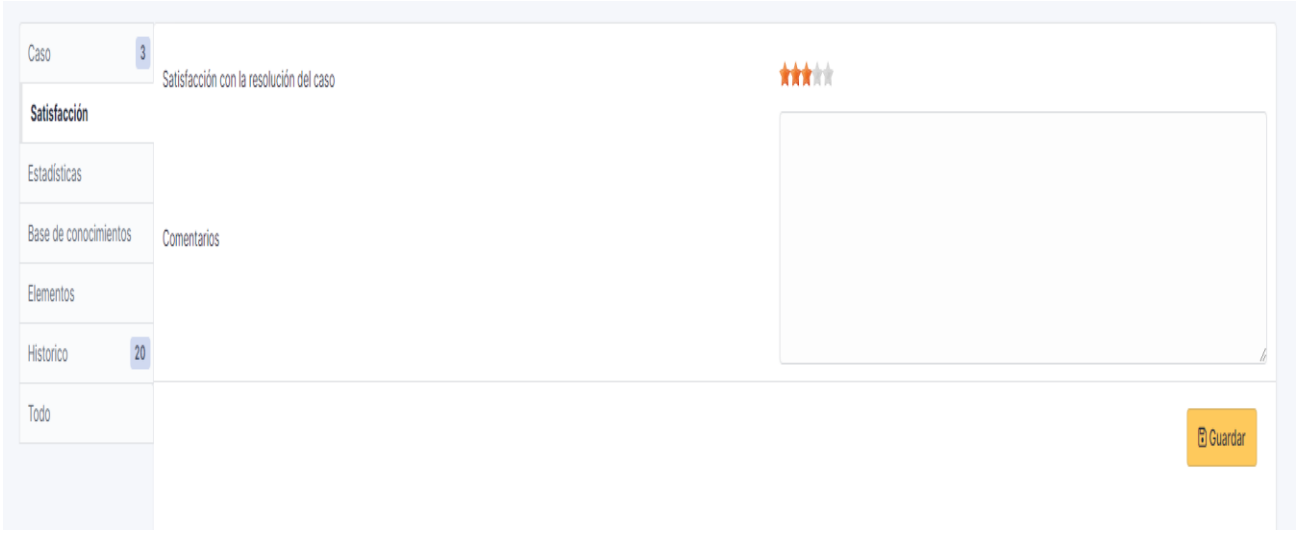

Para llevar a cabo la medición del servicio prestado, gestión tecnología biomédica cuenta con la promesa de valor establecida por medio de dos líneas, la primera es la línea EN CAMPO, esta línea es el tiempo de respuesta desde la recepción de la solicitud hasta la firma del reporte por parte del subproceso y del servicio asistencial en donde se registran las fechas y horas en que se realiza la intervención.


Por otra parte, la segunda línea denominada MESA DE SERVICIO, es la medición del tiempo desde el momento en que se crea el caso hasta la calificación de satisfacción por parte del servicio, por tal motivo es de vital importancia realizar el seguimiento hasta que se obtenga la calificación.

TIEMPOS DE RESPUESTA					
CAMPO			MESA DE SERVICIO		
BAJA CRITICIDAD	MEDIA CRITICIDAD	ALTA CRITICIDAD	BAJA CRITICIDAD	MEDIA CRITICIDAD	ALTA CRITICIDAD
24 HORAS	8 HORAS	2 HORAS	48 HORAS	8 HORAS	4 HORAS


Stickers de identificación

Los equipos biomédicos cuentan con una serie de stickers los cuales permiten identificarlo y que cumpla con todos lo necesario para su óptimo funcionamiento, dentro de los cuales podemos encontrar:

- ✓ **Mantenimiento preventivo.**

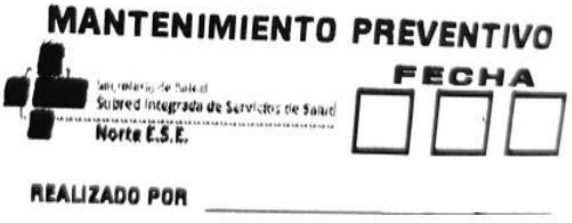

- ✓ **Aseguramiento metrológico**

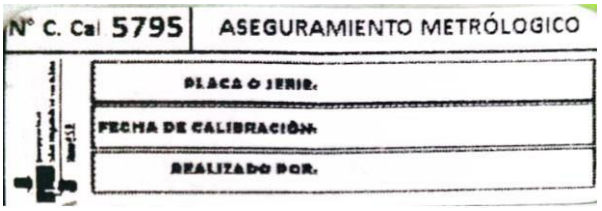

- ✓ **Activo Fijo**



- ✓ **Clasificación del riesgo**



Esta información se puede encontrar en ALMERA bajo el código "AP-AT-M-02 Manual de gestión de la tecnología".

La satisfacción y percepción positiva del usuario y su familia frente a la atención recibida.

Tecnología humanizada

Aspectos para tener en cuenta con el usuario

1. **Desconocimiento:** Genera miedo ansiedad, sorpresa, apatía por diferentes estímulos de los equipos, como ruido, dolor, incomodidad, frio - se debe dar toda la información del examen, beneficios, implicaciones de la repetición del examen y forma de uso de los equipos.
2. **Que debería hacer el usuario:** El usuario debe tener claras las indicaciones de lo que debe hacer durante el examen o el uso de los equipos – quedarse quieto, respirar, moverse de cierta forma.
3. **Preparación:** El usuario debe saber cómo es la preparación para cada examen que se le va a realizar como ayuno, consumo de agua, medicación, ropa cómoda etc.

Termohigrómetro.

Equipo biomédico que nos permite realizar la medición de la temperatura y humedad a través de un bulbo interno o externo.







Características

- Facilita el transporte por su peso.
- Avisa con alarmas visuales y audibles inconsistencias en los valores medibles por el equipo.
- Permite la programación de la hora, fecha y según necesidad fijar una alarma para tener un margen de parámetros de funcionamiento.
- Cuenta con tres pulsadores en su parte frontal para realizar su programación y a veces un botón de encendido en la parte posterior del equipo.
- Permite sensar valores del bulbo interno y externo del equipo (IN-OUT).
- Capta valores de temperatura máximos y mínimos (MAX- MIN).

Funciones


- Medir la temperatura (interna y externa).
- Medir la humedad.

Consideraciones

- Operar con una batería AAA.
- Colocar la sonda suspendida en el ambiente sin tocar ninguna superficie.
- Fijar el equipo sin colocarle esparadrapo porque es un foco de infección.
- Diligenciar el formato de la plataforma NETUX en el cual se lleva el seguimiento de las mediciones obtenidas permitiéndonos tener la certeza de que estamos llevando un correcto almacenamiento de los dispositivos médicos.
- Retirar la batería del equipo cuando se termine, para evitar que se sulfate el puerto de inserción de la misma.
- La temperatura externa (OUT) solo podrá ser sensada con la sonda conectada.




TERMOHIGROMETROS PRESENTES EN LAS MOVILES SUS RESPECTIVAS PARTES Y FUNCIONAMIENTO.

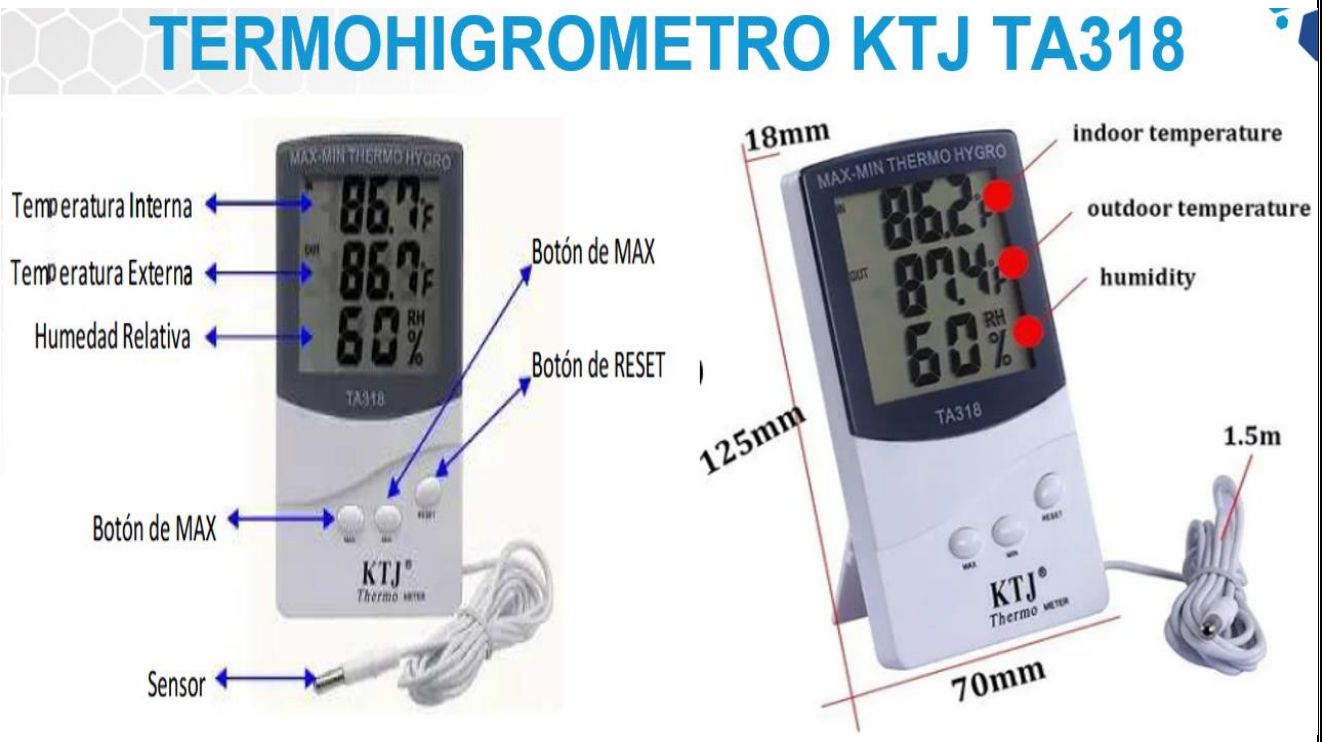

FICHA TECNICA TERMOHIGROMETRO KTJ TA 318

Uso	Ambiental (IN) Sensor externo (OUT) Congelación - Refrigeración Cuartos fríos - Neveras
Intervalo Temperatura (IN)	0 °C a 50 °C - Resolución 0.1 °C
Intervalo Temperatura de Sensor Externo (OUT)	-50 °C a 70 °C - Resolución 0.1 °C
Intervalo Humedad Relativa	25 %HR a 98 %HR – Resolución 1 %HR
Largo del cable (sensor fijo)	148 cm
Tamaño del instrumento	125mm x 70mm x 18mm
Tamaño de los números	17mm
Selector	°C / °F
Exactitud	+/- 1.0 °C +/- 5 %HR
Alimentación	1 batería “AAA” (incluida)
Fijación	Orificio al respaldo para ser colgado o soporte para sobreponer.
Display	Grande y de fácil lectura

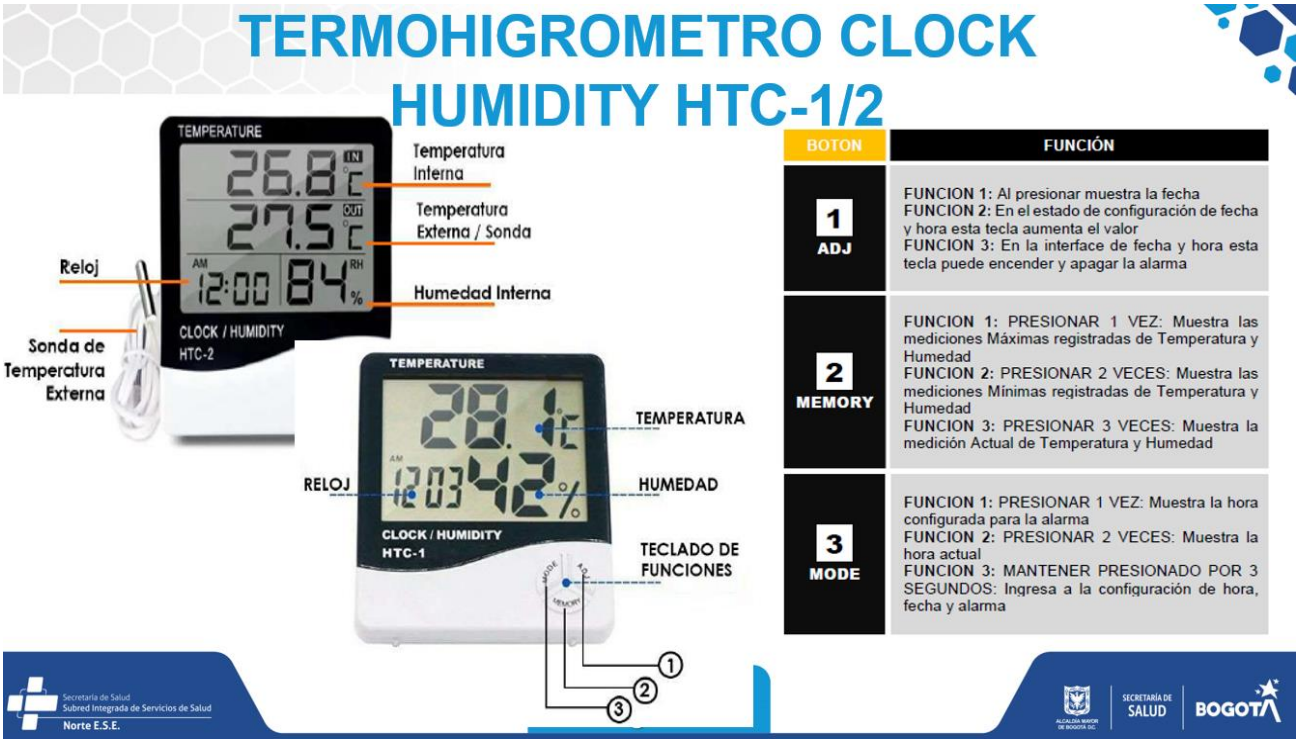

1 Advertencias

El termohigrómetro digital modelo HTC-1 (De ahora en adelante denominado Dispositivo) fue diseñado para monitorear la temperatura y humedad ambiental.
Posee sensor interno, función de lectura de máximos y mínimos, unidad de medida (°C) y reloj incorporado.
Utilizar el equipo no respetando las instrucciones del fabricante, puede alterar los requisitos de seguridad del aparato.
El equipo debe ser instalado en un sitio protegido de las vibraciones, del agua y de los gases corrosivos, donde la temperatura ambiente no supere el valor reflejado en los datos técnicos.

2 Especificaciones Técnicas

- Pantalla LCD de dígitos grandes
- Bajo consumo de energía
- Alta estabilidad y precisión
- Medición de temperatura y humedad interior
- Selector de escala de temperatura Celsius y Fahrenheit
- Memoria de valor MAX / MIN de temperatura y humedad.
- Dos modos de visualización del tiempo: 12h / 24h
- Función de apuntar en cada hora
- Función de alarma diaria
- Función de visualización de calendario
- Función de visualización de reloj y fecha, cambio automático en 5 segundos entre reloj y fecha
- Fuente de alimentación: Pila 1.5V (tamaño AAA) x 1 (No Incluida)

Temperatura

- Escala Temperatura: -10 a 50 grados centígrados (14 a 122 grados Fahrenheit)
- Resolución de Temperatura: 0.1°
- Precisión de Temperatura: ± 2°

Humedad

- Escala Humedad: 10% a 99% de humedad relativa
- Precisión de Humedad: +/- 10% de humedad relativa

3 Descripción

El termohigrómetro es un instrumento de medición por medio del cual podrá conocer la temperatura y humedad ambiental en el almacén, oficina, depósito o en el lugar que elija para su ubicación. Con este dispositivo usted podrá saber si los productos almacenados se encuentran dentro de parámetros seguros de temperatura y humedad, y se mantengan en buen estado de conservación.
Este dispositivo mide la humedad relativa ambiente expresándola en porcentaje (%), la cual es la relación que existe entre el contenido de agua en el aire y la cantidad máxima que el aire puede absorber hasta su saturación. La humedad relativa llega al punto de saturación (100%) cuando el aire ya no puede absorber mayor cantidad de agua.

TERMOHIGROMETRO CLOCK KEX GERMANY SH- 109





INSTRUCCIONES DE PULSADORES

MAX/MIN: Al presionar este botón, podremos acceder a las memorias de máxima y mínima registradas por el instrumento.

CLEAR (se utiliza para borrar las memorias de máxima y mínima, manteniéndolo presionado por 5 segundos)

IN/OUT: Al oprimir este botón , seleccionaremos las funciones (IN temperatura ambiente) (OUT temperatura sensor externo)

FZ. ALERT: Este botón nos permite programar la alarma del instrumento con el sensor out entre -1°c y 4°c

FICHA TECNICA TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH- 109

Tipo:	Ambiental + sensor externo (cable)
Rango temperatura ambiente (IN):	-10°c A 50°c – resolución 0.1°c
Rango temperatura ambiente (OUT):	-50°c A 70°c – resolución 0.1°c
Largo del cable (sensor out) fijo:	194cm
Rango humedad relativa:	20 % hr A 99%hr –resolución 1%hr
Tamaño del instrumento:	110mm x 98mm x 22mm
Tamaño de los números:	27mm
Exactitud:	+/- 1.0°c - 5% HR
Alimentación:	1 batería "AAA"
Fijación:	Rotículo al respaldo para ser colgado o soporte para sobreponer


HUMEDAD


ESTADOS DE HUMEDAD RELATIVA:

- Dry - Seco 30% a 60%
- Comfort. – Estado confortable 45% a 55%
- Wet – Humedad 55% a 80%




REGISTRO Y DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA PLATAFORMA NETUX

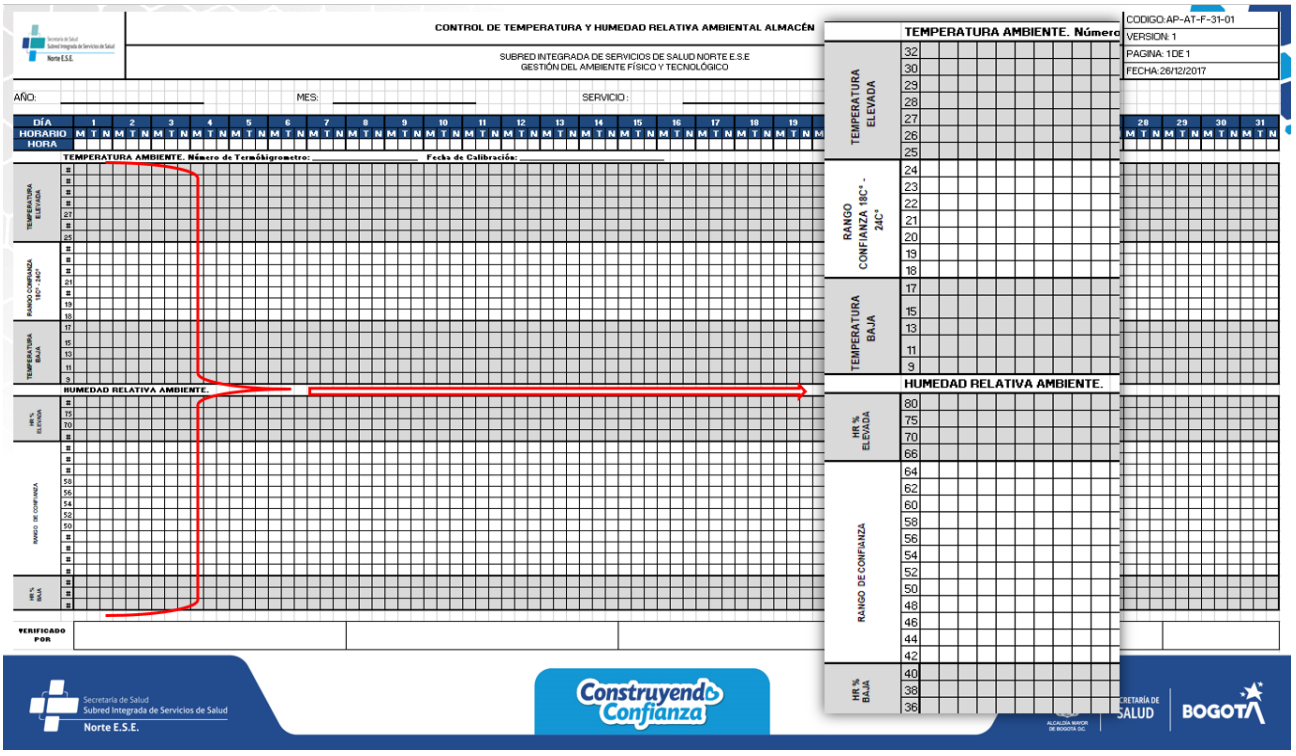

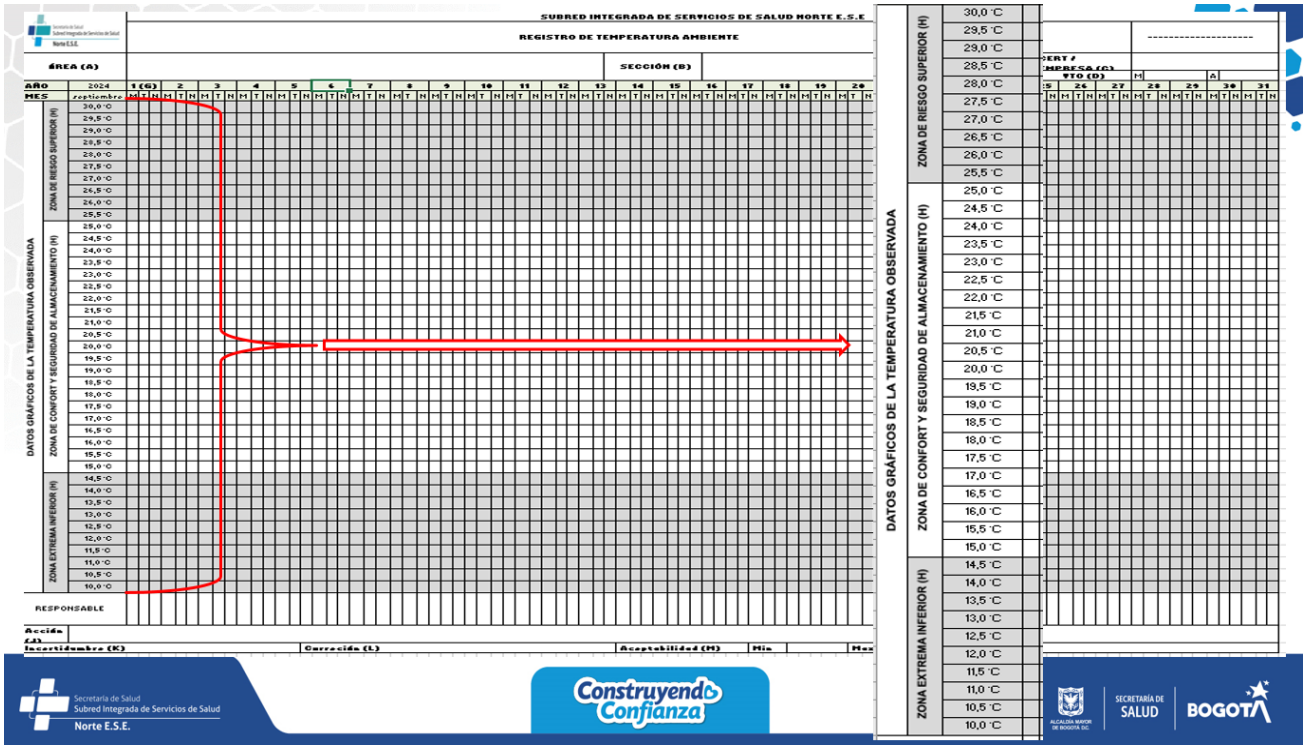

En la página de ALMERA podrán encontrar todos los protocolos institucionales, incluyendo el de limpieza y desinfección de equipos biomédicos.

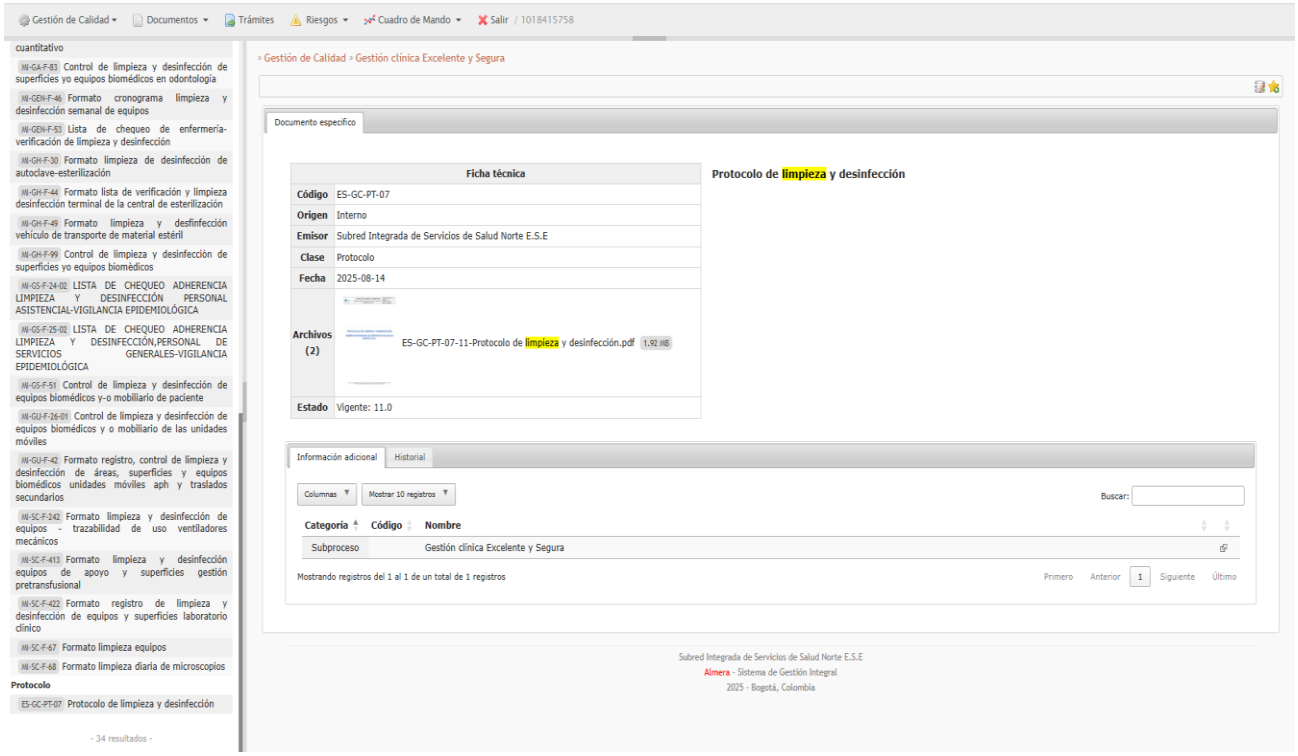


DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA PLATAFORMA NETUX.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E																		
	REGISTRO Y CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS, SUPERFICIES Y EQUIPOS BIOMEDICOS UNIDADES MOVILES APH																	-----	
AÑO:				MES:				MOVIL:										SERVICIO:	
DIA	HORA	TIPO DE LIMPIEZA REALIZADA		TECHO		PAREDES Y PUERTAS		PISO		CAMILLA PRINCIPAL		FERULA ESPINAL LARGA		GABINETES		EQUIPOS BIOMEDICOS Y ACCESORIOS		RESPONSABLE DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION	OBSERVACIONES
		RUTINARIA	TERMINAL	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N		


T-504
T-509
T-489
6889
SQU 225
6972


T-509
SQU 225
6972
T-509
05-2024
Juan C.

TERMOMETROS PERMITIDOS EN LAS MOVILES

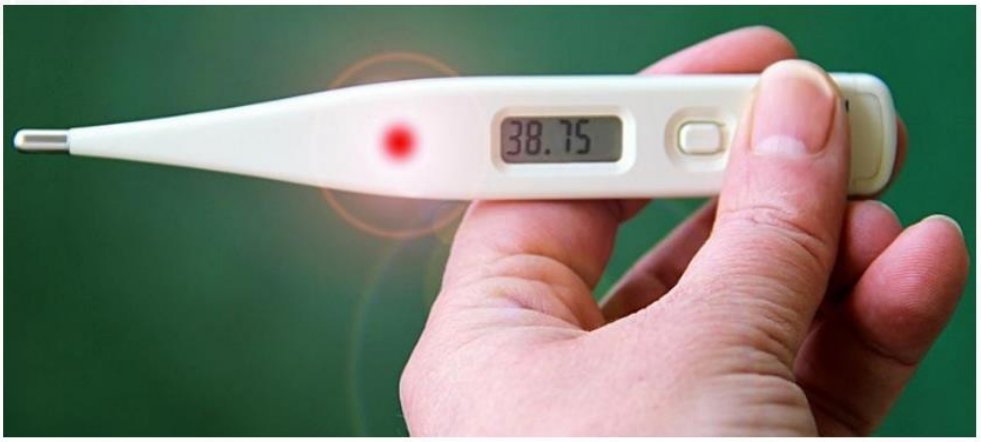

Construyendo Confianza

IMPORTANTE


Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASEGURAMIENTO METROLOGICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN															FECHA ELABORACIÓN CRONOGRAMA:	
EQUIPO	MARCA	MODELO	PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLE	PERIODICIDAD DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	HTC-2	NO REQUIERE MANTENIMIENTO													SUBRED NORTE	ANUAL
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	NO REQUIERE MANTENIMIENTO													SUBRED NORTE	ANUAL
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA 318	NO REQUIERE MANTENIMIENTO													SUBRED NORTE	ANUAL
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH - 109	NO REQUIERE MANTENIMIENTO													SUBRED NORTE	ANUAL



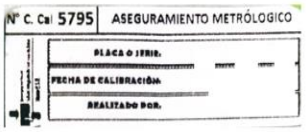



Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Construyendo Confianza


Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Salud Bogotá

FACTOR DE CORRECCIÓN TERMOHIGROMETRO

Valor numérico que se calcula durante la calibración para corregir las desviaciones entre la lectura del instrumento y el valor verdadero.

4.RESULTADOS DE CALIBRACIÓN (TEMPERATURA)

VALORES DE REFERENCIA		UNIDAD	MEDICIÓN 1		MEDICIÓN 2		MEDICIÓN 3		PROMEDIO		INCERTIDUMBRE	ERROR	MÁXIMO ERROR PERMITIDO (+- °C)	TOLERANCIA MAX	TOLERANCIA MIN	RESULTADO
			EQ. PATRÓN	EQ. BAJO PRUEBA	EQ. PATRÓN	EQ. BAJO PRUEBA	EQ. PATRÓN	EQ. BAJO PRUEBA	EQ. PATRÓN	EQ. BAJO PRUEBA						
REF 1	IN	°C	21	20,9	25,8	25,7	25,8	25,7	24,20	24,10	0,26	0,10	1,00	25,20	23,20	CUMPLE
REF 2	OUT	°C	1	0,4	5	4,5	10	9,5	5,33	4,80	0,26	0,53	1,00	6,33	4,33	CUMPLE

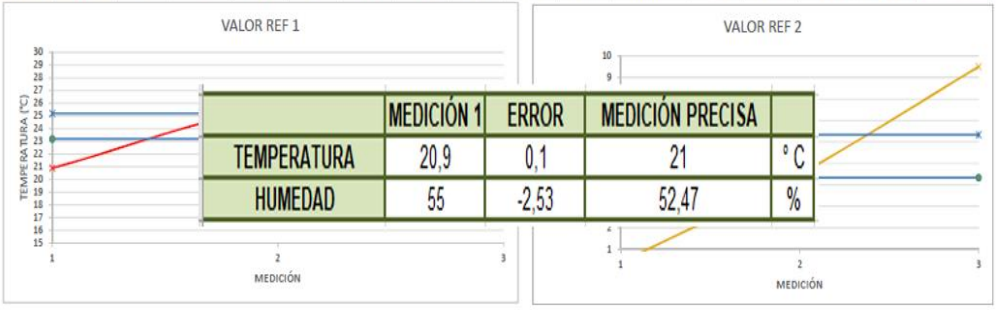

	MEDICIÓN 1	ERROR	MEDICIÓN PRECISA	
TEMPERATURA	20,9	0,1	21	° C
HUMEDAD	55	-2,53	52,47	%

5. RESULTADOS DE CALIBRACIÓN (HUMEDAD RELATIVA)

VALORES DE REFERENCIA		UNIDAD	MEDICIÓN 1		MEDICIÓN 2		MEDICIÓN 3		PROMEDIO		INCERTIDUMBRE	ERROR	MÁXIMO ERROR PERMITIDO (%HR)	TOLERANCIA MAX	TOLERANCIA MIN	RESULTADO
			EQ. PATRÓN	EQ. BAJO PRUEBA	EQ. PATRÓN	EQ. BAJO PRUEBA	EQ. PATRÓN	EQ. BAJO PRUEBA	EQ. PATRÓN	EQ. BAJO PRUEBA						
REF 1	IN	%HR	52,2	55	44,6	47	44,6	47	47,13	49,67	0,26	-2,53	5,00	52,13	42,13	CUMPLE

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. — Confianza — Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Salud Bogotá


APROPIACIÓN DEL TEMA


CAPACITACIÓN DE VENTILADORES					
FECHA:	**24. OCT.2025**	**HORA INICIAL:**	**18:30**	**HORA FINAL:**	**19:30**
NOMBRE COMPLETO	**CEDULA**	**DEPENDENCIA**	**MOVIL**	**Prueba**	**Puntuación**
Nancy castellanos	1014185918	SECUNDARIOS	7096	PosTest	100 / 100
Yenny Fonseca	52808189	SECUNDARIOS	7005	PosTest	100 / 100
Luis Miguel Moreno Montaña	1030548974	SECUNDARIOS	7096	PosTest	100 / 100
Hugo Roa Jaimes	79689072	APH	6839	PosTest	100 / 100
Edna const ORTEGON Mendoza	52762256	APH	6840	PosTest	100 / 100
John arias	80213212	SECUNDARIOS	6850	PosTest	100 / 100
Diana Marcela Garzón Mateus	1070962081	SECUNDARIOS	6966	PosTest	100 / 100
Leydi Johanna Collazos García	53029916	SECUNDARIOS	6966	PosTest	100 / 100
ERNA esperanza galvis rincon	30080816	SECUNDARIOS	7095	PosTest	100 / 100
César Antonio Casamayor Delgado	1034317288	APH	7082	PosTest	100 / 100
Cristhian Hernando Hernández peña	1012387878	SECUNDARIOS	7005	PosTest	100 / 100
Lucy Orjuela González	52712254	SECUNDARIOS	6967	PosTest	100 / 100
Julián moreno	80913619	SECUNDARIOS	Despacho	PosTest	40 / 100


Paulo César Gómez Pantoja	11320056	APH	6891	PosTest	100 / 100
Jenyffer Castrillon	1030643737	APH	6979	PosTest	100 / 100
Romer Angel Ardila Castellanos	1016073556	SECUNDARIOS	6967	PosTest	100 / 100
Claudia Ximena Algarra Silva	53043264	SECUNDARIOS	7095	PosTest	100 / 100
Yady Palomo Romero	52534509	SECUNDARIOS	Despacho	PosTest	100 / 100
Nubia Alexandra cortés Mateus	1018407086	SECUNDARIOS	6847	PosTest	100 / 100
Ivonne Andrea Albadán Quiceno	1012353688	APH	6887	PosTest	100 / 100
Jaime Andrés Vargas	80425320	SECUNDARIOS	7005	PosTest	100 / 100
MARILUZ Cifuentes Rodríguez	52467523	SECUNDARIOS	7097	PosTest	100 / 100
Iván Orlando Guerrero Fernández	7181944	SECUNDARIOS	6850	PosTest	80 / 100
Hugo César Duarte Arias	7169606	SECUNDARIOS	6966	PosTest	100 / 100
Germán vargas	19477032	APH	6894	PosTest	80 / 100
Nelson Camilo Silva leon	1023941936	SECUNDARIOS	7005	PosTest	100 / 100
Cristian Camilo García	1026574088	APH	7098	PosTest	100 / 100
Ruddy Andrea Sanabria	1019084064	SECUNDARIOS	6850	PosTest	100 / 100
Johan Felipe castro Gómez	1010175962	APH	7030	PosTest	100 / 100
Sandra Milena Pereira	52503615	SECUNDARIOS	6850	PosTest	100 / 100
Joan Sebastian García Triviño	1024572032	APH	SMS030	PosTest	80 / 100
Yanet Esperanza Acosta gracias	52489645	SECUNDARIOS	7097	PosTest	80 / 100
Jeyson sanabria foero	1014270131	APH	6908	PosTest	100 / 100
Juan Manuel alarcon	79308986	APH	6887	PosTest	100 / 100
Guillermo Alfonso Gaona Guerrero	16669457	APH	6893	PosTest	100 / 100
Orlando Fabian García Hereira	1140826299	APH	6969	PosTest	100 / 100
Luis Ernesto De la Rosa Campo	80221174	APH	MED101	PosTest	100 / 100
Jourwin David zorro	80911274	APH	6969	PosTest	100 / 100
Carmen alicia martinez gutierrez	52778419	SECUNDARIOS	6847	PosTest	100 / 100
William Andrés Gonzáles Sanz	1069724532	APH	6887	PosTest	80 / 100
Luz Dary Triana Hernández	37620372	APH	7030	PosTest	80 / 100
Oscar Javier Díaz Vega	79879198	APH	0000	PosTest	80 / 100
Kaisel Guerra Cordero	1034317982	APH	7099	PosTest	100 / 100
Marío Andres pinzon sanchez	1012341433	APH	7027	PosTest	100 / 100
JUAN MANUEL SEGURA CALDERON	80140368	APH	7029	PosTest	80 / 100
JESUS DAVID GOMEZ URIBE	1020766356	APH	N/A	PosTest	100 / 100
JESUS DAVID GOMEZ URIBE	1020766356	APH	N/A	PosTest	100 / 100

CARGO


104 respuestas

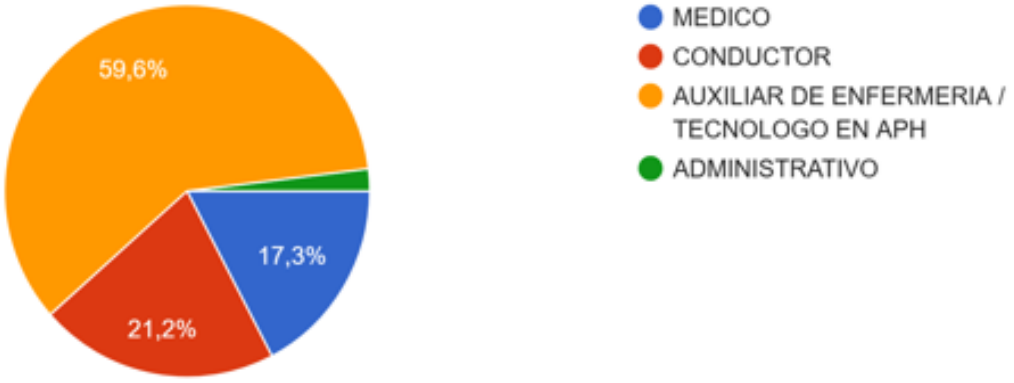


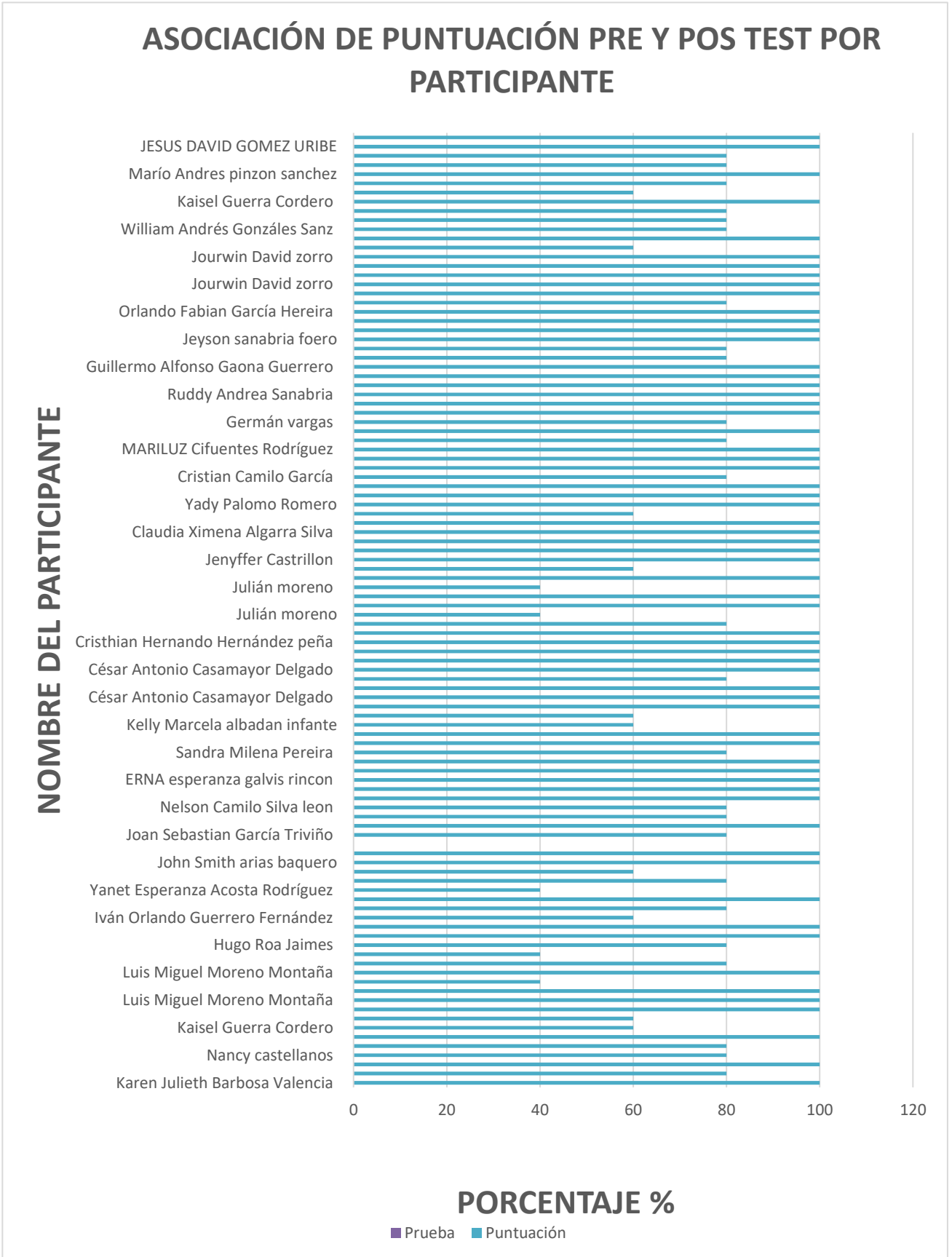
ASOCIACIÓN DE PUNTUACIÓN PRE Y POS TEST POR PARTICIPANTE
NOMBRE DEL PARTICIPANTE
JESUS DAVID GOMEZ URIBE
Marío Andres pinzon sanchez
Kaisel Guerra Cordero
William Andrés Gonzáles Sanz
Jourwin David zorro
Jourwin David zorro
Orlando Fabian García Hereira
Jeyson sanabria foero
Guillermo Alfonso Gaona Guerrero
Ruddy Andrea Sanabria
Germán vargas
MARILUZ Cifuentes Rodríguez
Cristian Camilo García
Yady Palomo Romero
Claudia Ximena Algarra Silva
Jenyffer Castrillon
Julián moreno
Julián moreno
Cristhian Hernando Hernández peña
César Antonio Casamayor Delgado
César Antonio Casamayor Delgado
Kelly Marcela albadan infante
Sandra Milena Pereira
ERNA esperanza galvis rincon
Nelson Camilo Silva leon
Joan Sebastian García Triviño
John Smith arias baquero
Yanet Esperanza Acosta Rodríguez
Iván Orlando Guerrero Fernández
Hugo Roa Jaimes
Luis Miguel Moreno Montaña
Luis Miguel Moreno Montaña
Kaisel Guerra Cordero
Nancy castellanos
Karen Julieth Barbosa Valencia
0
20
40
60
80
100
120
PORCENTAJE %
Prueba
Puntuación

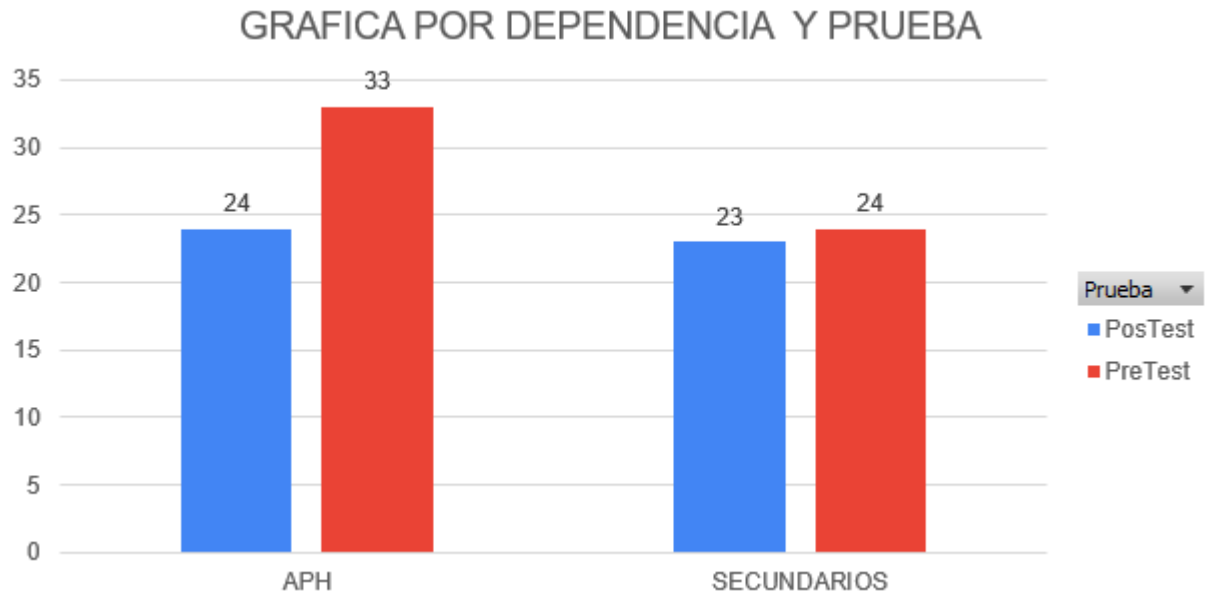

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ASITENCIA

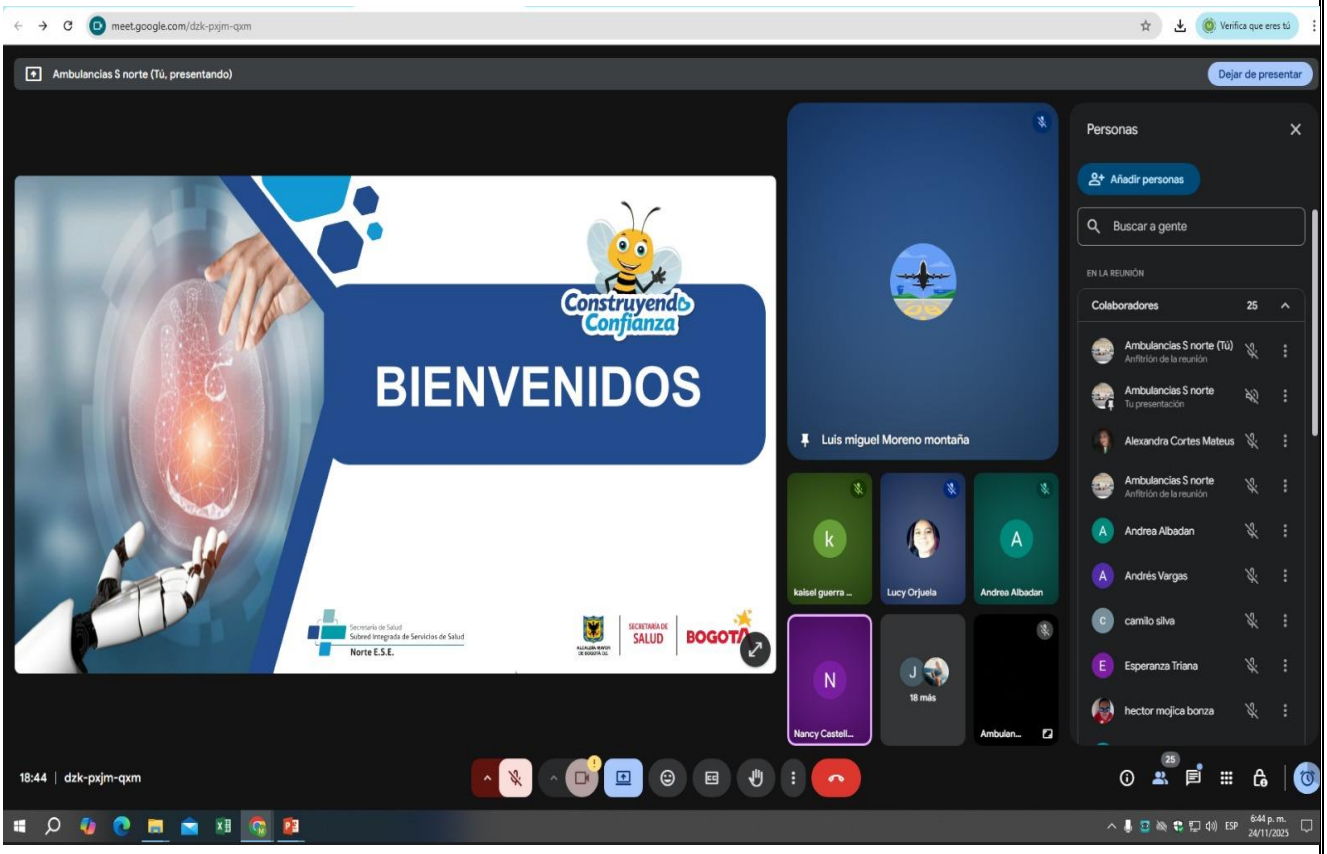

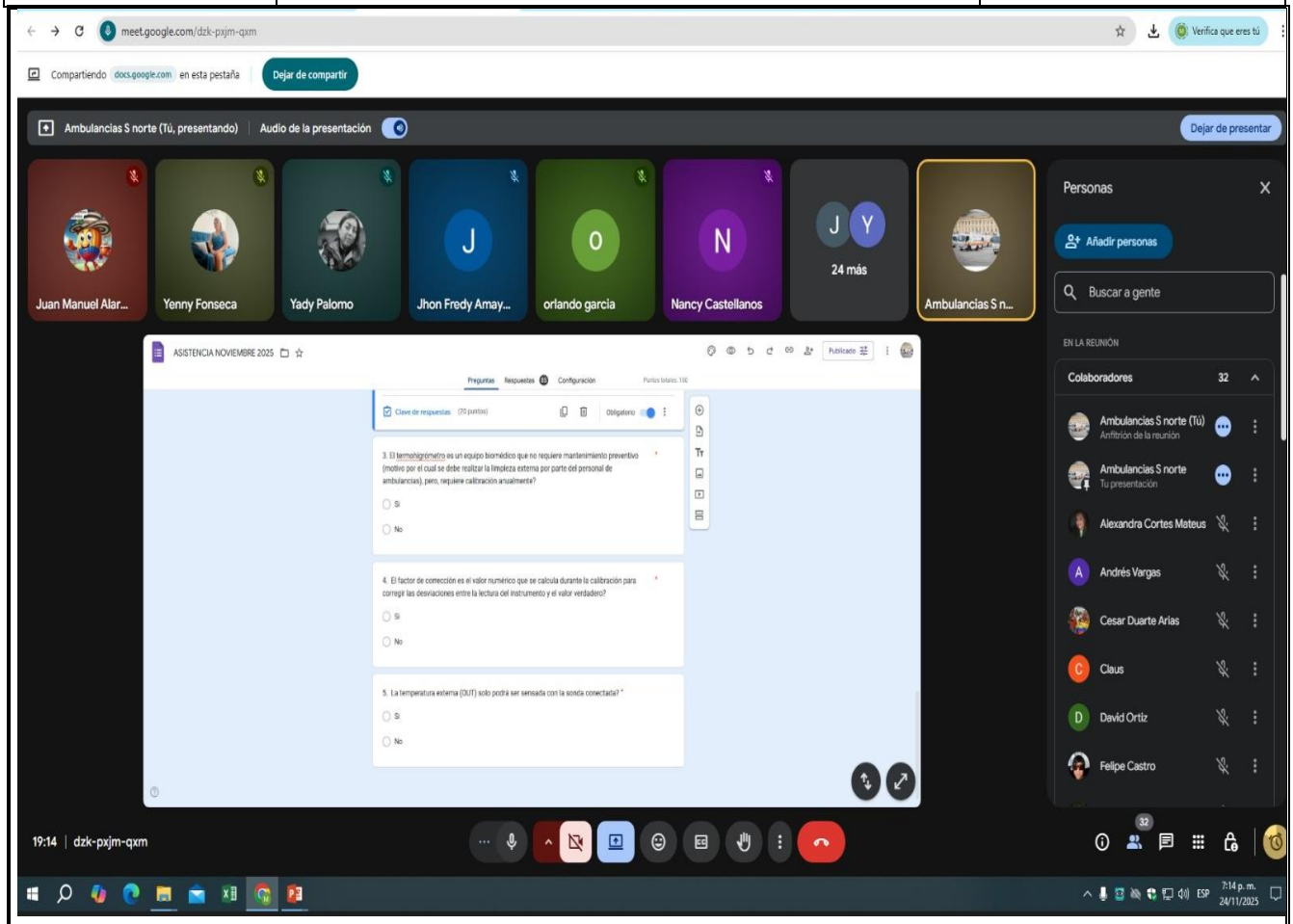

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Compromiso en el buen uso y cumplimiento de la limpieza y desinfección de los equipos biomédicos.	**Monica Cuevas** Ingeniera Biomédica	Por confirmar

DECISIONES / CONCLUSIONES

Se continuará con el plan de mejora para los colaboradores con baja adherencia inicial y personal que no asistió, se mantendrá el seguimiento para asegurar la eficacia del buen uso y cumplimiento de la limpieza y desinfección de los equipos biomédicos.