
FICHA TECNICA

T-301-08

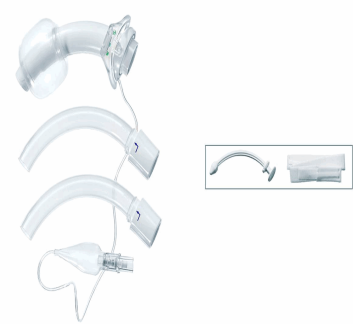

NOMBRE: Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, con balón No 08.

DESCRIPCIÓN:
Cánula de traqueostomía TWIST, no fenestrada con balón de baja presión No. 08, dos camisas o endocánulas con cierre de bayoneta, conector de 15 mm, placa de fijación al cuello ergonómica, tarjeta de identificación. Fabricada en poliuretano termosensible. Visible en procedimientos de Rx. Cinta acolchada para sujeción al cuello, garantiza fijación sin producir lesión en la piel. Diámetro Interno de 8,0mm Diámetro Externo de 11.4mm Longitud 76mm.

INDICACIONES DE USO:
Mantener permeable la vía aérea superior del paciente con traqueostomía que requiera ventilación mecánica o suplemento de oxígeno.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:
Material termosensible. D.I de la cánula corresponde a la talla. Introductor con punta atraumática, Placa TWIST de forma anatómica que gira sobre dos ejes, garantiza ajuste al cuello y libertad de movimientos sin ejercer presión sobre la tráquea

PRECAUCIONES:
No debe ser expuesta a la aplicación de calor intenso. Tiempo de uso en paciente: 29 días.

CONTRAINDICACIONES:
Según criterio médico. No realizar proceso de esterilización. NO emplear NUNCA productos de limpieza agresivos, o desinfectantes que liberen cloro o productos para limpieza odontológica. NO hierva ni someta a vapor.

MATERIAL:
Poliuretano grado médico termosensible. Todos los materiales utilizados han sido homologados internacionalmente para aplicaciones médicas libres de látex y Ftalatos (DEHP).

CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:
De uso único por paciente. No debe hervir ni esterilizar a vapor.

METODO:	Oxido de Etileno
DISPOSICIÓN FINAL:	Relleno Sanitario
REGISTRO INVIMA:	2019DM-0020270
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIB
PRESENTACIÓN:	UNIDAD
FABRICANTE:	Tracoe Medical, Gmbh
MARCA:	TRACOE MEDICAL

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Atención:
Placa, inscripción verde:
Cánula exterior no fenestrada

Se recomienda comprobarse la dureza del cierre en bayoneta de la cánula interna esta buena práctica no tardara más de 5 segundos.
Introduzca la cánula interna, compruebe que desliza fácilmente dentro de la cánula exterior hacia adelante y atrás varias veces antes de insertar el tubo.
Realice prueba del neumotaponador para verificar su integridad.

Las cánulas no se deben limpiar con detergentes de uso doméstico, limpiadores de dentaduras postizas, cloro o alcohol concentrado ya que estos pueden tener un efecto adverso sobre la función de los productos. NO hierva ni someta estos productos a esterilización con vapor, ya que no se puede garantizar la seguridad del producto después esto.

Limpieza recomendada:

Por el tiempo de uso y patología del paciente se puede formar biofilm y acumulación de secreciones se recomienda sumergir en un detergente pentaenzimatica (BioClean) para su limpieza por 5 minutos, enjuagar con agua destilada y dejar secar.

. "Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."