

REPORTE TECNICO TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☒ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

INSTITUCION	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR - HOGAR CASA NOSTRA	EQUIPO	TENSIOMETRO
NIT ó CC	860 020 194-6	MARCA	GMD
UBICACIÓN	DIAG 52 B SUR No. 26 - 80	MODELO	CE0123
ACCESORIOS		SERIE	17069841
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO	
		Bueno ☒ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores - perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad	X			Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores			
Sistemas Mecánicos	X			Fuente de voltaje			
Sistemas Neumáticos	X			Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores			
Carcasa	X			Brazales	X		
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	19	11	2021
Próximo mantenimiento	19	11	2022

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT: 807642290
TEL: 3320685
Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20212044

Fecha de calibración 2021-11-19

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA
DIRECCIÓN: DIAG 52 B SUR No. 26 – 80
CIUDAD: BOGOTÁ
EQUIPO: TENSIOMETRO
MARCA: GMD
MODELO: CE0123
NÚMERO DE SERIE: 17069841

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado se encuentra descrito en el documento "Recomendación internacional" OIML R 16-1:2002, para calibración de esfigmomanómetros mecánicos no invasivos.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 18.9

Humedad Relativa %: 56.8

RANGOS DE MEDICIÓN

- 0 – 300mmHg (8 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA	TRAZABILIDAD
MANOVACUOMETRO	BIO-TEK	DPM-2PLUS	126834	MET-LP-CC 6461	2021/02/24	

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20212044

Fecha de calibración 2021-11-19

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON Presión (mmHg)	INSTRUMENTO Presión (mmHg)	CORRECCIÓN Presión (mmHg)	Factor de cobertura K	INCERTIDUMBRE Presión (mmHg)
0	0	0	1,96	0,6
030	34	4	1,96	0,6
060	64	4	1,96	0,6
100	104	4	1,96	0,6
140	140	0	1,96	0,6
160	160	0	1,96	0,6
180	180	0	1,96	0,6
200	200	0	1,96	0,6

Máximo error obtenido: 4mmHg**Nota:**

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT 203794129-0
TEL: 2320685

Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

REPORTE TECNICO TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☒ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

INSTITUCION	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR - HOGAR CASA NOSTRA	EQUIPO	TENSIOMETRO
NIT o CC	860 020 194-6	MARCA	GMD
UBICACIÓN	DIAG 52 B SUR No. 26 - 80	MODELO	CE0123
ACCESORIOS		SERIE	17000332
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO	
		Bueno ☒ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores - perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad	X			Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores			
Sistemas Mecánicos	X			Fuente de voltaje			
Sistemas Neumáticos	X			Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores			
Carcasa	X			Brazaletes	X		
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	19	11	2021
Próximo mantenimiento	19	11	2022

ekimédicos
R.I. PATACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT 860 020 194-6
TEL: 2320685

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20212045

Fecha de calibración 2021-11-19

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA
DIRECCIÓN: DIAG 52 B SUR No. 26 – 80
CIUDAD: BOGOTÁ
EQUIPO: TENSIOMETRO
MARCA: GMD
MODELO: CE0123
NÚMERO DE SERIE: 17000332

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado se encuentra descrito en el documento "Recomendación internacional" OIML R 16-1:2002, para calibración de esfigmomanómetros mecánicos no invasivos.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:


Temperatura °C: 19.1

Humedad Relativa %: 56.8

RANGOS DE MEDICIÓN

- o 0 – 300mmHg (8 puntos)

TRAZABILIDAD

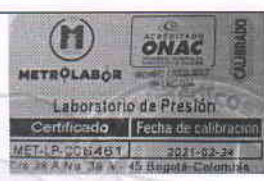INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA	TRAZABILIDAD
MANOVACUOMETRO	BIO-TEK	DPM-2PLUS	126834	MET-LP-CC 6461	2021/02/24	

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20212045

Fecha de calibración 2021-11-19

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON Presión (mmHg)	INSTRUMENTO Presión (mmHg)	CORRECCIÓN Presión (mmHg)	Factor de cobertura K	INCERTIDUMBRE Presión (mmHg)
0	0	0	1,96	0,6
032	30	2	1,96	0,6
092	90	2	1,96	0,6
114	110	4	1,96	0,6
142	140	2	1,96	0,6
162	160	2	1,96	0,6
181	182	1	1,96	0,6
204	202	2	1,96	0,6

Máximo error obtenido: 4mmHg**Nota:**

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

REPORTE TECNICO TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☒ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

INSTITUCION	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA	EQUIPO	TENSIOMETRO
NIT o CC	860 020 194-6	MARCA	GMD
UBICACIÓN	DIAG 52 B SUR No. 26 – 80	MODELO	CE0123
ACCESORIOS		SERIE	NO REGISTRA
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO	
		Bueno ☒ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad	X			Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores			
Sistemas Mecánicos	X			Fuente de voltaje			
Sistemas Neumáticos	X			Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores			
Carcasa	X			Brazaletes	X		
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X
OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO					

Fecha	19	11	2021
Próximo mantenimiento	19	11	2022

Firma y sello técnico

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20212046

Fecha de calibración 2021-11-19

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA
DIRECCIÓN: DIAG 52 B SUR No. 26 – 80
CIUDAD: BOGOTÁ
EQUIPO: TENSIOMETRO
MARCA: GMD
MODELO: CE0123
NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado se encuentra descrito en el documento "Recomendación internacional" OIML R 16-1:2002, para calibración de esfigmomanómetros mecánicos no invasivos.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 18.5

Humedad Relativa %: 57.2

RANGOS DE MEDICIÓN

- 0 – 300mmHg (8 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA	TRAZABILIDAD
MANOVACUOMETRO	BIO-TEK	DPM-2PLUS	126834	MET-LP-CC 6461	2021/02/24	

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20212046

Fecha de calibración 2021-11-19

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON Presión (mmHg)	INSTRUMENTO Presión (mmHg)	CORRECCIÓN Presión (mmHg)	Factor de cobertura K	INCERTIDUMBRE Presión (mmHg)
0	0	0	1,96	0,6
030	28	2	1,96	0,6
068	66	2	1,96	0,6
114	110	4	1,96	0,6
142	140	2	1,96	0,6
162	160	2	1,96	0,6
184	180	4	1,96	0,6
236	240	4	1,96	0,6

Máximo error obtenido: 4mmHg**Nota:**

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT: 80764129-9
TEL: 8320685

Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

REPORTE TECNICO TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☒ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

INSTITUCION	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA	EQUIPO	TENSIOMETRO
NIT ò CC	860 020 194-6	MARCA	PRESTIGE
UBICACIÓN	DIAG 52 B SUR No. 26 – 80	MODELO	CE0123
ACCESORIOS		SERIE	207326
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO	
		Bueno ☒ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad	X			Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores			
Sistemas Mecánicos	X			Fuente de voltaje			
Sistemas Neumáticos	X			Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores			
Carcasa	X			Brazaletes	X		
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	19	11	2021
Próximo mantenimiento	19	11	2022

Ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT 860 020 194-6
TEL: 2320685

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-44
Cel.: 301 436 7547 - 304 349 3326
Joseluisbocachica@yahoo.es
Ekimedicos@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colombia

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20212047

Fecha de calibración 2021-11-19

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA
DIRECCIÓN: DIAG 52 B SUR No. 26 – 80
CIUDAD: BOGOTÁ
EQUIPO: TENSIOMETRO
MARCA: PRESTIGE
MODELO: CE0123
NÚMERO DE SERIE: 207326

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado se encuentra descrito en el documento "Recomendación internacional" OIML R 16-1:2002, para calibración de esfigmomanómetros mecánicos no invasivos.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 18.5

Humedad Relativa %: 57.2

RANGOS DE MEDICIÓN

- 0 – 300mmHg (8 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA	TRAZABILIDAD
MANOVACUOMETRO	BIO-TEK	DPM-2PLUS	126834	MET-LP-CC 6461	2021/02/24	

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20212047

Fecha de calibración 2021-11-19

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


PATRON Presión (mmHg)	INSTRUMENTO Presión (mmHg)	CORRECCIÓN Presión (mmHg)	Factor de cobertura K	INCERTIDUMBRE Presión (mmHg)
001	0	1	1,96	0,6
029	28	1	1,96	0,6
060	58	2	1,96	0,6
101	100	1	1,96	0,6
142	140	2	1,96	0,6
162	160	2	1,96	0,6
180	178	2	1,96	0,6
199	200	1	1,96	0,6

Máximo error obtenido: 2mmHg**Nota:**

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.

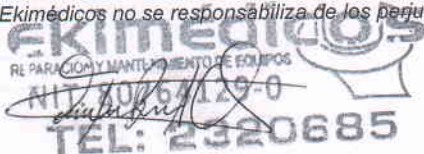

Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--