
VYGON
Value Life
VYGON COLOMBIA S.A.

CATETER EPICUTANEO CAVA 24G
REF: 2184-00

REF. 2184-00 (2.0 Fr. x 30cm)

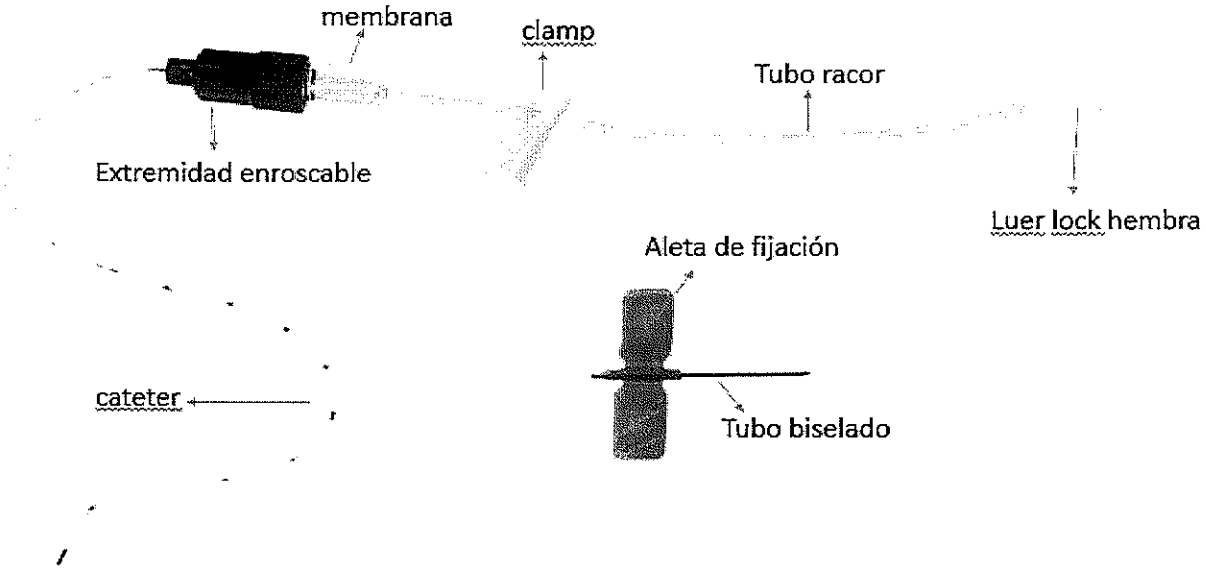

Descripción: Catéter intravenoso de silicona para la administración de soluciones y perfusión de medicamentos para prematuros y recién nacidos.

REFERENCIA	CATETER SILICONA O.R.X					INTRODUCTOR		
	∅ Int - ∅ Ext mm	Fr	Long cm	Flujo (ml/min)	Volumen muerto ml	∅ Ext mm	G	Long mm
2184-00	0.3 – 0.6	2	30	5.0	0.20	1.0	19	27

Presentación:

- Bandeja
- Unidades por caja: 30
  - Un Catéter línea radio-opaca ORX de silicona con marcado centimétrico cada 5 cm hasta 20 cm de la extremidad distal
  - Un introductor tipo aguja mariposa de 19G.
  - Un racor intermediario amovible tipo Easy-Lock con prolongador integrado.

000147

VYGON
Value Life
VYGON COLOMBIA S.A.

CATETER EPICUTANEO CAVA 24G
REF: 2184-00

Utilización: Es un catéter intravenoso que se introduce por vía periférica (vena basílica o cefálica pero también por vena axilar, safena, temporal, yugular externa o cubital). Se coloca con una aguja metálica que lleva una base con aletas flexibles. Este dispositivo es usado en nutrición parenteral, antibioterapia intravenosa, inyección en continuo de drogas, cardio o vaso-activas, recién nacidos con problemas gastrointestinales, deficiencia respiratoria que deban ser sometidos a cirugía abdominal o torácica.

Precauciones de uso:

- Enjuagar los guantes con agua estéril para quitar el talco y el almidón que podrían adherirse a la superficie del catéter y provocar flebitis.
- Utilización de campos no tejidos, en lugar de campos de algodón que liberan más fibras y partículas.
- No dejar fuera de la piel mucho catéter; aumentando los riesgos de obstrucción.
- No realizar perfusión por gravedad; utilizar bomba de infusión.
- No interrumpir las perfusión
- No sobrepasar la presión máxima de 1,2 bar.
- No utilizar jeringa de 1ml., utilice de jeringa de 10ml.
- No retraer el catéter cuando se esté colocando, ya que se puede romper y emigrar al torrente sanguíneo.
- No administrar sangre o productos sanguíneos.
- No realizar extracciones de sangre.
- No desenroscar totalmente las dos piezas del racor Easy-Lock.
- Nunca retirar el catéter a través de la aguja.
- No poner en contacto el tubo de silicona con soluciones a base de alcohol, acetona o tintura de yodo.

Esterilización: Oxido de etileno (Caducidad en 5 años)

Registro Sanitario: 2015DM-0013929

Lugar de Fabricación: Comunidad Europea (CE)

Recomendaciones:

* Almacenar lejos del calor, de la humedad y de la luz.

* No usar si el empaque unitario (Bandeja) se encuentra abierto.

Convenciones: Fr. (French = corresponde a tres veces el diámetro exterior del catéter en milímetros), SI (Silicona).

000148

VYGON
Value Life
VYGON COLOMBIA S.A.

CATETER EPICUTANEO CAVA 24G
REF: 2184-00

VERSION #	FECHA			NUMERAL	RAZON DEL CAMBIO
	D	M	A		
1	23	01	04	N/A	Por renovación de registro se incluyó la letra R1.
2	10	11	15	N/A	Registro Sanitario Nuevo

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO: Asistente de Ventas **NOMBRE**: Mónica P. Carrillo Vega. **FIRMA:**	**CARGO:** Gerente General **NOMBRE:** Jaime Addie Guzman. **FIRMA:**	**CARGO:** Gerente General **NOMBRE**: Jaime Addie Guzman. **FIRMA:**

000149