
VYGON COLOMBIA S.A.

CATETER PREMICATH PEDIATRICO
REF: 1261-20

REF: 1261-20 (28G x 20cm)

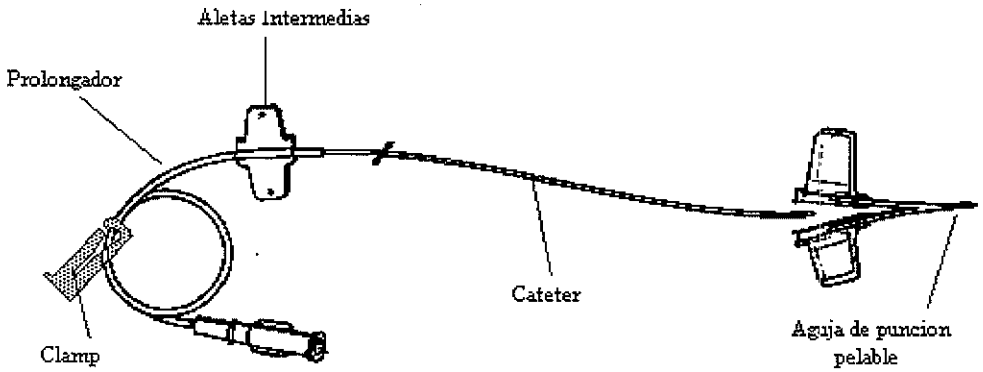

Descripción: Catéter en Poliuretano (PUR) con línea radio-paca ORX. Posee una aleta de fijación y prolongador fijo, unido a dicha aleta y marcado cada 5 cm.

Referencia	CATETER (PUR) ORX					AGUJA PELABLE	
	∅ Int. -∅ Ext mm	G	Long cm	Flujo ml/mn	Volumen muerto ml	∅ Ext mm	Long mm
1261-20	0,17 – 0,36	28	20	0,5	0,14	0,7	18

Presentación:

- Bandeja
- Unidades por caja: 25

  Cada unidad contiene:
  - 1 Catéter en Poliuretano de 28G. (PUR) ORX
  - 1 Aguja pelable de 24G.

Utilización: Es un catéter que se introduce en la vena periférica a través de una aguja pelable de 24G. El Premicath está destinado principalmente a la nutrición parenteral a la administración de medicamentos por vía endovenosa en prematuros de muy bajo peso. Las venas de acceso generalmente utilizadas para la colocación del catéter son: La vena basílica, cubital mediana, safena, yugular, temporal o femoral.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Utilice una estricta asepsia
- Si requiere un acortamiento del catéter, utilice a tal fin un bisturí para efectuar una incisión vertical.
- **EL FABRICANTE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LAS COMPLICACIONES RESULTANTES DE TAL ACCION.**
- Puncionar la vena con la aguja pelable, previa desinfección y secamiento de la piel.

- Cuando prepare el paciente tenga en cuenta lo siguiente:
  - Calcule la longitud del catéter que desea introducir, pudiéndose cortar únicamente por su extremidad distal
  - Lavar los guantes de látex con agua estéril para eliminar los residuos de almidón o talco.
  - Hacer un torniquete
  - Limpiar y preparar la piel en el punto de inserción del catéter.
  - Colocar los campos estériles.

PRECAUCIONES DE USO:

- No deje el catéter en contacto prolongado con disolventes orgánicos como el alcohol o la acetona. Confirmar su localización por el reflujo de sangre venosa.
- No estirar el catéter ni someterlo a presiones superiores a 1,5 bares (21.75Psi, 1.140mm-Hg.) ya que eso provocaría su rotura y embolia. Es posible sobrepasar 4 ó 5 veces las presiones máximas de seguridad utilizando cualquier jeringa manualmente.
- No utilizar jeringas con capacidad inferior a 10cc. Las jeringas de pequeño volumen, generan presiones más altas que las de mayor capacidad. Proceder a la venopunción con el aguja pelable del kit (No utilizar jeringa de 1ml).
- No presionar demasiado las aletas de la aguja, ya que esto podría provocar su rotura prematura.
- No hacer retroceder el catéter a través de la aguja, ya que esté podría dañarse con bisel de la misma, con el consiguiente riesgo de rotura del tubo y por consiguiente de embolia del catéter. Sino se consigue colocar el catéter en posición correcta, interrumpir el procedimiento retirando simultáneamente el catéter y la aguja.
- No ejercer la presión en la piel sobre la aguja o su bisel ya que se podría dañar la vena o el catéter.

Esterilización: Oxido de etileno (Caducidad en 5 años)

Registro Sanitario: 2015DM-0013396 **Vence: 13/08/2025**

Lugar de Fabricación: Comunidad Europea (CE)

Recomendaciones:

* Almacenar lejos del calor, de la humedad y de la luz.

* No usar si el empaque unitario (Blister) se encuentra abierto

Convenciones: Fr (French = corresponde a tres veces el diámetro exterior del catéter en milímetros), PUR (Poliuretano)

VYGON COLOMBIA S.A.

CATETER PREMICATH PEDIATRICO
REF: 1261-20

REGISTRO DE CAMBIO

VERSION #	FECHA			NUMERAL	RAZON DEL CAMBIO
	D	M	A		
1	23	01	04	N/A	Se incluyó en el número de registro sanitario por Renovación del mismo la letra R1
2	28	07	15	N/A	Cambio número de Registro Sanitario

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO: Asistente de Ventas **NOMBRE**: Mónica Carrillo **FIRMA:**	**CARGO:** SubGerente **NOMBRE:** Jaime Adie G **FIRMA:**	**CARGO:** SubGerente **NOMBRE**: Jaime Adie G. **FIRMA:**