
FICHA TECNICA - REFERENCIA ST380-0001

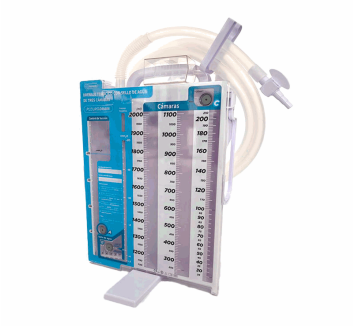

Sistema de drenaje torácico de tres cámaras Pleurodrain

Sistema de drenaje torácico para evacuar aire y/o líquido de la cavidad torácica o mediastínica, para ayudar a reestablecer la expansión pulmonar y restaurar la dinámica respiratoria del paciente. Permite succión por medio de conexión a succión de vacío, ajustable para mayor o menor presión de succión con un máximo de presión de 20cmH2O. Permite sución por gravedad, según requerimientos propios del caso a tratar.

Marca: L.M. INSTRUMENTS

Material: La unidad de drenaje está hecha de ABS), (PVC), (TPE), (LDPE), silicona y otros materiales plásticos equivalentes.

Indicaciones de uso:

Indicado para uso en todos los casos de complicaciones respiratorias graves, traumas, hemotórax, neumotórax, cirugía de mediastino o tórax, para reestablecer la respiración y presiones pleurales normales del paciente.

Fabricante: Alleva Medical Limited

Beneficios del producto:

Características:	Beneficios:
Conector de tubo paciente preinstalado para adaptar tubos 16Fr-40Fr y otro para 8Fr-12Fr	Permite adaptar diferentes tubos torácicos incluso pediátricos, para varios procedimientos
Diagnóstico con monitor de fuga de aire y escala de medición	Precisión diagnóstica con escala de medición de 5 a 1 para fugas en el sistema de drenaje
Válvula automática de alivio de presión positiva	Se abre automáticamente a presión positiva baja, para eliminar neumotórax a tensión
Puerto muestreo autosellante al inicio de cámara recolección para tomar muestras recientes	Extracción de muestras de manera segura y eficiente tomando secreciones recientes

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."

Precauciones:

Pleurodrain debe permanecer en posición vertical siempre para garantizar que sello de agua funcione. No obstruir válvula de liberación de presión -. No activar válvula manual de alivio cuando la succión no esté funcionando o en drenaje por gravedad

Contraindicaciones:

No exponer espacio intrapleural a presión atmosférica. El vaciado de la cámara de recolección y extracción del tubo torácico causan daño al paciente debido a la presión negativa súbita. Asegurar válvula de succión en posición ON durante el drenaje

Humedad	40% - 85%
Dispositivo de un solo uso	SI
Temperatura almacenamiento	Temperatura ambiente
Ciclos de reprocesamiento	N/A
Método	Oxido de Etileno
Disposición Final	Incineración

Condiciones de Reprocesamiento: Dispositivo de unico uso

Registro Sanitario	2024DM-0028828
Clasificación de riesgo	IIA
Vida útil	3 años
Calibración	NO
Presentación comercial	
Unidades por empaque	1
Unidad mínima de venta	1

Observaciones:

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."